

11 in 1 (EMS) 80K SLIMMING MACHINE


< Instruction Manual >



In order to use this product correctly, please read the manual carefully and keep it properly.

Part name

LCD and operation screen

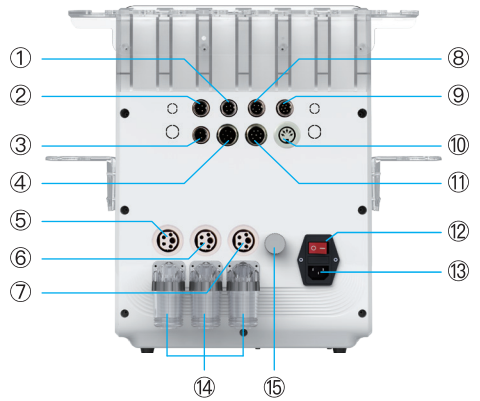

① 4-pole RF interface

② 3-pole RF interface

③ 80K interface

④ Cold head interface

⑤ Large negative pressure interface

⑥ Medium negative pressure interface

⑦ Small negative pressure interface

⑧ Laser board interface

⑨ 6-pole RF interface

⑩ EMS head interface

⑪ BIO&LED interface

⑫ Switch

⑬ Power interface

⑭ Filter

⑮ Negative pressure regulation

Part name



3 RF Head



4 RF Head




6 RF Head



EMS handle



80K Fat Burn Head

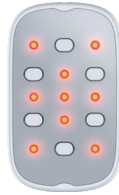

Laser & EMS



Small negative pressure head



Medium negative pressure head



Large negative pressure head




Cold head




BIO&LED

Usage method

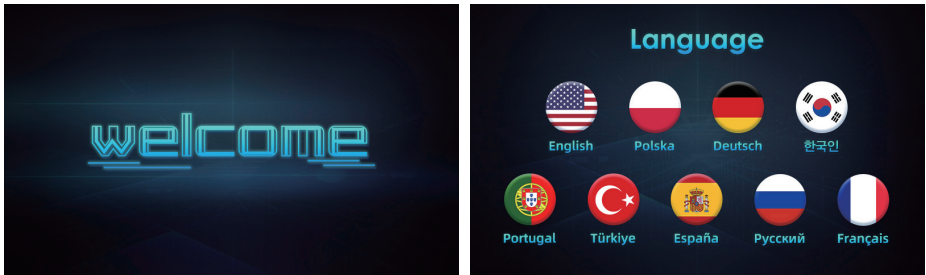

1. Connect the function head to the corresponding jack and connect the power cord.
2. Press the power switch, and the indicator light and LCD will light up. At this time, click below to select the required language.

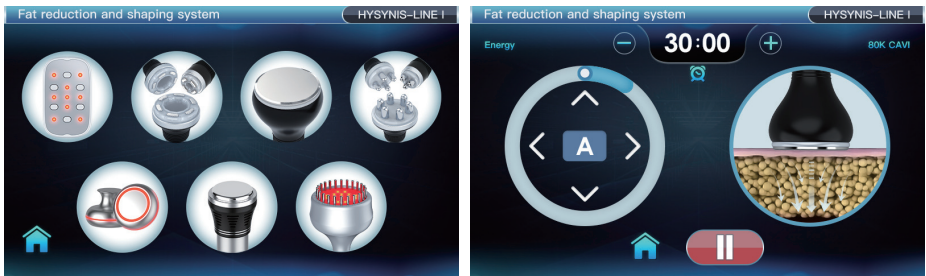

3. Select the work head you want.
4. After selecting, adjust the required working mode, working time, and working energy, click the “▶” button to start working, click the “||” button to pause when using, or click the “🏠” button to return to the working head selection interface.
5. After use, press the “🏠” button and turn off the power.

Function of Different Head

3 RF Head: Suitable for 1–2 Energy



MODE: (A: red light is always on), (B: red light flashes every 1 second), (C: red light flashes every 2 seconds), (D: red light flashes every 3 seconds).
TIME: The default is 30 minutes, adjustable from 0 to 60 minutes. When it is 0, the

instrument will stop working.

ENERGY: Adjust the RF energy of the working head. The larger the number, the greater the energy. The 10th gear can be adjusted.

Use for the face or eyes



When use on the skin, it can firms and lifts the skin, reduces wrinkle. Improvement eyes circulation, shrink pores, and puffy eyes. Eliminate wrinkles, dark circles and bags under the eyes. Improve skin texture and eliminate sagging eyes. Rejuvenates the skin and improves eye contour.

4 RF Head: Suitable for 2–3 Energy



MODE: (A: red light is always on), (B: red light flashes every 1 second), (C: red light flashes every 2 seconds), (D: red light flashes every 3 seconds).
TIME: The default is 30 minutes, adjustable from 0 to 60 minutes. When it is 0, the

instrument will stop working.

ENERGY: Adjust the RF energy of the working head. The larger the number, the greater the energy. The 10th gear can be adjusted.

Use for the face and neck



Firm skin, enhance skin elasticity, facial wrinkle elimination, skin tightening and lifting, reduce face swelling, reduce redness, relieve eye fatigue, remove dark circles, And eye bags, improve skin quality.

6 RF Head: Suitable for 2-5 Energy



MODE: (A: red light is always on), (B: red light flashes every 1 second), (C: red light flashes every 2 seconds), (D: red light flashes every 3 seconds).
TIME: The default is 30 minutes, adjustable from 0 to 60 minutes. When it is 0, the

instrument will stop working.


ENERGY: Adjust the RF energy of the working head. The larger the number, the greater the energy. The 10th gear can be adjusted.

Use for the back and waist of Body, thighs and calves



Can tighten the waist, firm and help body shaping. Soften the muscles of the arms and thighs, give the whole body massage and tighten the arms and thighs.

80K Fat Burn Head

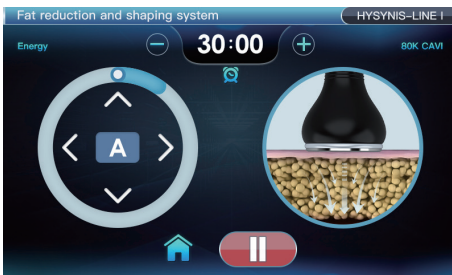

MODE: (A: continuous vibration), (B: stop for 1 second per vibration), (C: stop for 2 seconds per vibration), (D: stop for 3 seconds per vibration).

TIME: The default is 30 minutes, adjustable from 0 to

60 minutes. When it is 0, the instrument will stop working.
ENERGY: Adjust the vibration energy of the working head. The larger the number, the greater the energy. The 10th gear can be adjusted.

Use for the body Shaping



It can dissolve fat, detoxify lymph, tighten skin, enhance skin elasticity, reach fat layer directly, have the function of directional RF output, accelerate the movement of fat cells to generate heat energy, and discharge the excess fat and toxin in the face out of the body through sweat glands, liver intestine circulation and lymph circulation, so as to dissolve fat.

Small negative pressure head



MODE: (A: red light is always on), (B: red light flashes every 1 second), (C: red light flashes every 2 seconds), (D: red light flashes every 3 seconds).
TIME: The default is 30 minutes, adjustable from 0 to 60 minutes. When it is 0, the

instrument will stop working.

ENERGY: Adjust the RF energy of the working head. The larger the number, the greater the energy. The 10th gear can be adjusted.

SUCTION: Adjust the suction time of negative pressure. The larger the number is, the longer the suction time will be. It is invalid when it is 0.

RELEASE: Adjust the suction time of negative pressure. The larger the number is, the longer the suction time is. It is invalid when it is 0.

Note: The inspiratory and outgassing intervals are only available when the number is adjusted at the same time.

Use for the face or eyes



Facial lifting, firming, anti-aging, relieving pain, scraping and cupping.

Improve skin sagging caused by fat and skin aging. Help eliminate waste materials in the body and promote metabolism. Negative pressure massage function can promote fat cell volume reduction. Vacuum negative pressure massage can fully absorb various skin tissues between the multi-polar thermal melting radio frequency, so that the radio frequency energy can reach the deep skin tissue more effectively. At the same time, the adsorption of negative pressure promotes blood circulation and metabolism. Let the muscle tissue be fully relaxed and relieve the fatigue of the skin and muscle tissue.

Medium negative pressure head



MODE: (A: red light is always on), (B: red light flashes every 1 second), (C: red light flashes every 2 seconds), (D: red light flashes every 3 seconds).

TIME: The default is 30 minutes, adjustable from 0 to 60 minutes. When it is 0, the

instrument will stop working.

ENERGY: Adjust the RF energy of the working head. The larger the number, the greater the energy. The 10th gear can be adjusted.

SUCTION: Adjust the suction time of negative pressure. The larger the number is, the longer the suction time will be. It is invalid when it is 0.

RELEASE: Adjust the suction time of negative pressure. The larger the number is, the longer the suction time is. It is invalid when it is 0.

Note: The inspiratory and outgassing intervals are only available when the number is adjusted at the same time.

Use for the face and neck



Shoulder and neck scraping therapy for lymphatic detoxification relieving pain, scraping and cupping.

Improve skin sagging caused by fat and skin aging. Help eliminate waste materials in the body and promote metabolism. Negative pressure massage function can promote fat cell volume reduction. Vacuum negative pressure massage can fully absorb various skin tissues between the multi-polar thermal melting radio frequency, so that the radio frequency energy can reach the deep skin tissue more effectively. At the same time, the adsorption of negative pressure promotes blood circulation and metabolism. Let the muscle tissue be fully relaxed and relieve the fatigue of the skin and muscle tissue.

Medium negative pressure head



MODE: (A: red light is always on), (B: red light flashes every 1 second), (C: red light flashes every 2 seconds), (D: red light flashes every 3 seconds).

TIME: The default is 30 minutes, adjustable from 0 to 60 minutes. When it is 0, the

instrument will stop working.

ENERGY: Adjust the RF energy of the working head. The larger the number, the greater the energy. The 10th gear can be adjusted.

SUCTION: Adjust the suction time of negative pressure. The larger the number is, the longer the suction time will be. It is invalid when it is 0.

RELEASE: Adjust the suction time of negative pressure. The larger the number is, the longer the suction time is. It is invalid when it is 0.

Note: The inspiratory and outgassing intervals are only available when the number is adjusted at the same time.

Body maintenance



Improve skin sagging caused by fat and skin aging. Help eliminate waste materials in the body and promote metabolism. Negative pressure massage function can promote fat cell volume reduction. Vacuum negative pressure massage can fully absorb various skin tissues between the multi-polar thermal melting radio frequency, so that the radio frequency energy can reach the deep skin tissue more effectively. At the same time, the adsorption of negative pressure promotes blood circulation and metabolism. Let the muscle tissue be fully relaxed and relieve the fatigue of the skin and muscle tissue.

Laser & EMS




MODE: (A: red light is always on), (B: red light flashes every 1 second), (C: red light flashes every 2 seconds), (D: red light flashes every 3 seconds).
TIME: The default is 30 minutes, adjustable from 0 to 60 minutes. When it is 0, the

instrument will stop working.

ENERGY: Adjust the micro-electric energy of the working head. The larger the number, the greater the energy. The 10th gear can be adjusted.

LIGHT: Adjust the brightness of the laser panel lamp. The greater the number, the greater the brightness. The 10th gear can be adjusted.

Use for the body Shaping

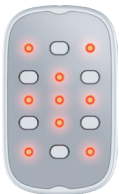

The Following information is provided for the correct utilization of IPL Skin treatment system. the Information includes not only the accident protection regulations the products comply with, but also the effective regarding proper use of the products.

Cold head



MODE: By default, only mode A is available.

TIME: The default is 30 minutes, adjustable from 0 to 60 minutes. When it is 0, the instrument will stop working.

ENERGY: Adjust the working energy of the working head.

The greater the number, the greater the energy. The 10 gears can be adjusted.



1. Help skin firmness, maintain elasticity, prevent allergies and other problems;
2. Shrink pores, lock water and reduce wrinkles;

BIO&LED



MODE: There are four (A/B/C/D) micro-electric massage modes, which can be selected according to personal preferences.

TIME: The default is 30 minutes, adjustable from 0 to 60 minutes. When it is 0, the

instrument will stop working.

ENERGY: Adjust the micro-electric energy of the working head.

The larger the number, the greater the energy. The 10th gear can be adjusted.

LED COLOUR: Adjust the light color. The light sequence is red light, green light, blue light, orange light, yellow light, purple light, blue light, circular light.

LIGHT: Adjust the light brightness, The 10 gears can be adjusted.



Application : forehead, eyes' around, cheek, mouth, double chin, neck, body
Microcurrent–safe and painless facial helps erase fine lines and wrinkles, while firming your skin and defining your features

EMS head



MODE: There are four (A/B/C/D) micro–electric massage modes, which can be selected according to personal preferences.
TIME: The default is 30 minutes, adjustable from 0 to 60 minutes. When it is 0, the instrument will

stop working.

ENERGY: Adjust the micro–electric energy of the working head. The larger the number, the greater the energy. The 10th gear can be adjusted.

HOT:Adjust the working head temperature, adjustable at 10 gears.




It is a non–invasive slimming treatment technology that can burn fat while exercising. Just like completing 20,000 sit–ups or squats in just 30 minutes, every 2 to 3 weeks, during 4 to 6 treatments, average fat decreases and muscle mass increases. The treatment area includes the abdomen, buttocks, arms and thighs. safe and comfortable treatment

Using Guidance


Thigh

- (1) From bottom to top, push to groin to dredge lymph;
- (2) Turning anticlockwise from bottom to top can help break down fat;
- (3) Decompose greasy by pushing back and forth;
- (4) Pull down from the knee to the groin to improve the curve.

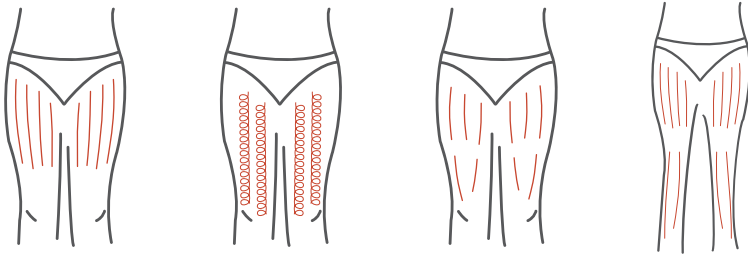


Hips

- (1) Pull to the waist in the direction of lymph;
- (2) Circle anticlockwise from bottom to top and move back and forth;
- (3) According to the muscle texture, it can slide and compact the buttock skin, making the buttock plump and firm, presenting the perfect curve.

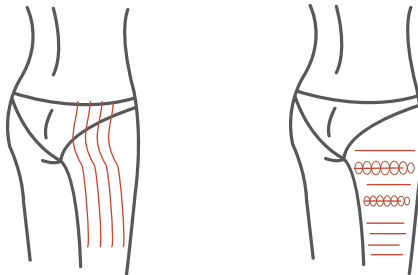

Back

- (1) Push back and forth 2–3 times;
- (2) Circle anticlockwise to stimulate the lymph nodes;
- (3) On the back, turn anticlockwise and move up and down to help break down fat;
- (4) Using lymphatic drainage technique to pull toxin to lymph nodes can help improve back curve.

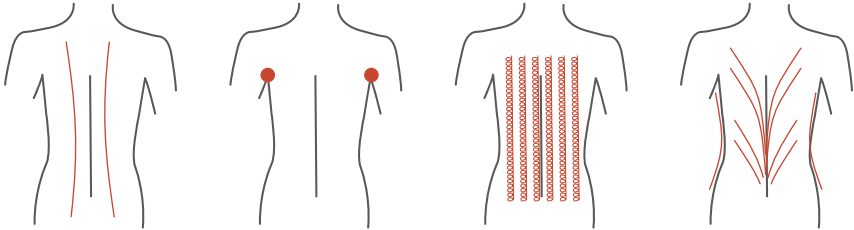

Arm


- (1) From the inner elbow to the armpit, do lymphatic drainage;
- (2) To stimulate lymph nodes in a circle;
- (3) Break down excess fat by turning it anticlockwise or pushing it back and forth;
- (4) Tighten skin from elbow to armpit.



Face



(1) Evenly apply the product on the face, use the face RF head, operate from the bottom to the top to lift the face, make the skin in a tense state, it is recommended to use for 5 minutes;

(2) Apply the product evenly to the face, use the RF head on the face, operate in the direction of the arrow, it is recommended to use it for 5–8 minutes.

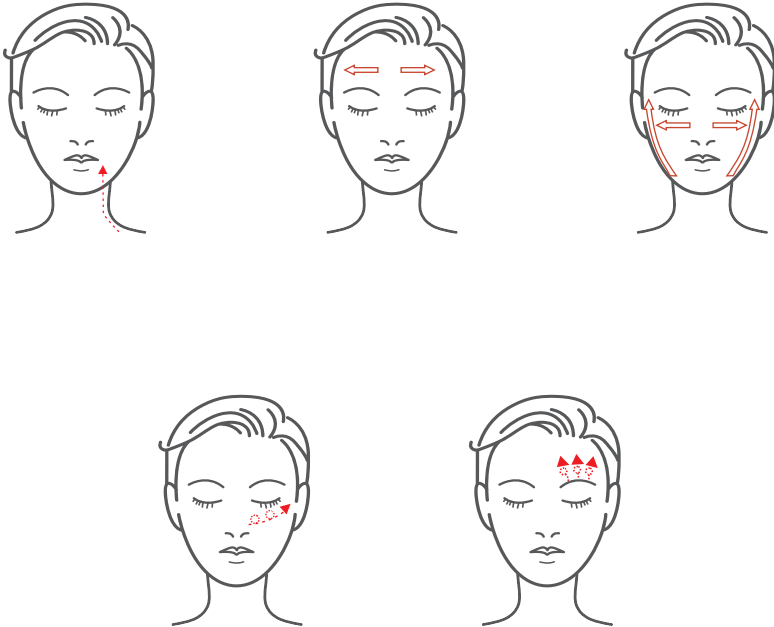

Abdomen

- (1) Around the navel from small to large, clockwise circle to help large intestine peristalsis;
- (2) From the small circle to the large circle, push it anticlockwise.

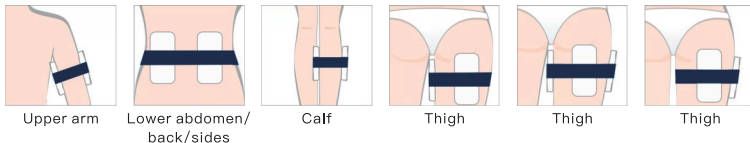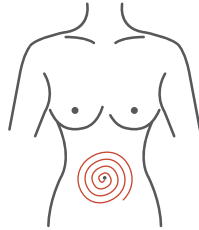

Warm Tips for You

1. Do not use on your original and dry skin surface, it will burn your skin. Make sure you apply cream or oils to your skin then you can use.
2. When using, there must be an aqueous medium (essential oil/creams, etc.), otherwise it will damage to the machine Do not use on the same part for too long, and avoid body parts with bones.
3. Do not connect the power until probe is well installed.
4. The machine is not allowed to replace probe when in the charging state.

5. Please take off the metal jewelry when using the machine.
6. When the machine is used for 1 hour, please stop for 10 minutes to let the machine rest.
7. Make sure you turn off the power after using, and clean the probe keep good maintenance for next time use.
8. Please keep the probe clean every time, use a dry cloth to wipe it, do not use water to clean.
9. After using, clean you skin and apply hydrating mask or creams, oils after 10 minutes.
10. When using 80KHead, some people may experience tinnitus. This is normal because this sound wave exceeds the range of human sound waves.

Warranty & After Service

We Promise that all the machine are experiences a strict inspection by us to ensure the best quality. We will use our professional skills to deal with your problem.

Hope you can join us on this journey together.

If you have any question or other problems about our products, please feel free to contact us without hesitation. We always by your sides.

Made in China

11 in 1 (EWS) 80K SCHLAMMMASCHINE


< Bedienungsanleitung >



Um dieses Produkt richtig zu verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie es richtig auf.

Bauteilname

LCD und
Bedienbildschirm

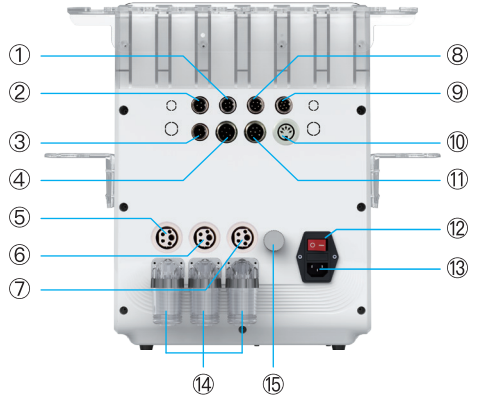

- ① 4-polige HF-Schnittstelle
- ② 3-polige HF-Schnittstelle
- ③ 80K Schnittstelle
- ④ Kaltkopfschnittstelle
- ⑤ Große Unterdruckschnittstelle
- ⑥ Mittlere Unterdruckschnittstelle
- ⑦ Kleine Unterdruckschnittstelle
- ⑧ Schnittstelle für Laserplatten

- ⑨ 6-polige HF-Schnittstelle
- ⑩ EMS-Kopfschnittstelle
- ⑪ BIO&LED Schnittstelle
- ⑫ Schalter
- ⑬ Leistungsschnittstelle
- ⑭ Filter
- ⑮ Unterdruckreglung

Bauteilname



3 RF Kopf



4 RF Kopf




6 RF Kopf



EMS-Griff



80K Fat
Burn Head

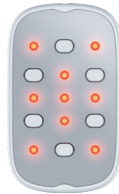

Laser
&EMS



Kleiner
Unterdruckkopf



Mittlerer
Unterdruckkopf



Großer
Unterdruckkopf



Kalter Kopf



BIO&LED

Verwendungsmethode



1. Schließen Sie den Funktionskopf an die entsprechende Buchse an und schließen Sie das Netzkabel an.
2. Drücken Sie den Netzschalter, und die Kontrollleuchte und das LCD leuchten auf. Zu diesem Zeitpunkt klicken Sie unten, um die gewünschte Sprache auszuwählen.



3. Wählen Sie den gewünschten Arbeitskopf aus.
4. Passen Sie nach der Auswahl den erforderlichen Arbeitsmodus, die Arbeitszeit und die Arbeitsenergie an, klicken Sie auf die Schaltfläche "▶", um mit der Arbeit zu beginnen, klicken Sie auf die Schaltfläche "||", um bei der Verwendung anzuhalten, oder klicken Sie auf die Schaltfläche "🏠", um zur Schnittstelle zur Arbeitskopfauswahl zurückzukehren.
5. Drücken Sie nach Gebrauch die Taste "🏠" und schalten Sie das Gerät aus.

Funktion verschiedener Kopfe

Kopf 3 RF: Geeignet für 1–2 Energie



MODE: (A: rotes Licht ist immer an), (B: rotes Licht blinkt alle 1 Sekunde), (C: rotes Licht blinkt alle 2 Sekunden), (D: rotes Licht blinkt alle 3 Sekunden).
ZEIT: Die Standardeinstellung ist 30 Minuten, einstellbar von 0 bis 60 Minuten. Wenn es 0 ist, hört das Instrument auf zu arbeiten.

ENERGIE: Stellen Sie die HF-Energie des Arbeitskopfes ein. Je größer die Zahl, desto größer die Energie. Der zehnte Gang kann eingestellt werden.

Anwendung für Gesicht oder Augen



Bei Anwendung auf der Haut kann es die Haut straffen und anheben, reduziert Augenzwinkern. Verbessert die Durchblutung der Augen, schrumpft Poren und geschwollene Augen. Beseitigen Sie Falten, dunkle Ringe und Taschen unter den Augen. Verbessern Sie die Hautstruktur und beseitigen Sie schlaffe Augen. Verjüngt die Haut und verbessert die Augenkontur.

4 RF Kopf: geeignet für 2–3 Energie



MODE: (A: rotes Licht ist immer an), (B: rotes Licht blinkt alle 1 Sekunde), (C: rotes Licht blinkt alle 2 Sekunden), (D: rotes Licht blinkt alle 3 Sekunden).
ZEIT: Die Standardeinstellung ist 30 Minuten, einstellbar von 0 bis 60 Minuten. Wenn es 0 ist, hört das Instrument auf zu arbeiten.

ENERGIE: Stellen Sie die HF-Energie des Arbeitskopfes ein. Je größer die Zahl, desto größer die Energie. Der zehnte Gang kann eingestellt werden.

Anwendung für Gesicht und Hals



Feste Haut, verbessern Hautelastizität, Beseitigung von Gesichtsfalten, Hautstraffung und –anhebung, reduzieren Gesichtsschwellungen, reduzieren Rötungen, lindern Augenermüdung, entfernen dunkle Ringe und Augenbeutel, verbessern Hautqualität.

Kopf 6 RF: Geeignet für 2–5 Energie



MODE: (A: rotes Licht ist immer an), (B: rotes Licht blinkt alle 1 Sekunde), (C: rotes Licht blinkt alle 2 Sekunden), (D: rotes Licht blinkt alle 3 Sekunden).
ZEIT: Die Standardeinstellung ist 30 Minuten, einstellbar von 0 bis 60 Minuten. Wenn es 0 ist, hört das Instrument auf zu arbeiten.


ENERGIE: Stellen Sie die HF-Energie des Arbeitskopfes ein. Je größer die Zahl, desto größer die Energie. Der zehnte Gang kann eingestellt werden.

Anwendung für Rücken und Taille von Körper, Oberschenkeln und Waden



Kann die Taille straffen, festigen und Körperformung helfen. Weichen Sie die Muskeln der Arme und Oberschenkel, massieren Sie den ganzen Körper und straffen Sie die Arme und Oberschenkel.

80K Fat Burn Head

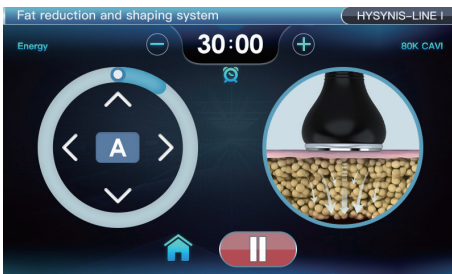

MODE: (A: kontinuierliche Vibration), (B: Stopp für eine Sekunde pro Vibration), (C: Stopp für 2 Sekunden pro Vibration), (D: Stopp für 3 Sekunden pro Vibration).
ZEIT: Die Standardeinstellung ist 30 Minuten, einstellbar von 0 bis 60 Minuten. Wenn es 0 ist, hört das

Instrument auf zu arbeiten.

ENERGIE: Stellen Sie die Schwingungsenergie des Arbeitskopfes ein. Je größer die Zahl, desto größer die Energie. Der zehnte Gang kann eingestellt werden.

Verwendung für den Körper Shaping



Es kann Fett auflösen, Lymphe entgiften, Haut straffen, Hautelastizität erhöhen, Fettschicht direkt erreichen, die Funktion der gerichteten RF-Ausgabe haben, die Bewegung von Fettzellen beschleunigen, Wärmeenergie zu erzeugen, und das überschüssige Fett und Gift im Gesicht aus dem Körper durch Schweißdrüsen, Leberdarmzirkulation und Lymphzirkulation entladen, um Fett aufzulösen.

Kleiner Negativdruckkopf



MODE: (A: rotes Licht ist immer an), (B: rotes Licht blinkt alle 1 Sekunde), (C: rotes Licht blinkt alle 2 Sekunden), (D: rotes Licht blinkt alle 3 Sekunden).

ZEIT: Die Standardeinstellung ist 30 Minuten, einstellbar von 0 bis 60 Minuten. Wenn es 0 ist, hört

das Instrument auf zu arbeiten.

ENERGIE: Stellen Sie die HF-Energie des Arbeitskopfes ein. Je größer die Zahl, desto größer die Energie. Der zehnte Gang kann eingestellt werden.

SUKTION: Stellen Sie die Saugzeit des Unterdrucks ein. Je größer die Zahl ist, desto länger ist die Saugzeit. Sie ist ungültig, wenn sie 0 ist.

RELEASE: Stellen Sie die Saugzeit des Unterdrucks ein. Je größer die Zahl ist, desto länger ist die Saugzeit. Sie ist ungültig, wenn sie 0 ist.

Hinweis: Die Inspirations- und Ausgasungsintervalle sind nur verfügbar, wenn die Zahl gleichzeitig angepasst wird.

Anwendung für Gesicht oder Augen



Gesichtslifting, Straffung, Anti-Aging. Linderung von Schmerzen, Schaben und Schröpfen. Verbessern Sie die schlabbe Haut, die durch Fett und Hautalterung verursacht wird. Helfen Sie, Abfallstoffe im Körper zu beseitigen und den Stoffwechsel zu fördern. Die Unterdruckmassage-Funktion kann die Reduzierung des Fettzellvolumens fördern. Vakuum-Unterdruckmassage kann verschiedene Hautgewebe zwischen der multipolaren thermischen Schmelzradiofrequenz vollständig absorbieren, so dass die Hochfrequenzenergie das tiefe Hautgewebe effektiver erreichen kann. Gleichzeitig fördert die Adsorption von Unterdruck die Durchblutung und den Stoffwechsel. Lassen Sie das Muskelgewebe vollständig entspannen und entlasten Sie die Ermüdung der Haut und des Muskelgewebes.

Mittlerer Unterdruckkopf



MODE: (A: rotes Licht ist immer an), (B: rotes Licht blinkt alle 1 Sekunde), (C: rotes Licht blinkt alle 2 Sekunden), (D: rotes Licht blinkt alle 3 Sekunden).

ZEIT: Die Standardeinstellung ist 30 Minuten, einstellbar von 0 bis 60 Minuten. Wenn es 0 ist, hört

das Instrument auf zu arbeiten.

ENERGIE: Stellen Sie die HF-Energie des Arbeitskopfes ein. Je größer die Zahl, desto größer die Energie. Der zehnte Gang kann eingestellt werden.

SUKTION: Stellen Sie die Saugzeit des Unterdrucks ein. Je größer die Zahl ist, desto länger ist die Saugzeit. Sie ist ungültig, wenn sie 0 ist.

RELEASE: Stellen Sie die Saugzeit des Unterdrucks ein. Je größer die Zahl ist, desto länger ist die Saugzeit. Sie ist ungültig, wenn sie 0 ist.

Hinweis: Die Inspirations- und Ausgasungsintervalle sind nur verfügbar, wenn die Zahl gleichzeitig angepasst wird.

Anwendung für Gesicht und Hals



Schulter- und Nackenschwitztherapie zur Linderung von Schmerzen, Schaben und Schröpfen der Lymphe.

Verbessern Sie die schlaaffe Haut, die durch Fett und Hautalterung verursacht wird. Helfen Sie, Abfallstoffe im Körper zu beseitigen und den Stoffwechsel zu fördern. Die Unterdruckmassage-Funktion kann die Reduzierung des Fettzellvolumens fördern.

Vakuum-Unterdruckmassage kann verschiedene Hautgewebe zwischen der multipolaren thermischen Schmelzradiofrequenz vollständig absorbieren, so dass die Hochfrequenzenergie das tiefe Hautgewebe effektiver erreichen kann. Gleichzeitig fördert die Adsorption von Unterdruck die Durchblutung und den Stoffwechsel. Lassen Sie das Muskelgewebe vollständig entspannen und entlasten Sie die Ermüdung der Haut und des Muskelgewebes.

Mittlerer Unterdruckkopf



MODE: (A: rotes Licht ist immer an), (B: rotes Licht blinkt alle 1 Sekunde), (C: rotes Licht blinkt alle 2 Sekunden), (D: rotes Licht blinkt alle 3 Sekunden).

ZEIT: Die Standardeinstellung ist 30 Minuten, einstellbar von 0 bis 60 Minuten. Wenn es 0 ist, hört

das Instrument auf zu arbeiten.

ENERGIE: Stellen Sie die HF-Energie des Arbeitskopfes ein. Je größer die Zahl, desto größer die Energie. Der zehnte Gang kann eingestellt werden.

SUKTION: Stellen Sie die Saugzeit des Unterdrucks ein. Je größer die Zahl ist, desto länger ist die Saugzeit. Sie ist ungültig, wenn sie 0 ist.

RELEASE: Stellen Sie die Saugzeit des Unterdrucks ein. Je größer die Zahl ist, desto länger ist die Saugzeit. Sie ist ungültig, wenn sie 0 ist.

Hinweis: Die Inspirations- und Ausgasungsintervalle sind nur verfügbar, wenn die Zahl gleichzeitig angepasst wird.

Körperpflege



Verbessern Sie die schlaffe Haut, die durch Fett und Hautalterung verursacht wird. Helfen Sie, Abfallstoffe im Körper zu beseitigen und den Stoffwechsel zu fördern. Die Unterdruckmassage-Funktion kann die Reduzierung des Fettzellvolumens fördern. Vakuüm-Unterdruckmassage kann verschiedene Hautgewebe zwischen der multipolaren thermischen Schmelzradiofrequenz vollständig absorbieren, so dass die Hochfrequenzenergie das tiefe Hautgewebe effektiver erreichen kann. Gleichzeitig fördert die Adsorption von Unterdruck die Durchblutung und den Stoffwechsel. Lassen Sie das Muskelgewebe vollständig entspannen und entlasten Sie die Ermüdung der Haut und des Muskelgewebes.

Laser und EMS



MODE: (A: rotes Licht ist immer an), (B: rotes Licht blinkt alle 1 Sekunde), (C: rotes Licht blinkt alle 2 Sekunden), (D: rotes Licht blinkt alle 3 Sekunden).


ZEIT: Die Standardeinstellung ist 30 Minuten, einstellbar von 0 bis 60 Minuten. Wenn es 0 ist,

hört das Instrument auf zu arbeiten.

ENERGIE: Stellen Sie die mikroelektrische Energie des Arbeitskopfes ein. Je größer die Zahl, desto größer die Energie. Der zehnte Gang kann eingestellt werden.

Licht: Stellen Sie die Helligkeit der Laserpanelleuchte ein. Je größer die Zahl, desto größer die Helligkeit. Der zehnte Gang kann eingestellt werden.

Verwendung für den Körper Shaping

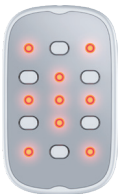

Die folgenden Informationen werden für die korrekte Anwendung des IPL Hautbehandlungssystems bereitgestellt. Die Informationen umfassen nicht nur die Unfallschutzvorschriften, die die Produkte erfüllen, sondern auch die Wirksamkeit hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verwendung der Produkte.

Kalter Kopf



MODE: Standardmäßig ist nur Modus A verfügbar.

ZEIT: Die Standardeinstellung ist 30 Minuten, einstellbar von 0 bis 60 Minuten. Wenn es 0 ist, hört das Instrument auf zu arbeiten.

ENERGIE: Stellen Sie die

Arbeitsenergie des Arbeitskopfes ein. Je größer die Zahl, desto größer die Energie. Die 10-Gänge können eingestellt werden.



1. Helfen Sie der Haut Festigkeit, halten Sie Elastizität, verhindern Sie Allergien und andere Probleme;
2. Schrumpfen Sie Poren, sperren Sie Wasser und reduzieren Sie Falten;

BIO&LED



MODE: Es gibt vier (A/B/C/D) mikroelektrische Massagemodi, die nach persönlichen Vorlieben ausgewählt werden können.

ZEIT: Die Standardeinstellung ist 30 Minuten, einstellbar von 0 bis 60 Minuten. Wenn es 0 ist, hört das Instrument auf zu arbeiten.

ENERGIE: Stellen Sie die mikroelektrische Energie des Arbeitskopfes ein. Je größer die Zahl, desto größer die Energie. Der zehnte Gang kann eingestellt werden.

LED FARBE: Stellen Sie die Lichtfarbe ein. Die Lichtfolge ist rotes Licht, grünes Licht, blaues Licht, oranges Licht, gelbes Licht, violettes Licht, blaues Licht, kreisförmiges Licht.

Licht: Stellen Sie die Lichthelligkeit ein, die 10-Gänge können eingestellt werden.



Anwendung: Stirn, Augen um, Wange, Mund, Doppelkinn, Hals, Körper
Mikrostromsichere und schmerzfreie
Gesichtsbehandlung hilft, feine Linien und Falten zu beseitigen, während sie Ihre Haut strafft und Ihre Gesichtszüge definiert

EMS Kopf



MODE: Es gibt vier (A/B/C/D) mikroelektrische Massagemodi, die nach persönlichen Vorlieben ausgewählt werden können.
ZEIT: Die Standardeinstellung ist 30 Minuten, einstellbar von 0 bis 60 Minuten. Wenn es 0 ist, hört das Instrument auf zu arbeiten.

ENERGIE: Stellen Sie die mikroelektrische Energie des Arbeitskopfes ein. Je größer die Zahl, desto größer die Energie. Der zehnte Gang kann eingestellt werden.

HOT: Stellen Sie die Arbeitskopftemperatur ein, justierbar bei 10-Gängen.




Es ist eine nicht-invasive
Schlankheitsbehandlungstechnologie, die Fett verbrennen kann während des Trainings Genau wie 20.000 Sit-Ups oder Kniebeugen in nur 30 Minuten, alle 2 bis 3 Wochen, während 4 bis 6 Behandlungen, nimmt das durchschnittliche Fett ab und die Muskelmasse nimmt zu. Der Behandlungsbereich umfasst Bauch, Gesäß, Arme und Oberschenkel.sichere und komfortable Behandlung

Verwendung von Leitlinien


Oberschenkel

- (1) Von unten nach oben, drücken Sie zur Leiste, um Lymphe auszubaggern;
- (2) Drehen gegen den Uhrzeigersinn von unten nach oben kann helfen, Fett abzubauen;
- (3) Fettig abbauen, indem man hin und her drückt;
- (4) Ziehen Sie vom Knie zur Leiste, um die Kurve zu verbessern.

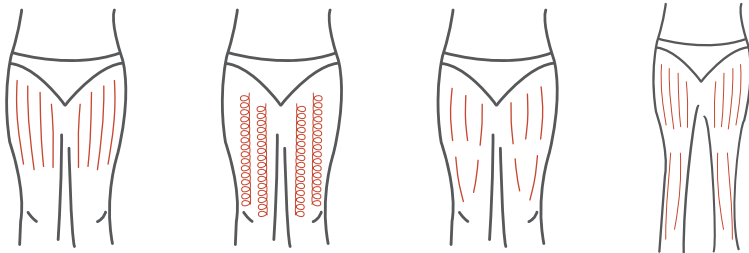


Hüften

- (1) Ziehen Sie zur Taille in Richtung Lymphe;
- (2) Kreisen Sie gegen den Uhrzeigersinn von unten nach oben und bewegen Sie sich hin und her;
- (3) Entsprechend der Muskelbeschaffenheit kann es die Gesäßhaut gleiten und verdichten, wodurch das Gesäß prall und fest wird und die perfekte Kurve präsentiert wird.

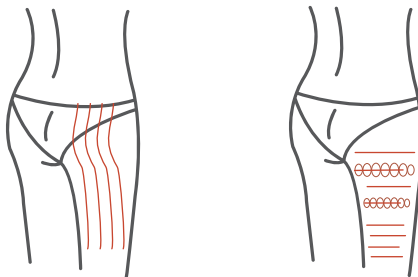

Zurück

- (1) 2–3 Mal hin und her drücken;
- (2) Kreise gegen den Uhrzeigersinn, um die Lymphknoten zu stimulieren;
- (3) Drehen Sie sich auf dem Rücken gegen den Uhrzeigersinn und bewegen Sie sich auf und ab, um Fett abzubauen;
- (4) Die Verwendung von Lymphdrainagetechnik, um Toxin zu Lymphknoten zu ziehen, kann helfen, die Rückenkurve zu verbessern.

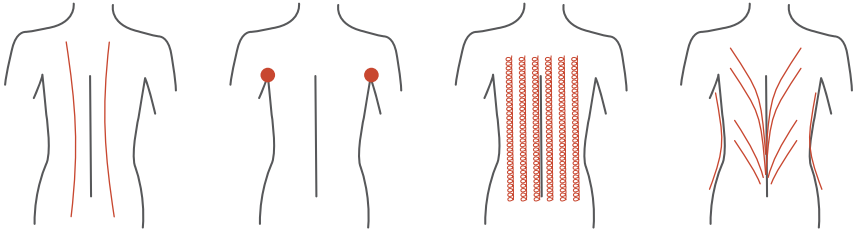

Arm


- (1) Vom inneren Ellbogen bis zur Achselhöhle Lymphdrainage durchführen;
- (2) Lymphknoten im Kreis zu stimulieren;
- (3) Brechen Sie überschüssiges Fett ab, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen oder es hin und her schieben;
- (4) Spannen Sie die Haut vom Ellbogen bis zur Achselhöhle.



Gesicht



(1) Gleichmäßig das Produkt auf das Gesicht auftragen, verwenden Sie den Gesichts-RF-Kopf, arbeiten Sie von unten nach oben, um das Gesicht zu heben, machen Sie die Haut in einem angespannten Zustand, es wird empfohlen, für 5 Minuten zu verwenden;

(2) Das Produkt gleichmäßig auf das Gesicht auftragen, den RF-Kopf auf dem Gesicht verwenden, in Pfeilrichtung arbeiten, es wird empfohlen, es für 5-8 Minuten zu verwenden.

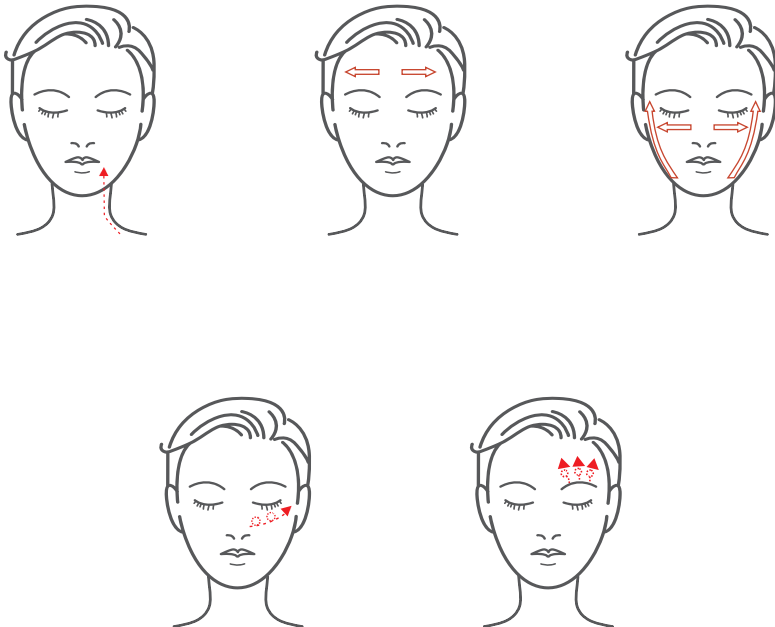

Bauch

- (1) Rund um den Nabel von klein nach groß, im Uhrzeigersinn, um die Dickdarmperistaltik zu unterstützen;
- (2) Vom kleinen zum großen Kreis drücken Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.

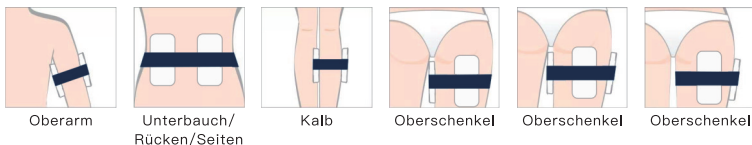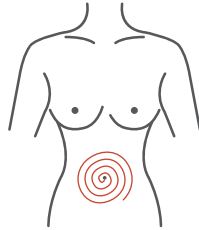

Warme Tipps für Sie

1. Verwenden Sie nicht auf Ihrer ursprünglichen und trockenen Hautoberfläche, es wird Ihre Haut verbrennen. Stelle sicher, dass du Creme oder Öle auf deine Haut aufträgst, dann kannst du sie verwenden.
2. Bei Verwendung muss es ein wässriges Medium (ätherisches Öl/Cremes usw.) geben, sonst beschädigt es die Maschine nicht zu lange auf demselben Teil und vermeiden Körperteile mit Knochen.
3. Schließen Sie die Stromversorgung erst an, wenn die Sonde gut installiert ist.
4. Die Maschine darf die Sonde nicht ersetzen, wenn sie sich im Ladezustand befindet.

5. Bitte nehmen Sie den Metallschmuck ab, wenn Sie die Maschine verwenden.
6. Wenn die Maschine für eine Stunde verwendet wird, halten Sie bitte für zehn Minuten an, um die Maschine ruhen zu lassen.
7. Stellen Sie sicher, dass Sie die Stromversorgung nach dem Gebrauch ausschalten, und reinigen Sie die Sonde, halten Sie eine gute Wartung für den nächsten Gebrauch.
8. Bitte halten Sie die Sonde jedes Mal sauber, verwenden Sie ein trockenes Tuch, um sie zu wischen, verwenden Sie kein Wasser zu reinigen.
9. Nach der Anwendung reinigen Sie Ihre Haut und tragen Sie feuchtigkeitsspendende Maske oder Cremes, Öle nach zehn Minuten auf.
10. Wenn Sie 80KHead verwenden, können einige Menschen Tinnitus erleben. Dies ist normal, weil diese Schallwelle den Bereich menschlicher Schallwellen überschreitet.

Garantie

Wir versprechen, dass alle Maschinen eine strenge Inspektion von uns erleben, um die beste Qualität zu gewährleisten. Wir nutzen unsere professionellen Fähigkeiten, um Ihr Problem zu lösen.

Ich hoffe, Sie können uns gemeinsam auf dieser Reise begleiten.

Wenn Sie Fragen oder andere Probleme zu unseren Produkten haben, zögern Sie nicht, uns ohne zu zögern zu kontaktieren. Wir sind immer an Ihrer Seite.

Made in China


11 in 1 (SME) MACCHINA DI SLIMMING 80K

<Manuale d'uso>



Per utilizzare correttamente questo prodotto, leggere attentamente il manuale e conservarlo correttamente.

Nome della parte

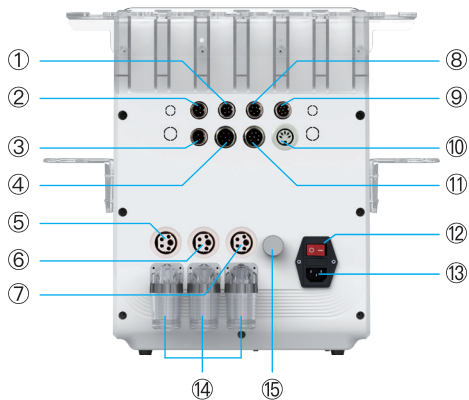

- ① Interfaccia RF a 4 poli
- ② Interfaccia RF a 3 poli
- ② 80K interfaccia
- ② Interfaccia testa fredda
- ⑤ Grande interfaccia a pressione negativa
- ⑥ Interfaccia media pressione negativa
- ⑦ Piccola interfaccia a pressione negativa

- ⑧ Interfaccia scheda laser
- ⑨ Interfaccia RF a 6 poli
- ⑩ Interfaccia testa EMS
- ⑪ Interfaccia BIO&LED
- ⑫ Interruttore
- ⑬ Interfaccia di alimentazione
- ⑭ Filtro
- ⑮ Regolazione della pressione negativa

Nome della parte



3 Testa RF



4 Testa RF




6 Testa RF



Maniglia EMS



Testa bruciagrassi 80K

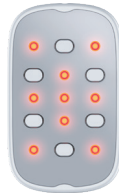

Laser e EMS



Piccola testa a pressione negativa



Testa a pressione negativa media



Grande testa a pressione negativa




Testa fredda



BIO&LED

Metodo di utilizzo

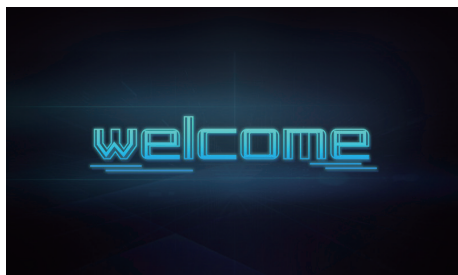

1. Collegare la testa della funzione alla presa corrispondente e collegare il cavo di alimentazione.
2. Premere l'interruttore di alimentazione e l'indicatore luminoso e LCD si accenderanno. In questo momento, clicca qui sotto per



3. Selezionare la testa di lavoro desiderata.
4. Dopo aver selezionato, regolare la modalità di lavoro richiesta, l'orario di lavoro e l'energia di lavoro, fare clic sul pulsante "▶" per iniziare a lavorare, fare clic sul pulsante "||" per mettere in pausa durante l'uso, o fare clic sul pulsante "🏠" per tornare all'interfaccia di selezione della testa di lavoro.
5. Dopo l'uso, premere il pulsante "🏠" e spegnere l'alimentazione.

Funzione di testa diversa

3 testa RF: adatto per 1–2 energia



MODO: (A: la luce rossa è sempre accesa), (B: la luce rossa lampeggia ogni 1 secondo), (C: la luce rossa lampeggia ogni 2 secondi), (D: la luce rossa lampeggia ogni 3 secondi).
TEMPO: Il valore predefinito è di 30 minuti, regolabile da 0 a 60 minuti. Quando è 0, lo strumento smetterà di

funzionare.

ENERGIA: Regolare l'energia RF della testa di lavoro. Più grande è il numero, maggiore è l'energia. La decima marcia può essere regolata.

Uso per il viso o gli occhi



Quando viene utilizzato sulla pelle, può rassodare e sollevare la pelle, riduce l'winkle. Miglioramento della circolazione degli occhi, restringimento dei pori e occhi gonfi. Elimina rughe, occhiaie e borse sotto gli occhi. Migliora la struttura della pelle ed elimina gli occhi cadenti. Ringiovanisce la pelle e migliora il contorno occhi.

4 Testa RF: Adatto per 2–3 Energia



MODO: (A: la luce rossa è sempre accesa), (B: la luce rossa lampeggia ogni 1 secondo), (C: la luce rossa lampeggia ogni 2 secondi), (D: la luce rossa lampeggia ogni 3 secondi).
TEMPO: Il valore predefinito è di 30 minuti, regolabile da 0 a 60 minuti. Quando è 0, lo strumento smetterà di

funzionare.

ENERGIA: Regolare l'energia RF della testa di lavoro. Più grande è il numero, maggiore è l'energia. La decima marcia può essere regolata.

Usò per viso e collo



La pelle ferma, migliora l'elasticità della pelle, l'eliminazione delle rughe facciali, la pelle che stringe e solleva, riduce il gonfiore del viso, riduce il rossore, allevia l'affaticamento degli occhi, rimuove le occhiaie e le borse degli occhi, migliora la qualità della pelle.

Testa 6 RF: Adatto per energia 2-5



MODO: (A: la luce rossa è sempre accesa), (B: la luce rossa lampeggia ogni 1 secondo), (C: la luce rossa lampeggia ogni 2 secondi), (D: la luce rossa lampeggia ogni 3 secondi).
TEMPO: Il valore predefinito è di 30 minuti, regolabile da 0 a 60 minuti. Quando è 0, lo strumento smetterà di

funzionare.

ENERGIA: Regolare l'energia RF della testa di lavoro. Più grande è il numero, maggiore è l'energia. La decima marcia può essere regolata.

Usò per la schiena e la vita del corpo, cosce e polpacci



Può stringere la vita, rassodare e aiutare a modellare il corpo. Ammorbidire i muscoli delle braccia e delle cosce, massaggiare tutto il corpo e stringere braccia e cosce.

Testa bruciagrassi 80K



MODO: (A: vibrazione continua), (B: arresto per 1 secondo per vibrazione), (C: arresto per 2 secondi per vibrazione), (D: arresto per 3 secondi per vibrazione).

TEMPO: Il valore predefinito è di 30 minuti, regolabile da 0 a 60

minuti. Quando è 0, lo strumento smetterà di funzionare.

ENERGIA: Regolare l'energia di vibrazione della testa di lavoro. Più grande è il numero, maggiore è l'energia. La decima marcia può essere regolata.

Uso per il corpo Forma



Può sciogliere il grasso, disintossicare la linfa, stringere la pelle, migliorare l'elasticità della pelle, raggiungere direttamente lo strato grasso, avere la funzione di uscita RF direzionale, accelerare il movimento delle cellule grasse per generare energia termica e scaricare il grasso in eccesso e la tossina nel viso fuori dal corpo attraverso le ghiandole sudoripare, la circolazione intestinale del fegato e la circolazione linfatica, in modo da sciogliere il grasso.

Piccola testa a pressione negativa



MODO: (A: la luce rossa è sempre accesa), (B: la luce rossa lampeggia ogni 1 secondo), (C: la luce rossa lampeggia ogni 2 secondi), (D: la luce rossa lampeggia ogni 3 secondi).

TEMPO: Il valore predefinito è di 30 minuti, regolabile da 0 a 60

minuti. Quando è 0, lo strumento smetterà di funzionare.

ENERGIA: Regolare l'energia RF della testa di lavoro. Più grande è il numero, maggiore è l'energia. La decima marcia può essere regolata.

SUZIONE: Regolare il tempo di aspirazione della pressione negativa. Più grande è il numero, più lungo sarà il tempo di aspirazione. Non è valido quando è 0.

RILASCIO: Regolare il tempo di aspirazione della pressione negativa. Più grande è il numero, più lungo è il tempo di aspirazione. Non è valido quando è 0.

Nota: Gli intervalli inspiratori e di uscita sono disponibili solo quando il numero è regolato contemporaneamente.

Uso per il viso o gli occhi



Lifting facciale, rassodante, anti-aging.alleviando il dolore, raschiatura e cupping. Migliorare la caduta della pelle causata dal grasso e dall'invecchiamento della pelle. Aiuta a eliminare i materiali di scarto nel corpo e promuovere il metabolismo. La funzione di massaggio di pressione negativa può promuovere la riduzione del volume delle cellule adipose. Il massaggio a pressione negativa sotto vuoto può assorbire completamente i vari tessuti della pelle tra la radiofrequenza termica multipolare di fusione, in modo che l'energia di radiofrequenza possa raggiungere il tessuto profondo della pelle in modo più efficace. Allo stesso tempo, l'adsorbimento della pressione negativa favorisce la circolazione sanguigna e il metabolismo. Lascia che il tessuto muscolare sia completamente rilassato e allevia l'affaticamento della pelle e del tessuto muscolare.

Testa a pressione negativa media



MODO: (A: la luce rossa è sempre accesa), (B: la luce rossa lampeggia ogni 1 secondo), (C: la luce rossa lampeggia ogni 2 secondi), (D: la luce rossa lampeggia ogni 3 secondi). TEMPO: Il valore predefinito è di 30 minuti, regolabile da 0 a 60

minuti. Quando è 0, lo strumento smetterà di funzionare.

ENERGIA: Regolare l'energia RF della testa di lavoro. Più grande è il numero, maggiore è l'energia. La decima marcia può essere regolata.

SUZIONE: Regolare il tempo di aspirazione della pressione negativa. Più grande è il numero, più lungo sarà il tempo di aspirazione. Non è valido quando è 0.

RILASCIO: Regolare il tempo di aspirazione della pressione negativa. Più grande è il numero, più lungo è il tempo di aspirazione. Non è valido quando è 0.

Nota: Gli intervalli inspiratori e di uscita sono disponibili solo quando il numero è regolato contemporaneamente.

Uso per viso e collo



Terapia raschiatura della spalla e del collo per etossicazione linfatica alleviando dolore, raschiatura e coppettazione. Migliorare la caduta della pelle causata dal grasso e dall'invecchiamento della pelle. Aiuta a eliminare i materiali di scarto nel corpo e promuovere il metabolismo. La funzione di massaggio di pressione negativa può promuovere la riduzione del volume delle cellule adipose. Il massaggio a pressione negativa sotto vuoto può assorbire completamente i vari tessuti della pelle tra la radiofrequenza termica multipolare di fusione, in modo che l'energia di radiofrequenza possa raggiungere il tessuto profondo della pelle in modo più efficace. Allo stesso tempo, l'adsorbimento della pressione negativa favorisce la circolazione sanguigna e il metabolismo. Lascia che il tessuto muscolare sia completamente rilassato e allevia l'affaticamento della pelle e del tessuto muscolare.

Testa a pressione negativa media



MODO: (A: la luce rossa è sempre accesa), (B: la luce rossa lampeggia ogni 1 secondo), (C: la luce rossa lampeggia ogni 2 secondi), (D: la luce rossa lampeggia ogni 3 secondi).
TEMPO: Il valore predefinito è di 30 minuti, regolabile da 0 a 60 minuti. Quando è 0, lo strumento smetterà di

funzionare.

ENERGIA: Regolare l'energia RF della testa di lavoro. Più grande è il numero, maggiore è l'energia. La decima marcia può essere regolata.

SUZIONE: Regolare il tempo di aspirazione della pressione negativa. Più grande è il numero, più lungo sarà il tempo di aspirazione. Non è valido quando è 0.

RILASCIO: Regolare il tempo di aspirazione della pressione negativa. Più grande è il numero, più lungo è il tempo di aspirazione. Non è valido quando è 0.

Nota: Gli intervalli inspiratori e di uscita sono disponibili solo quando il numero è regolato contemporaneamente.

Manutenzione del corpo



Migliorare la caduta della pelle causata dal grasso e dall'invecchiamento della pelle. Aiuta a eliminare i materiali di scarto nel corpo e promuovere il metabolismo. La funzione di massaggio di pressione negativa può promuovere la riduzione del volume delle cellule adipose. Il massaggio a pressione negativa sotto vuoto può assorbire completamente i vari tessuti della pelle tra la radiofrequenza termica multipolare di fusione, in modo che l'energia di radiofrequenza possa raggiungere il tessuto profondo della pelle in modo più efficace. Allo stesso tempo, l'adsorbimento della pressione negativa favorisce la circolazione sanguigna e il metabolismo. Lascia che il tessuto muscolare sia completamente rilassato e allevia l'affaticamento della pelle e del tessuto muscolare.

Laser e EMS



MODO: (A: la luce rossa è sempre accesa), (B: la luce rossa lampeggia ogni 1 secondo), (C: la luce rossa lampeggia ogni 2 secondi), (D: la luce rossa lampeggia ogni 3 secondi).


TEMPO: Il valore predefinito è di 30 minuti, regolabile da 0 a 60 minuti.

Quando è 0, lo strumento smetterà di funzionare.

ENERGIA: Regolare l'energia micro-elettrica della testa di lavoro. Più grande è il numero, maggiore è l'energia. La decima marcia può essere regolata.

LUCE: Regolare la luminosità della lampada del pannello laser. Maggiore è il numero, maggiore è la luminosità. La decima marcia può essere regolata.

Uso per il corpo Forma

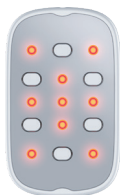

Le seguenti informazioni sono fornite per il corretto utilizzo del sistema di trattamento della pelle IPL. Le informazioni includono non solo le norme di protezione dagli incidenti che i prodotti rispettano, ma anche le efficaci riguardo al corretto uso dei prodotti.

Testa fredda



MODE: Per impostazione predefinita, è disponibile solo la modalità A.

TEMPO: Il valore predefinito è di 30 minuti, regolabile da 0 a 60 minuti. Quando è 0, lo strumento smetterà di funzionare.

ENERGIA: Regolare l'energia di

lavoro della testa di lavoro. Maggiore è il numero, maggiore è l'energia. Le 10 marce possono essere regolate.



1. aiutare la compattezza della pelle, mantenere l'elasticità, prevenire allergie e altri problemi;
2. restringere i pori, bloccare l'acqua e ridurre le rughe;

BIO&LED



MODI: Ci sono quattro modalità di massaggio micro-elettrico (A/B/C/D), che possono essere selezionate in base alle preferenze personali.

TEMPO: Il valore predefinito è di 30 minuti, regolabile da 0 a 60 minuti. Quando è 0, lo strumento smetterà di

funzionare.

ENERGIA: Regolare l'energia micro-elettrica della testa di lavoro. Più grande è il numero, maggiore è l'energia. La decima marcia può essere regolata.

COLORE LED: regolare il colore della luce. La sequenza di luce è luce rossa, luce verde, luce blu, luce arancione, luce gialla, luce viola, luce blu, luce circolare.

LUCE: regolare la luminosità della luce, i 10 ingranaggi possono essere regolati.



Applicazione: fronte, occhi intorno, guance, bocca, doppio mento, collo, corpo
Il viso sicuro e indolore aiuta a cancellare le linee sottili e le rughe, rassodando la pelle e definendo le caratteristiche

Testa EMS



MODO: Ci sono quattro modalità di massaggio micro-elettrico (A/B/C/D), che possono essere selezionate in base alle preferenze personali.

TEMPO: Il valore predefinito è di 30 minuti, regolabile da 0 a 60 minuti. Quando è 0, lo strumento smetterà di funzionare.

ENERGIA: Regolare l'energia micro-elettrica della testa di lavoro. Più grande è il numero, maggiore è l'energia. La decima marcia può essere regolata.

CALDO: Regolare la temperatura della testa di lavoro, regolabile a 10 ingranaggi.




Si tratta di una tecnologia di trattamento dimagrante non invasiva che può bruciare i grassi durante l'esercizio. Proprio come completare 20.000 sit-up o squat in soli 30 minuti, ogni 2 o 3 settimane, durante 4 o 6 trattamenti, diminuisce il grasso medio e aumenta la massa muscolare. L'area di trattamento comprende addome, glutei, braccia e cosce. trattamento sicuro e confortevole

Uso della guida


Coscia

- (1) dal basso verso l'alto, spingere all'inguine per dragare linfa;
- (2) Girare in senso antiorario dal basso verso l'alto può aiutare a rompere il grasso;
- (3) Decomporre grasso spingendo avanti e indietro;
- (4) Tirare giù dal ginocchio all'inguine per migliorare la curva.

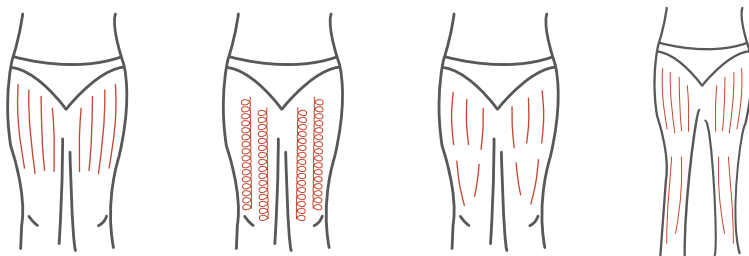


Hips

- (1) Tirare alla vita in direzione della linfa;
- (2) Cerchio antiorario dal basso verso l'alto e muoversi avanti e indietro;
- (3) Secondo la struttura muscolare, può far scorrere e compattare la pelle del gluteo, rendendo il gluteo corposo e sodo, presentando la curva perfetta.

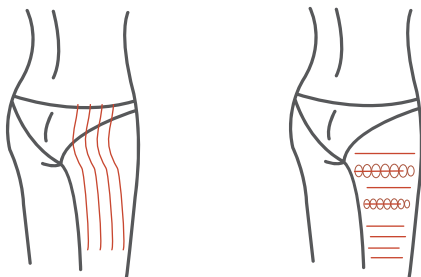

Torna indietro

- (1) Spingere avanti e indietro 2-3 volte;
- (2) Cerchio in senso antiorario per stimolare i linfonodi;
- (3) sulla schiena, girare in senso antiorario e muoversi su e giù per aiutare a rompere il grasso;
- (4) Utilizzando la tecnica di drenaggio linfatico per tirare la tossina ai linfonodi può aiutare a migliorare la curva della schiena.

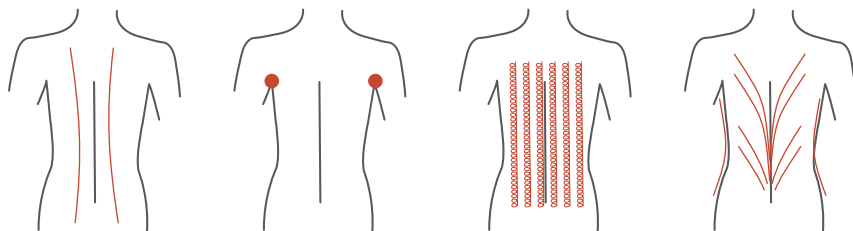

braccio




- (1) dal gomito interno all'ascella, fare drenaggio linfatico;
- (2) Per stimolare i linfonodi in cerchio;
- (3) abbattere il grasso in eccesso girandolo in senso antiorario facendolo avanti e indietro;
- (4) Stringa la pelle dal gomito all'ascella.



faccia



(1) Applicare uniformemente il prodotto sul viso, utilizzare la testa RF del viso, operare dal basso verso l'alto per sollevare il viso, rendere la pelle in uno stato teso, si consiglia di usare per 5 minuti;

(2) Applicare il prodotto uniformemente sul viso, utilizzare la testa RF sul viso, operare nella direzione della freccia, si consiglia di usarlo per 5–8 minuti.

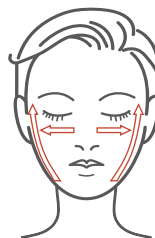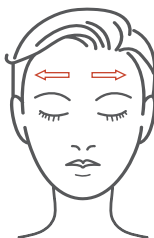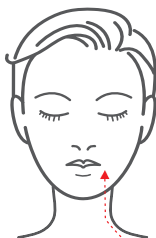

addome

- (1) Intorno all'ombelico da piccolo a grande, cerchio in senso orario per aiutare la peristalsi dell'intestino crasso;
- (2) Dal piccolo cerchio al grande cerchio, spingilo in senso antiorario.

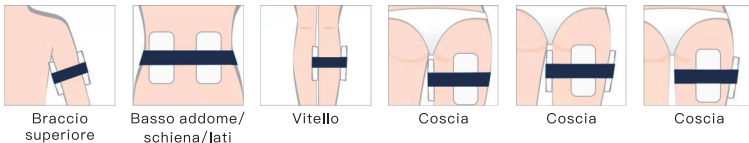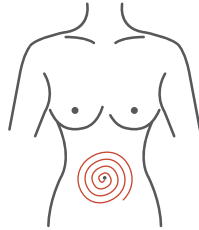

Consigli caldi per te

1. Non utilizzare sulla superficie originale e secca della pelle, brucerà la pelle. Assicurati di applicare crema o oli sulla tua pelle, quindi puoi usare.
2. Quando si utilizza, ci deve essere un mezzo acquoso (olio essenziale / creme, ecc.), altrimenti danneggerà la macchina. Non utilizzare sulla stessa parte per troppo tempo ed evitare parti del corpo con ossa.
3. Non collegare l'alimentazione fino a quando la sonda non è ben installata.
4. La macchina non è autorizzata a sostituire la sonda quando è nello stato di carica.

5. Si prega di togliere i gioielli di metallo quando si utilizza la macchina.
6. Quando la macchina viene utilizzata per 1 ora, si prega di fermarsi per 10 minuti per lasciare riposare la macchina.
7. Assicurarsi di spegnere l'alimentazione dopo l'uso e pulire la sonda mantenere una buona manutenzione per l'uso successivo.
8. Si prega di tenere la sonda pulita ogni volta, utilizzare un panno asciutto per pulire, non utilizzare acqua per pulire.
9. Dopo l'uso, pulire la pelle e applicare maschera idratante o creme, oli dopo 10 minuti.
10. Quando si utilizza 80KHead, alcune persone possono sperimentare tinnito. Questo è normale perché questa onda sonora supera la gamma delle onde sonore umane.

Garanzia e servizio post-assistenza

Promettiamo che tutta la macchina è sperimentata una rigorosa ispezione da parte nostra per garantire la migliore qualità. Useremo le nostre competenze professionali per affrontare il tuo problema.

Spero che possiate unirvi a noi in questo viaggio insieme.

Se avete domande o altri problemi sui nostri prodotti, non esitate a contattarci senza esitazione. Siamo sempre al tuo fianco.

Made in China

11 en 1 (EMS) 80k minceur machine

<Instructions d'utilisation>




Pour une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement le manuel et en prendre soin.

Nom de la pièce

Écran LCD et
écran de
fonctionnement



Diodes électroluminescentes

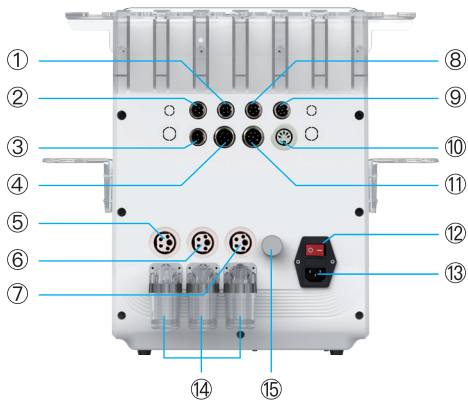

- ① interface RF 4 pôles
- ② interface RF tripolaire
- ③ 80k Interface
- ④ interface de tête froide
- ⑤ grande interface de pression négative
- ⑥ interface de pression négative média
- ⑦ petite interface de pression négative
- ⑧ interface de plaque laser

- ⑨ 6 interface RF polaire
- ⑩ EMS interface de tête
- ⑪ interface bio et LED
- ⑫ interrupteur
- ⑬ Interface d'alimentation
- ⑭ filtre
- ⑮ régulation de pression négative

Nom de la pièce



3 tête RF



4 tête RF




6 tête RF



Poignée EMS



80k tête de combustion des graisses

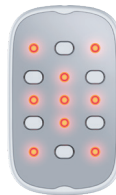

Laser et EMS



Petite tête de pression négative



Tête de pression négative moyenne



Grande tête de pression négative



Tête froide



Bio et LED

Méthode d'utilisation



1. Connectez la tête de fonction à la prise correspondante et connectez le cordon d'alimentation.
2. Appuyez sur le commutateur d'alimentation, le voyant et l'écran LCD s'allument. À ce stade, cliquez ci – dessous pour sélectionner la langue souhaitée.



3. Sélectionnez la tête de travail souhaitée.
Une fois sélectionné, Ajustez le mode de travail souhaité, le temps de travail et l'énergie de travail, appuyez sur le bouton "▶" pour commencer à travailler, appuyez sur le bouton "||" pour mettre en pause lorsque vous l'utilisez ou appuyez sur le bouton "🏠" pour revenir à l'interface de sélection de la tête de travail.
5. Après utilisation, appuyez sur le bouton "🏠" et éteignez l'alimentation.

Fonctions des différentes têtes

3 tête RF: convient pour 1 – 2 énergies



Mode: (A: la lumière rouge reste allumée), (B: la lumière rouge clignote toutes les 1 seconde), (C: la lumière rouge clignote toutes les 2 secondes), (D: la lumière rouge clignote toutes les 3 secondes).

Durée: 30 minutes par défaut, réglable entre 0 et 60 minutes. Quand il est à 0,

l'instrument cesse de fonctionner.

Énergie: Ajustez l'énergie RF de la tête de travail. Plus le nombre est grand, plus l'énergie est grande. 10 vitesses peuvent être ajustées.

Pour le visage ou les yeux



Lorsqu'il est appliqué sur la peau, il raffermit et tire la peau et réduit les rides. Améliore la circulation oculaire, rétrécit les pores et soulage les poches oculaires. Élimine les rides, les cernes et les poches sous les yeux. Améliore la texture de la peau et élimine les yeux affaissés. Revitalise la peau et améliore le contour des yeux.

4 tête RF: convient pour 2 – 3 énergies



Mode: (A: la lumière rouge reste allumée), (B: la lumière rouge clignote toutes les 1 seconde), (C: la lumière rouge clignote toutes les 2 secondes), (D: la lumière rouge clignote toutes les 3 secondes).

Durée: 30 minutes par défaut, réglable entre 0 et 60 minutes. Quand il est à 0,

l'instrument cesse de fonctionner.

Énergie: Ajustez l'énergie RF de la tête de travail. Plus le nombre est grand, plus l'énergie est grande. 10 vitesses peuvent être ajustées.

Pour le visage et le cou



Raffermit la peau, améliore l'élasticité de la peau, élimine les rides du visage, raffermit la peau de traction, réduit l'enflure du visage, réduit les rougeurs, soulage la fatigue oculaire, élimine les cernes et les poches sous les yeux et améliore la qualité de la peau.

6 tête RF: convient pour 2 – 5 énergies



MODE : (A: la lumière rouge est toujours allumée), (B: la lumière rouge clignote toutes les 1 seconde), (C: la lumière rouge clignote toutes les 2 secondes), (D: la lumière rouge clignote toutes les 3 secondes).

TEMPS : par défaut, 30 minutes, réglable de 0 à 60 minutes. Quand il est

0, l'instrument cessera de fonctionner.

ÉNERGIE: Ajustez l'énergie RF de la tête de travail. Plus le nombre est grand, plus l'énergie est grande. Le 10ème engrenage peut être ajusté.

Pour le dos et la taille du corps, les cuisses et les mollets



Peut serrer la taille, raffermer et aider à sculpter. Détendez les muscles des bras et des cuisses, massez tout le corps et serrez les bras et les cuisses.

80k tête de combustion des graisses



Modes: (A: Vibration continue), (B: 1 seconde par arrêt de vibration), (C: 2 secondes par arrêt de vibration), (D: 3 secondes par arrêt de vibration).

Durée: 30 minutes par défaut, réglable entre 0 et 60 minutes. Quand il est à 0, l'instrument cesse de fonctionner.

Énergie: Ajustez l'énergie de vibration

de la tête de travail. Plus le nombre est grand, plus l'énergie est grande. 10 vitesses peuvent être ajustées.

Utilisation pour le corps Shaping



Il dissout la graisse, détoxifie la lymphe, resserre la peau, améliore l'élasticité de la peau, atteint directement la couche adipeuse, a la fonction de sortie RF dirigée, accélère le Mouvement des cellules adipeuses pour produire de l'énergie thermique et élimine l'excès de graisse et de toxines du visage du corps par les glandes sudoripares, La circulation hépatique et intestinale et la circulation lymphatique, dissolvant ainsi la graisse.

Petite tête de pression négative



Mode: (A: la lumière rouge reste allumée), (B: la lumière rouge clignote toutes les 1 seconde), (C: la lumière rouge clignote toutes les 2 secondes), (D: la lumière rouge clignote toutes les 3 secondes).

Durée: 30 minutes par défaut, réglable entre 0 et 60 minutes. Quand il est à 0,

l'instrument cesse de fonctionner.

Énergie: Ajustez l'énergie RF de la tête de travail. Plus le nombre est grand, plus l'énergie est grande. 10 vitesses peuvent être ajustées.

Aspiration: Ajustez le temps d'aspiration à pression négative. Plus le nombre est grand, plus le temps d'aspiration est long. Invalide quand il est à 0.

Relâchement: Ajustez le temps d'aspiration de la pression négative. Plus le nombre est grand, plus le temps d'aspiration est long. Invalide quand il est à 0.

Remarque: les intervalles d'aspiration et d'échappement ne sont disponibles que lorsque la quantité est ajustée simultanément.

Pour le visage ou les yeux



Lifting du visage, fermeté, protection contre le froid, soulagement de la douleur, grattage, ventouses. Améliore la relaxation de la peau due au vieillissement des graisses et de la peau. Aide à éliminer les déchets du corps et stimule le métabolisme. La fonction de massage à pression négative peut favoriser la réduction du volume des cellules graisseuses. Le massage sous vide à pression négative peut absorber pleinement divers tissus cutanés entre les RF thermofusibles multipolaires, permettant à l'énergie RF d'atteindre les tissus cutanés profonds plus efficacement. Dans le même temps, l'adsorption de la pression négative favorise la circulation sanguine et le métabolisme. Laissez les tissus musculaires se détendre pleinement et soulager la fatigue de la peau et des tissus musculaires.

Tête de pression négative moyenne



Mode: (A: la lumière rouge reste allumée), (B: la lumière rouge clignote toutes les 1 seconde), (C: la lumière rouge clignote toutes les 2 secondes), (D: la lumière rouge clignote toutes les 3 secondes).

Durée: 30 minutes par défaut, réglable entre 0 et 60 minutes. Quand il est à 0,

l'instrument cesse de fonctionner.

Énergie: Ajustez l'énergie RF de la tête de travail. Plus le nombre est grand, plus l'énergie est grande. 10 vitesses peuvent être ajustées.

Aspiration: Ajustez le temps d'aspiration à pression négative. Plus le nombre est grand, plus le temps d'aspiration est long. Invalide quand il est à 0.

Relâchement: Ajustez le temps d'aspiration de la pression négative. Plus le nombre est grand, plus le temps d'aspiration est long. Invalide quand il est à 0.

Remarque: les intervalles d'aspiration et d'échappement ne sont disponibles que lorsque la quantité est ajustée simultanément.

Pour le visage et le cou



La thérapie de curetage de l'épaule et du cou est utilisée pour la désintoxication lymphatique, le soulagement de la douleur, le curetage et l'extraction. Améliore la relaxation de la peau due au vieillissement des graisses et de la peau. Aide à éliminer les déchets du corps et stimule le métabolisme. La fonction de massage à pression négative peut favoriser la réduction du volume des cellules graisseuses. Le massage sous vide à pression négative peut absorber pleinement divers tissus cutanés entre les RF thermofusibles multipolaires, permettant à l'énergie RF d'atteindre les tissus cutanés profonds plus efficacement. Dans le même temps, l'adsorption de la pression négative favorise la circulation sanguine et le métabolisme. Laissez les tissus musculaires se détendre pleinement et soulager la fatigue de la peau et des tissus musculaires.

Tête de pression négative moyenne



Mode: (A: la lumière rouge reste allumée), (B: la lumière rouge clignote toutes les 1 seconde), (C: la lumière rouge clignote toutes les 2 secondes), (D: la lumière rouge clignote toutes les 3 secondes).

Durée: 30 minutes par défaut, réglable entre 0 et 60 minutes. Quand il est à 0,

l'instrument cesse de fonctionner.

Énergie: Ajustez l'énergie RF de la tête de travail. Plus le nombre est grand, plus l'énergie est grande. 10 vitesses peuvent être ajustées.

Aspiration: Ajustez le temps d'aspiration à pression négative. Plus le nombre est grand, plus le temps d'aspiration est long. Invalide quand il est à 0.

Relâchement: Ajustez le temps d'aspiration de la pression négative. Plus le nombre est grand, plus le temps d'aspiration est long. Invalide quand il est à 0.

Remarque: les intervalles d'aspiration et d'échappement ne sont disponibles que lorsque la quantité est ajustée simultanément.

Entretien du corps



Améliore la relaxation de la peau due au vieillissement des graisses et de la peau. Aide à éliminer les déchets du corps et stimule le métabolisme. La fonction de massage à pression négative peut favoriser la réduction du volume des cellules graisseuses. Le massage sous vide à pression négative peut absorber pleinement divers tissus cutanés entre les RF thermofusibles multipolaires, permettant à l'énergie RF d'atteindre les tissus cutanés profonds plus efficacement. Dans le même temps, l'adsorption de la pression négative favorise la circulation sanguine et le métabolisme. Laissez les tissus musculaires se détendre pleinement et soulager la fatigue de la peau et des tissus musculaires.

Laser et EMS




Mode: (A: la lumière rouge reste allumée), (B: la lumière rouge clignote toutes les 1 seconde), (C: la lumière rouge clignote toutes les 2 secondes), (D: la lumière rouge clignote toutes les 3 secondes).
Durée: 30 minutes par défaut, réglable entre 0 et 60 minutes.

Quand il est à 0, l'instrument cesse de fonctionner.

Énergie: ajustez la micro – énergie électrique de la tête de travail. Plus le nombre est grand, plus l'énergie est grande. 10 vitesses peuvent être ajustées.

Light: ajuste la luminosité de la lampe du panneau laser. Plus le nombre est grand, plus la luminosité est élevée. 10 vitesses peuvent être ajustées.

Pour le body Shaping

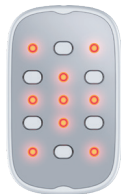

Les informations suivantes sont fournies pour l'utilisation correcte du système de traitement de la peau IPL. L'information comprend non seulement les règlements de protection contre les accidents auxquels les produits se conforment, mais également l'efficacité concernant l'utilisation correcte des produits.

Tête froide



Mode: par défaut, seul le mode a est disponible.

Durée: 30 minutes par défaut, réglable entre 0 et 60 minutes.

Quand il est à 0, l'instrument cesse de fonctionner.

Énergie: Ajustez l'énergie de travail de la tête de travail. Plus le

nombre est grand, plus l'énergie est grande. 10 vitesses peuvent être ajustées.



1. Aider à raffermir la peau, maintenir l'élasticité, prévenir les allergies et d'autres problèmes;
2. Rétrécir les pores, verrouiller l'humidité et réduire les rides;

Bio et LED



Mode: il existe quatre modes de massage micro – électrique (A / B / C / d) qui peuvent être sélectionnés en fonction de vos préférences personnelles.

Durée: 30 minutes par défaut, réglable entre 0 et 60 minutes.

Quand il est à 0, l'instrument

cesse de fonctionner.

Énergie: ajustez la micro – énergie électrique de la tête de travail. Plus le nombre est grand, plus l'énergie est grande. 10 vitesses peuvent être ajustées.

Couleur LED: ajustez la couleur de la lumière. La séquence lumineuse est lumière rouge, lumière verte, lumière bleue, lumière orange, lumière jaune, lumière violette, lumière bleue, lumière circulaire

Lumière: ajustez la luminosité de la lumière, 10 vitesses réglables.



Application: Front. Autour des yeux, joues, bouche, double menton, cou, corps

Le soin du visage sûr et indolore microcurrent aide à éliminer les rides et les rides tout en raffermissant la peau et en façonnant les traits du visage

Responsible EMS



MODE: Il existe quatre modes de massage micro-électrique (A/B/C/D), qui peuvent être sélectionnés en fonction des préférences personnelles.
TEMPS : par défaut, 30 minutes, réglable de 0 à 60 minutes. Quand il est 0, l'instrument cessera de fonctionner.

ÉNERGIE: Ajustez l'énergie micro-électrique de la tête de travail. Plus le nombre est grand, plus l'énergie est grande. Le 10ème engrenage peut être ajusté.

HOT: Ajustez la température de la tête de travail, réglable à 10 engrenages.




Il s'agit d'une technique de traitement de perte de poids non invasive qui brûle les graisses pendant l'exercice. Tout comme en 4 à 6 séances de 20 000 sit – ups ou squats en 30 minutes toutes les 2 à 3 semaines, la graisse moyenne diminue et la masse musculaire augmente. La zone de traitement comprend l'abdomen, les hanches, les bras et les cuisses. Traitement sûr et confortable

Instructions d'utilisation


Cuisses

- (1) de bas en haut, en poussant la lymphe à travers l'aîne;
- (2) tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de bas en haut peut aider à décomposer les graisses;
- (3) décomposer la graisse en poussant d'avant en arrière;
- (4) tirez vers le bas du genou à l'aîne pour améliorer la courbe.

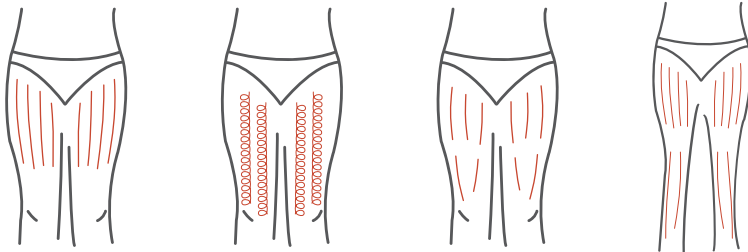


Les hanches

- (1) tirer vers la région lombaire dans la direction lymphatique;
- (2) rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de bas en haut, mouvement d'avant en arrière;
- (3) selon la texture musculaire, il peut glisser et comprimer la peau de la hanche pour que la hanche soit repulpée et ferme, présentant une courbe parfaite.

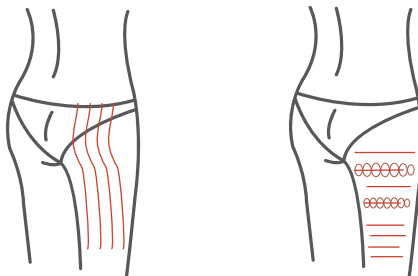

< retour

- (1) Pousser 2 – 3 fois d'avant en arrière;
- (2) rotation dans le sens antihoraire pour stimuler les ganglions lymphatiques;
- (3) sur le dos, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et déplacez – vous de haut en bas pour aider à décomposer la graisse;
- (4) tirer les toxines vers les ganglions lymphatiques en utilisant la technique de drainage lymphatique peut aider à améliorer la courbe du dos.

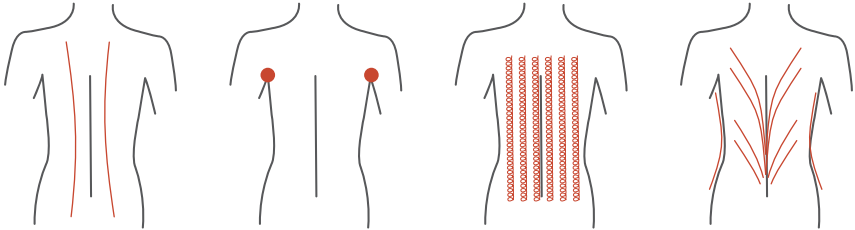

Bras




- (1) de l'intérieur du coude à l'aisselle, faire le drainage lymphatique;
- (2) Les ganglions lymphatiques stimulés sont arrondis;
- (3) décomposer l'excès de graisse en tournant ou en poussant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre;
- (4) serrez la peau des coudes aux aisselles.



Face à face


(1) appliquez le produit uniformément sur le visage, utilisez la tête RF du visage, manipulez le visage de traction de bas en haut, laissez la peau dans un état de tension, il est recommandé de l'utiliser pendant 5 minutes;

(2) appliquez le produit uniformément sur le visage, utilisez la tête RF pour aligner le visage, utilisez la direction de la flèche, il est recommandé d'utiliser 5 – 8 minutes.

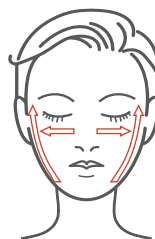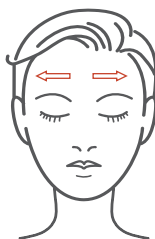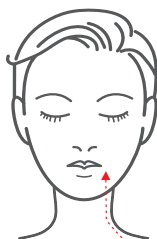


L'abdomen


- (1) autour du nombril de petit à grand, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour aider le péristaltisme du gros intestin;
- (2) de petit à grand cercle, pousser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

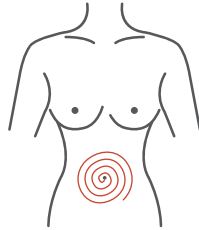

Le bras supérieur

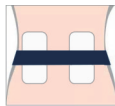

Bas – ventre / dos / côtés

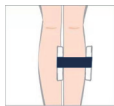

Le veau



Cuisses



Cuisses



Cuisses

Conseils chaleureux

1. Ne pas appliquer sur la surface de la peau sèche d'origine, il brûlera la peau. Assurez – vous d'appliquer une crème ou une huile essentielle sur votre peau et vous êtes prêt à l'utiliser.
2. Lors de l'utilisation, il doit y avoir des médias aqueux (huiles essentielles / crèmes, etc.), sinon cela endommagera la machine. Ne l'utilisez pas trop longtemps sur la même zone, évitez les parties du corps qui ont des os.
3. Ne connectez pas l'alimentation jusqu'à ce que la sonde soit bien installée.
4. La machine ne permet pas le remplacement de la sonde dans l'état de charge.

5. Veuillez enlever les bijoux en métal lorsque vous utilisez la machine.
6. Après 1 heure d'utilisation de la machine, veuillez vous arrêter 10 minutes pour laisser la machine se reposer.
7. S'il vous plaît assurez – vous d'éteindre l'alimentation après l'utilisation et nettoyer la sonde et faire des travaux d'entretien pour la prochaine utilisation.
8. S'il vous plaît garder la sonde propre à chaque fois, essuyer avec un chiffon sec, ne pas laver avec de l'eau.
9. Après l'application, nettoyez votre peau et appliquez un masque hydratant ou une crème, une huile essentielle après 10 minutes.
10. Certaines personnes peuvent avoir des acouphènes lors de l'utilisation de 80khead. C'est normal parce que cette onde sonore est au – delà de la portée des ondes sonores humaines.

Garantie et service après – vente

Nous promettons que toutes les machines sont soumises à notre inspection stricte pour assurer la meilleure qualité. Nous appliquerons notre expertise pour résoudre vos problèmes.

J'espère que vous ferez ce voyage avec nous.

Si vous avez des questions ou d'autres problèmes avec nos produits, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons toujours là pour vous.

Made in China

11 en 1 (ems)

Máquina de adelgazamiento de 80k

< Instrucciones de uso >




Para usar correctamente este producto, lea cuidadosamente el manual y Guárdalo adecuadamente.

Nombre de la pieza

Pantalla LCD y
pantalla de
operación



Diodos emisores de luz

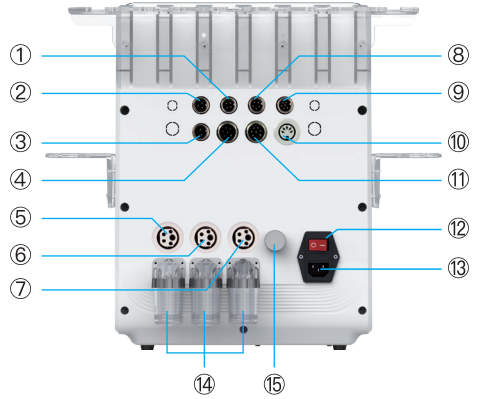

- ① interfaz de radiofrecuencia de 4 polos
- ② interfaz de radiofrecuencia tripolar
- ③ interfaz 80k
- ④ interfaz de cabeza fría
- ⑤ interfaz de gran presión negativa
- ⑥ Interfaz de presión negativa dieléctrica
- ⑦ Interfaz de pequeña presión negativa
- ⑧ Interfaz de placa láser

- ⑨ Interfaz de radiofrecuencia de 6 polos
- ⑩ Interfaz de cabeza Ems
- ⑪ Interfaz bio y LED
- ⑫ Interruptor
- ⑬ Interfaz de alimentación
- ⑭ Filtro
- ⑮ Regulación de presión negativa

Nombre de la pieza



3 cabeza de radiofrecuencia



4 cabeza de radiofrecuencia




6 cabeza de radiofrecuencia



Mango Ems



Cabeza quemadora de grasa de 80k

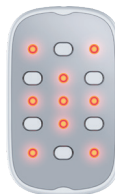

Láser y EMS



Cabeza de presión negativa pequeña



Cabeza de presión negativa media



Gran cabeza de presión negativa



Cabeza fría



Biología y LED

Método de uso



1. Conecte la cabeza de función al conector correspondiente y conecte el cable de alimentación.
2. Presione el interruptor de alimentación, y la luz del indicador y el LCD se encenderán. En este momento, haga clic abajo para seleccionar el idioma deseado.



3. seleccione el cabezal de trabajo necesario.
4. después de la selección, ajuste el modo de trabajo necesario, el horario de trabajo y la energía de trabajo, haga clic en el botón "▶" para comenzar a trabajar, haga clic en el botón "||" para suspender cuando lo use, o haga clic en el botón "🏠" para volver a la interfaz de selección de la cabeza de trabajo.
5. después de usarlo, Presione el botón "🏠" y apague la energía.

Función de diferentes cabezas

3 cabeza de RF: adecuada para 1 – 2 energías



Modo: (a: luz roja siempre encendida),
(b: luz roja parpadea cada 1 segundo),
(c: luz roja parpadea cada 2 segundos),
(d: luz roja parpadea cada 3 segundos).
Tiempo: el valor predeterminado es de 30 minutos, que se pueden ajustar entre 0 y 60 minutos. Cuando sea 0, el instrumento dejará de funcionar.

Energía: ajuste la energía de radiofrecuencia de la cabeza de trabajo. Cuanto mayor sea el número, mayor será la energía. la marcha 10 se puede ajustar.

Para la cara o los ojos



Cuando se usa en la piel, puede apretar y tirar de la piel y reducir las arrugas. Mejorar la circulación ocular, reducir los poros y aliviar la hinchazón ocular. Eliminar arrugas, ojeras y bolsas para los ojos. Mejorar la textura de la piel y eliminar los ojos caídos. Restaurar la vitalidad de la piel y mejorar el contorno del ojo.

4 cabeza de RF: adecuada para 2 – 3 energías



Modo: (a: luz roja siempre encendida),
(b: luz roja parpadea cada 1 segundo),
(c: luz roja parpadea cada 2 segundos),
(d: luz roja parpadea cada 3 segundos).
Tiempo: el valor predeterminado es de 30 minutos, que se pueden ajustar entre 0 y 60 minutos. Cuando sea 0, el instrumento dejará de funcionar.

Energía: ajuste la energía de radiofrecuencia de la cabeza de trabajo. Cuanto mayor sea el número, mayor será la energía. la marcha 10 se puede ajustar.

Para la cara y el cuello



Apretar la piel, mejorar la elasticidad de la piel, eliminar las arrugas faciales, apretar la piel, reducir la hinchazón facial, reducir el enrojecimiento e hinchazón, aliviar la fatiga ocular, eliminar las ojeras y las bolsas, y mejorar la calidad de la piel.

6 cabeza de RF: adecuada para 2 – 5 energías



Modo: (a: luz roja siempre encendida), (b: luz roja parpadea cada 1 segundo), (c: luz roja parpadea cada 2 segundos), (d: luz roja parpadea cada 3 segundos).
Tiempo: el valor predeterminado es de 30 minutos, que se pueden ajustar entre 0 y 60 minutos. Cuando sea 0, el instrumento dejará de funcionar.

Energía: ajuste la energía de radiofrecuencia de la cabeza de trabajo. Cuanto mayor sea el número, mayor será la energía. la marcha 10 se puede ajustar.

Para la espalda y la cintura del cuerpo, muslos y pantorrillas



Se puede apretar la cintura, apretar y ayudar a modelar.
Relaje los músculos de los brazos y muslos, masajee todo el cuerpo y apriete los brazos y muslos.

Cabeza quemadora de grasa de 80k



Modo: (a: vibración continua), (b: parada de 1 segundo por vibración), (c: suspensión de 2 segundos por vibración), (d: interrupción de 3 segundos por vibración).
Tiempo: el valor predeterminado es de 30 minutos, que se pueden ajustar entre 0 y 60 minutos. Cuando sea 0, el

instrumento dejará de funcionar.

Energía: ajuste la energía de vibración de la cabeza de trabajo. Cuanto mayor sea el número, mayor será la energía. la marcha 10 se puede ajustar.

Para la formación del cuerpo



Puede disolver la grasa, desintoxicar la linfa, endurecer la piel, aumentar la elasticidad de la piel, llegar directamente a la capa de grasa, tener la función de dirigir la salida de radiofrecuencia, acelerar el Movimiento de las células grasas para generar energía térmica y expulsar el exceso de grasa y toxinas de la cara del cuerpo a través de las glándulas sudoríparas, la circulación hepatointestinal y la circulación linfática, disolviendo así la grasa.

Cabeza de presión negativa pequeña



Modo: (a: luz roja siempre encendida), (b: luz roja parpadea cada 1 segundo), (c: luz roja parpadea cada 2 segundos), (d: luz roja parpadea cada 3 segundos).

Tiempo: el valor predeterminado es de 30 minutos, que se pueden ajustar entre 0 y 60 minutos. Cuando sea 0, el

instrumento dejará de funcionar.

Energía: ajuste la energía de radiofrecuencia de la cabeza de trabajo. Cuanto mayor sea el número, mayor será la energía. la marcha 10 se puede ajustar.

Succión: ajuste el tiempo de succión de presión negativa. Cuanto mayor sea el número, mayor será el tiempo de succión. no es válido cuando es 0.

Liberación: ajuste el tiempo de succión de presión negativa. Cuanto mayor sea el número, mayor será el tiempo de succión. no es válido cuando es 0.

Nota: los intervalos de aspiración y escape solo están disponibles cuando se ajusta la cantidad al mismo tiempo.

Para la cara o los ojos



Elevación facial, opresión, protección contra el frío, alivio del dolor, raspado, ventosas. Mejorar la relajación de la piel causada por la grasa y el envejecimiento de la piel. Ayuda a eliminar los residuos del cuerpo y promover el metabolismo. La función de masaje de presión negativa puede promover la disminución del volumen de células grasas. El masaje de presión negativa al vacío puede absorber completamente todo tipo de tejidos cutáneos entre las radiofrecuencias termofundidas multipolares, lo que permite que la energía de radiofrecuencia llegue más eficazmente a los tejidos cutáneos profundos. Al mismo tiempo, la absorción de presión negativa promueve la circulación sanguínea y el metabolismo. Deje que el tejido muscular se relaje completamente y alivie la fatiga de la piel y el tejido muscular.

Cabeza de presión negativa media



Modo: (a: luz roja siempre encendida), (b: luz roja parpadea cada 1 segundo), (c: luz roja parpadea cada 2 segundos), (d: luz roja parpadea cada 3 segundos).

Tiempo: el valor predeterminado es de 30 minutos, que se pueden ajustar entre 0 y 60 minutos. Cuando sea 0, el

instrumento dejará de funcionar.

Energía: ajuste la energía de radiofrecuencia de la cabeza de trabajo. Cuanto mayor sea el número, mayor será la energía. la marcha 10 se puede ajustar.

Succión: ajuste el tiempo de succión de presión negativa. Cuanto mayor sea el número, mayor será el tiempo de succión. no es válido cuando es 0.

Liberación: ajuste el tiempo de succión de presión negativa. Cuanto mayor sea el número, mayor será el tiempo de succión. no es válido cuando es 0.

Nota: los intervalos de aspiración y escape solo están disponibles cuando se ajusta la cantidad al mismo tiempo.

Para la cara y el cuello



La terapia de raspado hombro – cuello se utiliza para la desintoxicación linfática, aliviar el dolor, raspado y ventosas. Mejorar la relajación de la piel causada por la grasa y el envejecimiento de la piel. Ayuda a eliminar los residuos del cuerpo y promover el metabolismo. La función de masaje de presión negativa puede promover la disminución del volumen de células grasas. El masaje de presión negativa al vacío puede absorber completamente todo tipo de tejidos cutáneos entre las radiofrecuencias termofundidas multipolares, lo que permite que la energía de radiofrecuencia llegue más eficazmente a los tejidos cutáneos profundos. Al mismo tiempo, la absorción de presión negativa promueve la circulación sanguínea y el metabolismo. Deje que el tejido muscular se relaje completamente y alivie la fatiga de la piel y el tejido muscular.

Cabeza de presión negativa media



Modo: (a: luz roja siempre encendida), (b: luz roja parpadea cada 1 segundo), (c: luz roja parpadea cada 2 segundos), (d: luz roja parpadea cada 3 segundos).

Tiempo: el valor predeterminado es de 30 minutos, que se pueden ajustar entre 0 y 60 minutos. Cuando sea 0, el

instrumento dejará de funcionar.

Energía: ajuste la energía de radiofrecuencia de la cabeza de trabajo. Cuanto mayor sea el número, mayor será la energía. la marcha 10 se puede ajustar.

Succión: ajuste el tiempo de succión de presión negativa. Cuanto mayor sea el número, mayor será el tiempo de succión. no es válido cuando es 0.

Liberación: ajuste el tiempo de succión de presión negativa. Cuanto mayor sea el número, mayor será el tiempo de succión. no es válido cuando es 0.

Nota: los intervalos de aspiración y escape solo están disponibles cuando se ajusta la cantidad al mismo tiempo.

Mantenimiento de la carrocería



Mejorar la caída de la piel causada por la grasa y el envejecimiento de la piel. Ayuda a eliminar los materiales residuales en el cuerpo y promover el metabolismo. La función de masaje a presión negativa puede promover la reducción del volumen de células grasas. El masaje de presión negativa al vacío puede absorber completamente varios tejidos de la piel entre la radiofrecuencia de fusión térmica multipolar, de modo que la energía de radiofrecuencia pueda llegar al tejido de la piel profunda de manera más eficaz. Al mismo tiempo, la adsorción de la presión negativa promueve la circulación sanguínea y el metabolismo. Deje que el tejido muscular se relaje completamente y alivie la fatiga de la piel y el tejido muscular.

Láser y EMS



MODO: (A: la luz roja está siempre encendida), (B: la luz roja parpadea cada 1 segundo), (C: la luz roja parpadea cada 2 segundos), (D: la luz roja parpadea cada 3 segundos).


TIMO: El valor predeterminado es de 30 minutos, ajustable de 0 a 60

minutos. Cuando es 0, el instrumento dejará de funcionar.

ENERGÍA: Ajuste de la energía microeléctrica del cabezal de trabajo. Cuanto mayor es el número, mayor es la energía. El 10° engranaje se puede ajustar.

LUZ: Ajuste el brillo de la lámpara del panel láser. Cuanto mayor sea el número, mayor será el brillo. El 10° engranaje se puede ajustar.

Para la formación del cuerpo

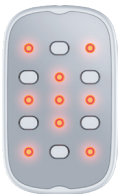

La siguiente información se utiliza para el uso correcto del sistema de tratamiento de la piel con luz pulsada fuerte. La información incluye no solo las normas de protección contra accidentes que cumple el producto, sino también la efectividad del uso correcto del producto.

Cabeza fría



Modo: por defecto, solo el modo a está disponible.

Tiempo: el valor predeterminado es de 30 minutos, que se pueden ajustar entre 0 y 60 minutos. Cuando sea 0, el instrumento dejará de funcionar.

Energía: ajuste la energía de

trabajo de la cabeza de trabajo. Cuanto mayor sea el número, mayor será la energía. se pueden ajustar 10 marchas.



1. ayudar a la piel a apretar, mantener la elasticidad y prevenir problemas como alergias;
2. reducir los poros, bloquear la humedad y reducir las arrugas;

BIO y LED



Modo: hay cuatro modos de masaje eléctrico en miniatura (a / B / C / d), que se pueden elegir según las preferencias personales.

Tiempo: el valor predeterminado es de 30 minutos, que se pueden ajustar entre 0 y 60 minutos.

Cuando sea 0, el instrumento dejará de funcionar.

Energía: ajuste la energía Microelectrónica de la cabeza de trabajo. Cuanto mayor sea el número, mayor será la energía. la marcha 10 se puede ajustar.

Color led: ajuste el color de la luz. La secuencia óptica es roja, verde, azul, naranja, amarillo, púrpura, azul, circular.

Illuminación: ajuste el brillo de la luz, 10 marchas ajustables.



Aplicación: frente. Alrededor de los ojos, mejillas, boca, barbilla, cuello, cuerpo
El cuidado facial seguro e indoloro con microcorriente ayuda a eliminar líneas finas y arrugas, al tiempo que aprieta la piel y da forma a las características faciales.

Jefe de Ems



Modo: hay cuatro modos de masaje eléctrico en miniatura (a / B / C / d), que se pueden elegir según las preferencias personales.
Tiempo: el valor predeterminado es de 30 minutos, que se pueden ajustar entre 0 y 60 minutos. Cuando sea 0, el instrumento dejará de funcionar.

Energía: ajuste la energía Microelectrónica de la cabeza de trabajo. Cuanto mayor sea el número, mayor será la energía. la marcha 10 se puede ajustar.
Hot: ajuste la temperatura de la cabeza de trabajo, que se puede ajustar en la marcha 10.




Se trata de una técnica no invasiva de tratamiento para la pérdida de peso que permite quemar grasa durante el ejercicio. al igual que en cuatro o seis tratamientos se completan 20.000 abdominales o sentadillas en 30 minutos cada dos o tres semanas, la grasa media disminuye y la masa muscular aumenta. El área de tratamiento incluye abdomen, caderas, brazos y muslos. tratamiento seguro y cómodo

Orientación sobre el uso


Muslo

- (1) De abajo a arriba, empuje a la ingle para dragar la linfa;
- (2) Girar en sentido antihorario de abajo a arriba puede ayudar a descomponer la grasa;
- (3) Descomponer grasa empujando hacia adelante y hacia atrás;
- (4) Tirar hacia abajo de la rodilla a la ingle para mejorar la curva.

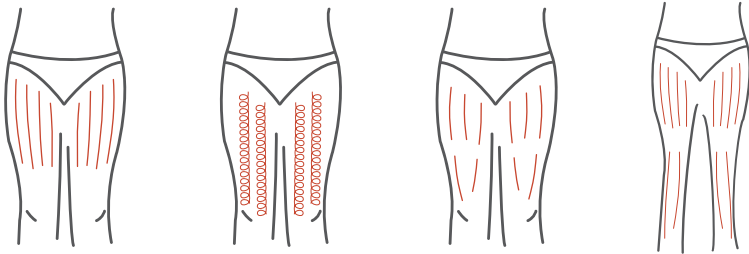


Caderas

- (1) tire hacia la cintura en la dirección de la linfa;
- (2) girar de abajo hacia arriba en sentido contrario a las agujas del reloj y moverse hacia adelante y hacia atrás;
- (3) dependiendo de la textura muscular, puede deslizarse y comprimir la piel de la cadera, haciendo que la cadera esté llena y apretada, mostrando una curva perfecta.

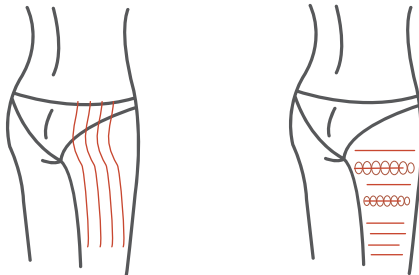

Volver

- (1) empujar de ida y vuelta 2 – 3 veces;
- (2) girar en sentido contrario a las agujas del reloj para estimular los ganglios linfáticos;
- (3) en la espalda, girar en sentido contrario a las agujas del reloj y moverse hacia arriba y hacia abajo para ayudar a descomponer la grasa;
- (4) el uso de técnicas de drenaje linfático para atraer toxinas a los ganglios linfáticos puede ayudar a mejorar la curva de la espalda.

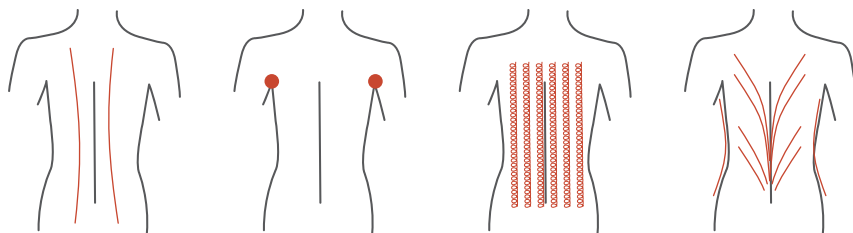

Brazo


- (1) hacer drenaje linfático desde el interior del codo hasta la axila;
- (2) estimular los ganglios linfáticos para que sean redondos;
- (3) descomponer el exceso de grasa girando en sentido contrario a las agujas del reloj o empujando de ida y vuelta;
- (4) endurecer la piel desde el codo hasta la axila.



Enfrentar



(1) Aplique uniformemente el producto en la cara, use la cabeza RF de la cara, opere de abajo a arriba para levantar la cara, haga que la piel esté tensa, se recomienda usar durante 5 minutos;

(2) Aplique el producto uniformemente en la cara, use la cabeza de RF en la cara, opere en la dirección de la flecha, se recomienda usarlo durante 5–8 minutos.

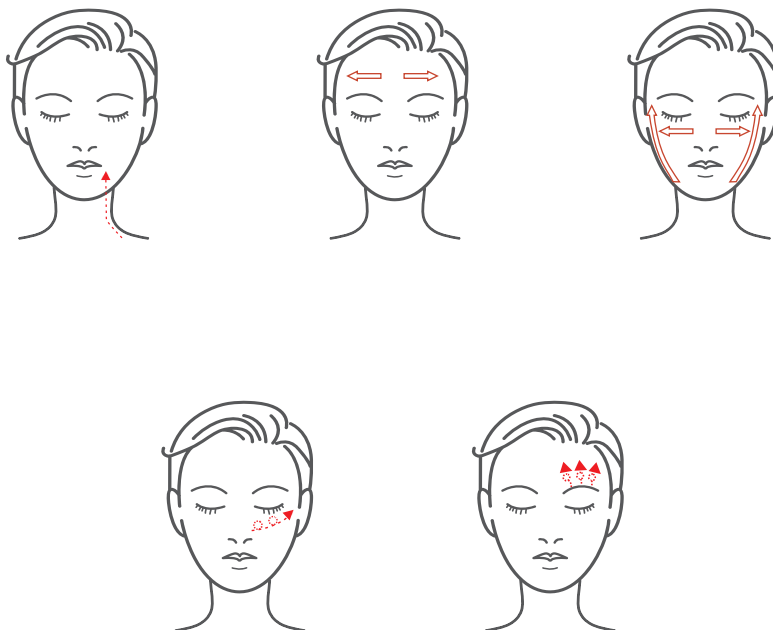

Abdomen

- (1) alrededor del ombligo, de pequeño a grande, da vueltas en el sentido de las agujas del reloj para ayudar a la motilidad del intestino grueso;
- (2) de un círculo pequeño a un círculo grande, empuje en sentido contrario a las agujas del reloj.

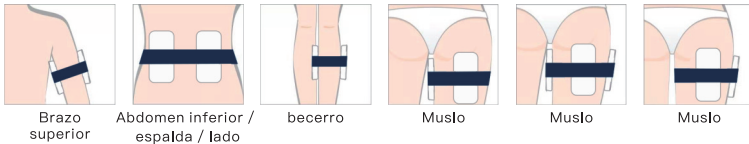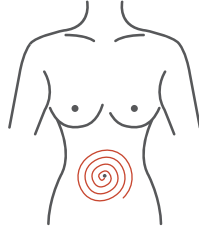

Consejos cálidos

1. no usar en la superficie de la piel original y seca puede quemar la piel. Asegúrese de aplicar una crema o aceite esencial a la piel antes de que pueda usarse.
2. al usarlo, debe tener un medio acuático (aceite esencial / crema, etc.), de lo contrario dañará la máquina. no use en la misma zona durante demasiado tiempo y evite partes del cuerpo con huesos.
3. no conecte la fuente de alimentación hasta que la sonda esté instalada.
4. no se permite cambiar la sonda en la máquina en estado de carga.

5. al usar la máquina, retire las joyas metálicas.
6. después de una hora de uso de la máquina, Deténgase durante 10 minutos para que la máquina descanse.
7. asegúrese de apagar la fuente de alimentación después de usarlo, limpiar la sonda y hacer un buen trabajo de mantenimiento para la próxima vez.
8. mantenga la sonda limpia cada vez, limpie con un paño seco y no con agua.
9. después de usarlo, limpie la piel y aplique una máscara hidratante o crema facial, aceite esencial después de 10 minutos.
10. al usar 80khead, algunas personas pueden tener tinnitus. Esto es normal porque este tipo de ondas sonoras están más allá del alcance de las ondas sonoras humanas.

Garantía y servicio postventa

Nos comprometemos a que todas las máquinas sean inspeccionadas estrictamente por nosotros para garantizar la mejor calidad. Utilizaremos nuestras habilidades profesionales para resolver sus problemas.

Espero que puedas embarcarte en este viaje con nosotros.

Si tiene alguna pregunta u otra pregunta sobre nuestro producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Siempre estaremos a tu lado.

Made in China


11 in 1 (EMS) 80K SLIMMING MACHINE

< Handleiding >



Leesdehandleidingzorgvuldigdoorenbewaardeze goedomditproductcorrecttegebruiken.

Deelnaam

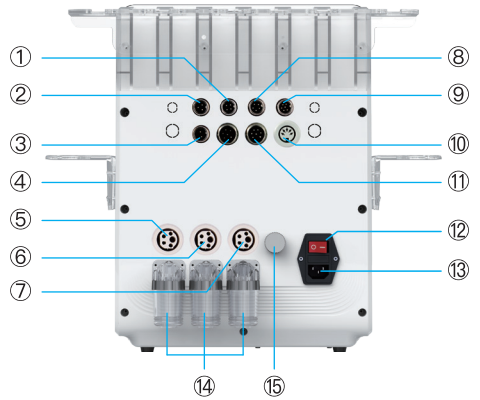

- ① 4-polige RF-interface
- ② 3-polige RF-interface
- ③ 80K interface
- ④ Interface met koude kop
- ⑤ Grote onderdrukinterface
- ⑥ Medium negatieve drukinterface
- ⑦ Kleine onderdrukinterface
- ⑧ Laserboard interface

- ⑨ 6-polige RF-interface
- ⑩ EMS-hoofdinterface
- ⑪ BIO&LED interface
- ⑫ Schakelaar
- ⑬ Power interface
- ⑭ Filter
- ⑮ Regeling van negatieve druk

Deelnaam



3 RF Hoofd



4 RF Hoofd




6 RF Hoofd



EMS-handvat



80K Fat Burn Head

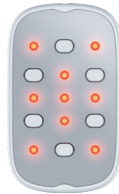

Laser & EMS



Kleine onderdrukkop



Medium negatieve drukkop



Grote onderdrukkop



Koude kop



BIO & LEIDEN

Gebruiksmethode



1. Sluit de functiekop aan op de overeenkomstige aansluiting en sluit het netsnoer aan.
2. Druk op de aan/uit schakelaar en het indicatielampje en LCD gaan branden. Klik op dit moment hieronder om de gewenste taal te selecteren.



3. Selecteer de gewenste werkkop.
4. Pas na het selecteren de gewenste werkmodus, werktijd en werkenergie aan, klik op de knop “▶” om te beginnen met werken, klik op de knop “||” om te pauzeren tijdens het gebruik, of klik op de knop “🏠” om terug te keren naar de werkhoofd selectie interface.
5. Druk na gebruik op de knop “🏠” en schakel het apparaat uit.

Functie van verschillende hoofden

3 RF Hoofd: Geschikt voor 1–2 Energie



MODE: (A: rood licht is altijd aan), (B: rood licht knippert elke 1 seconde), (C: rood licht knippert elke 2 seconden), (D: rood licht knippert elke 3 seconden).
TIJD: De standaard is 30 minuten, verstelbaar van 0 tot 60 minuten. Wanneer het 0 is, stopt het

instrument met werken.

ENERGIE: Pas de RF-energie van het werkhoofd aan. Hoe groter het aantal, hoe groter de energie. De 10e versnelling kan worden aangepast.

Gebruik voor het gezicht of de ogen



Bij gebruik op de huid kan het de huid versterken en opheffen, winkel verminderen. Verbetering van de oogcirculatie, krimpen poriën en gezwollen ogen. Verwijder rimpels, donkere cirkels en zakken onder de ogen. Verbeter de huidtextuur en elimineer zakkende ogen. Verjongt de huid en verbetert de oogcontour.

4 RF hoofd: Geschikt voor 2–3 energie



MODE: (A: rood licht is altijd aan), (B: rood licht knippert elke 1 seconde), (C: rood licht knippert elke 2 seconden), (D: rood licht knippert elke 3 seconden).
TIJD: De standaard is 30 minuten, verstelbaar van 0 tot 60 minuten. Wanneer het 0 is, stopt het

instrument met werken.

ENERGIE: Pas de RF-energie van het werkhoofd aan. Hoe groter het aantal, hoe groter de energie. De 10e versnelling kan worden aangepast.

Gebruik voor gezicht en hals



Stevige huid, verbetert huidelasticiteit, eliminatie van gezichtsrimpels, het aanscherpen en opheffen van de huid, vermindert gezichtszwelling, vermindert roodheid, verlicht oogvermoeidheid, verwijder donkere kringen, en oogzakken, verbetert huidkwaliteit.

6 RF Hoofd: Geschikt voor 2-5 Energie



MODE: (A: rood licht is altijd aan), (B: rood licht knippert elke 1 seconde), (C: rood licht knippert elke 2 seconden), (D: rood licht knippert elke 3 seconden).
TIJD: De standaard is 30 minuten, verstelbaar van 0 tot 60 minuten. Wanneer het 0 is, stopt het

instrument met werken.

ENERGIE: Pas de RF-energie van het werkhoofd aan. Hoe groter het aantal, hoe groter de energie. De 10e versnelling kan worden aangepast.

Gebruik voor de rug en taille van lichaam, dijen en kuiten



Kan de taille strakker maken, stevig maken en lichaamsvorming helpen. Verzacht de spieren van de armen en dijen, geef het hele lichaam massage en span de armen en dijen aan.

80K Fat Burn Head



MODE: (A: continue trilling), (B: stop voor 1 seconde per trilling), (C: stop voor 2 seconden per trilling), (D: stop voor 3 seconden per trilling).
TIJD: De standaard is 30 minuten, verstelbaar van 0 tot 60 minuten. Wanneer het 0 is, stopt het

instrument met werken.

ENERGIE: Pas de trillingsenergie van de werkkop aan. Hoe groter het aantal, hoe groter de energie. De 10e versnelling kan worden aangepast.

Gebruik voor het lichaam Shaping



Het kan vet oplossen, lymfe ontgiften, huid aanscherpen, huidelasticiteit verbeteren, vetlaag direct bereiken, de functie van directionele RF-output hebben, de beweging van vetcellen versnellen om warmteenergie te genereren, en het overtollige vet en toxine in het gezicht uit het lichaam door zweetklieren, leverdarmcirculatie en lymfecirculatie lozen, om vet op te lossen.

Kleine onderdrukkop



MODE: (A: rood licht is altijd aan), (B: rood licht knippert elke 1 seconde), (C: rood licht knippert elke 2 seconden), (D: rood licht knippert elke 3 seconden).
TIJD: De standaard is 30 minuten, verstelbaar van 0 tot 60 minuten. Wanneer het 0 is, stopt het

instrument met werken.

ENERGIE: Pas de RF-energie van het werkhoofd aan. Hoe groter het aantal, hoe groter de energie. De 10e versnelling kan worden aangepast.

SUCTIE: Pas de zuigtijd van negatieve druk aan. Hoe groter het aantal is, hoe langer de zuigtijd zal zijn. Het is ongeldig wanneer het 0 is.

VRAAG: Pas de zuigtijd van negatieve druk aan. Hoe groter het aantal is, hoe langer de zuigtijd is. Het is ongeldig wanneer het 0 is.

Opmerking: De inspirator- en uitgassingsintervallen zijn alleen beschikbaar wanneer het aantal tegelijkertijd wordt aangepast.

Gebruik voor het gezicht of de ogen



Facial lifting, versteviging, anti-aging, verlichting van pijn, schrapen en cupping. Verbeter de verzakking van de huid veroorzaakt door vet en huidveroudering. Help afvalstoffen in het lichaam te elimineren en het metabolisme te bevorderen. De negatieve drukmassagefunctie kan vetcelvolumevermindering bevorderen. Vacuüm negatieve drukmassage kan verschillende huidweefsels volledig absorberen tussen de multipolaire thermische smeltende radiofrequentie, zodat de radiofrequentieenergie het diepe huidweefsel effectiever kan bereiken. Tegelijkertijd bevordert de adsorptie van negatieve druk de bloedcirculatie en het metabolisme. Laat het spierweefsel volledig ontspannen en verlicht de vermoeidheid van de huid en spierweefsel.

Medium negatieve drukkop



MODE: (A: rood licht is altijd aan), (B: rood licht knippert elke 1 seconde), (C: rood licht knippert elke 2 seconden), (D: rood licht knippert elke 3 seconden). TIJD: De standaard is 30 minuten, verstelbaar van 0 tot 60 minuten. Wanneer het 0 is, stopt het

instrument met werken.

ENERGIE: Pas de RF-energie van het werkhoofd aan. Hoe groter het aantal, hoe groter de energie. De 10e versnelling kan worden aangepast. SUCTIE: Pas de zuigtijd van negatieve druk aan. Hoe groter het aantal is, hoe langer de zuigtijd zal zijn. Het is ongeldig wanneer het 0 is. VRAAG: Pas de zuigtijd van negatieve druk aan. Hoe groter het aantal is, hoe langer de zuigtijd is. Het is ongeldig wanneer het 0 is. Opmerking: De inspirator- en uitgassingsintervallen zijn alleen beschikbaar wanneer het aantal tegelijkertijd wordt aangepast.

Gebruik voor gezicht en Hals



Schouder en nek schrapen therapie voor lymfatische detoxificatie verlichting van pijn, schrapen en cuppen. Verbeter de verzakking van de huid veroorzaakt door vet en huidveroudering. Help afvalstoffen in het lichaam te elimineren en het metabolisme te bevorderen. De negatieve drukmassagefunctie kan vetcelvolumevermindering bevorderen. Vacuüm negatieve drukmassage kan verschillende huidweefsels volledig absorberen tussen de multipolaire thermische smeltende radiofrequentie, zodat de radiofrequentieenergie het diepe huidweefsel effectiever kan bereiken. Tegelijkertijd bevordert de adsorptie van negatieve druk de bloedcirculatie en het metabolisme. Laat het spierweefsel volledig ontspannen en verlicht de vermoeidheid van de huid en spierweefsel.

Medium negatieve drukkop



MODE: (A: rood licht is altijd aan), (B: rood licht knippert elke 1 seconde), (C: rood licht knippert elke 2 seconden), (D: rood licht knippert elke 3 seconden). TIJD: De standaard is 30 minuten, verstelbaar van 0 tot 60 minuten. Wanneer het 0 is, stopt het

instrument met werken.

ENERGIE: Pas de RF-energie van het werkhoofd aan. Hoe groter het aantal, hoe groter de energie. De 10e versnelling kan worden aangepast.

SUCTIE: Pas de zuigtijd van negatieve druk aan. Hoe groter het aantal is, hoe langer de zuigtijd zal zijn. Het is ongeldig wanneer het 0 is.

VRAAG: Pas de zuigtijd van negatieve druk aan. Hoe groter het aantal is, hoe langer de zuigtijd is. Het is ongeldig wanneer het 0 is.

Opmerking: De inspirator- en uitgassingsintervallen zijn alleen beschikbaar wanneer het aantal tegelijkertijd wordt aangepast.

Lichaamsonderhoud



Verbeter de verzakking van de huid veroorzaakt door vet en huidveroudering. Help afvalstoffen in het lichaam te elimineren en het metabolisme te bevorderen. De negatieve drukmassagefunctie kan vetcelvolumevermindering bevorderen. Vacuüm negatieve drukmassage kan verschillende huidweefsels volledig absorberen tussen de multipolaire thermische smeltende radiofrequentie, zodat de radiofrequentieenergie het diepe huidweefsel effectiever kan bereiken. Tegelijkertijd bevordert de adsorptie van negatieve druk de bloedcirculatie en het metabolisme. Laat het spierweefsel volledig ontspannen en verlicht de vermoeidheid van de huid en spierweefsel.

Lasersystemen EMS




MODE: (A: rood licht is altijd aan), (B: rood licht knippert elke 1 seconde), (C: rood licht knippert elke 2 seconden), (D: rood licht knippert elke 3 seconden).
TIJD: De standaard is 30 minuten, verstelbaar van 0 tot 60 minuten. Wanneer het 0 is, stopt het

instrument met werken.

ENERGIE: Pas de micro-elektrische energie van de werkkop aan. Hoe groter het aantal, hoe groter de energie. De 10e versnelling kan worden aangepast.

Licht: Pas de helderheid van de lamp van het laserpaneel aan. Hoe groter het aantal, hoe groter de helderheid. De 10e versnelling kan worden aangepast.

Gebruik voor het Lichaam Shaping

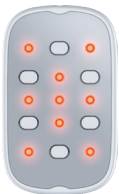

De volgende informatie wordt verstrekt voor het juiste gebruik van IPL Skin behandelingssysteem. De Informatie omvat niet alleen de ongevallenbeschermingsvoorschriften waaraan de producten voldoen, maar ook de effectiviteit met betrekking tot correct gebruik van de producten.

Koude kop



MODE: Standaard is alleen modus A beschikbaar.

TIJD: De standaard is 30 minuten, verstelbaar van 0 tot 60 minuten. Wanneer het 0 is, stopt het instrument met werken.

ENERGIE: Pas de werkenergie van het werkhoofd aan. Hoe groter het

aantal, hoe groter de energie. De 10 versnellingen kunnen worden aangepast.



1. Help huidstevigheid, behoud elasticiteit, voorkom allergieën en andere problemen;
2. krimp poriën, sluit water op en verminder rimpels;

BIO & LEIDEN



MODE: Er zijn vier (A/B/C/D) micro-elektrische massagemodi, die kunnen worden geselecteerd volgens persoonlijke voorkeuren.

TIJD: De standaard is 30 minuten, verstelbaar van 0 tot 60 minuten. Wanneer het 0 is, stopt het instrument met werken.

ENERGIE: Pas de micro-elektrische energie van de werkkop aan. Hoe groter het aantal, hoe groter de energie. De 10e versnelling kan worden aangepast.

LEIDENE KLEUR: Pas de lichtkleur aan. De lichtvolgorde is rood licht, groen licht, blauw licht, oranje licht, geel licht, paars licht, blauw licht, cirkellicht.

Licht: Pas de lichte helderheid aan, de 10-versnellingen kunnen worden aangepast.



Toepassing: voorhoofd, ogen rond, wang, mond, dubbele kin, nek, lichaam
Microstroomveilige en pijnloze gezichtsbehandeling helpt fijne lijntjes en rimpels te verwijderen, terwijl je huid verstevigt en je gelaatstrekken definieert

Hoofd EMS



MODE: Er zijn vier (A/B/C/D) micro-elektrische massagemodi, die kunnen worden geselecteerd volgens persoonlijke voorkeuren.
TIJD: De standaard is 30 minuten, verstelbaar van 0 tot 60 minuten. Wanneer het 0 is, stopt het instrument met werken.

ENERGIE: Pas de micro-elektrische energie van de werkkop aan. Hoe groter het aantal, hoe groter de energie. De 10e versnelling kan worden aangepast.

HET: Pas de werkt temperatuur van het hoofd aan, verstelbaar bij 10 versnellingen.




Het is een niet-invasieve afslankbehandeling technologie die vet kan verbranden tijdens het sporten Net als het voltooien van 20.000 sit-ups of squats in slechts 30 minuten, elke 2 tot 3 weken, tijdens 4 tot 6 behandelingen, neemt het gemiddelde vet af en neemt de spiermassa toe. Het behandelingsgebied omvat de buik, billen, armen en dijen. veilige en comfortabele behandeling

Richtlijnen gebruiken


dij

- (1) Van onder naar boven, duw naar lies om lymfe te baggeren;
- (2) Het draaien tegen de klok in van onder naar boven kan helpen vet af te breken;
- (3) Ontcomposeer vettig door heen en weer te duwen;
- (4) Trek naar beneden van de knie naar de lies om de curve te verbeteren.

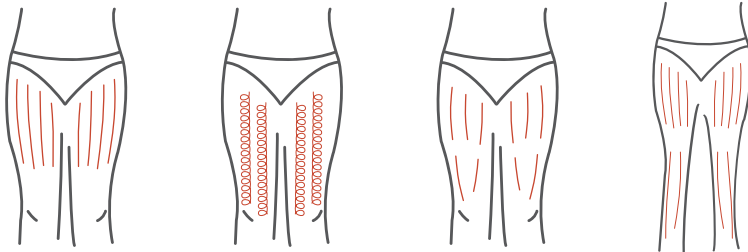


Heupen

- (1) Trek naar de taille in de richting van lymfe;
- (2) Cirkel tegen de klok in van onder naar boven en beweeg heen en weer;
- (3) Volgens de spiertextuur, kan het de billenhuid glijden en compacteren, waardoor de bill mollig en stevig wordt en de perfecte curve presenteert.

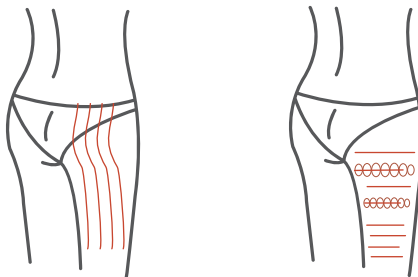

Terug

- (1) Duw heen en weer 2–3 keer;
- (2) Cirkel tegen de klok in om de lymfeklieren te stimuleren;
- (3) Draai op de rug tegen de klok in en beweeg omhoog en omlaag om vet af te breken;
- (4) Het gebruik van lymfdrainagetechniek om toxine naar lymfeklieren te trekken kan helpen de rugcurve te verbeteren.

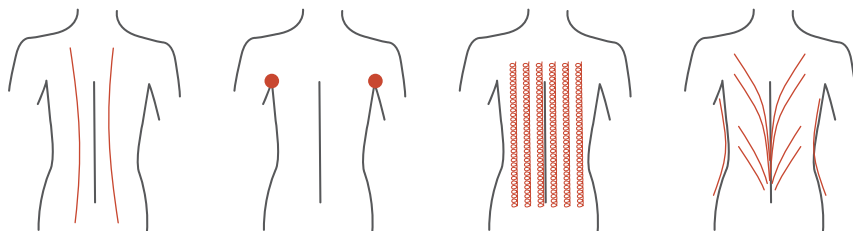


Arm

- (1) Van de binnenste elleboog naar de oksel, doe lymfedrainage;
- (2) Om lymfeklieren in een cirkel te stimuleren;
- (3) Breek overtollig vet af door het tegen de klok in te draaien of het heen en weer te duwen;
- (4) Trek de huid van elleboog tot oksel aan.



Gezicht



- (1) Breng het product gelijkmatig aan op het gezicht, gebruik het gezicht RF-hoofd, werk van onder naar boven om het gezicht op te tillen, maak de huid in een gespannen staat, het wordt aanbevolen om vijf minuten te gebruiken;
- (2) Breng het product gelijkmatig aan op het gezicht, gebruik de RF-kop op het gezicht, werk in de richting van de pijl, het wordt aanbevolen om het voor 5–8 minuten te gebruiken.

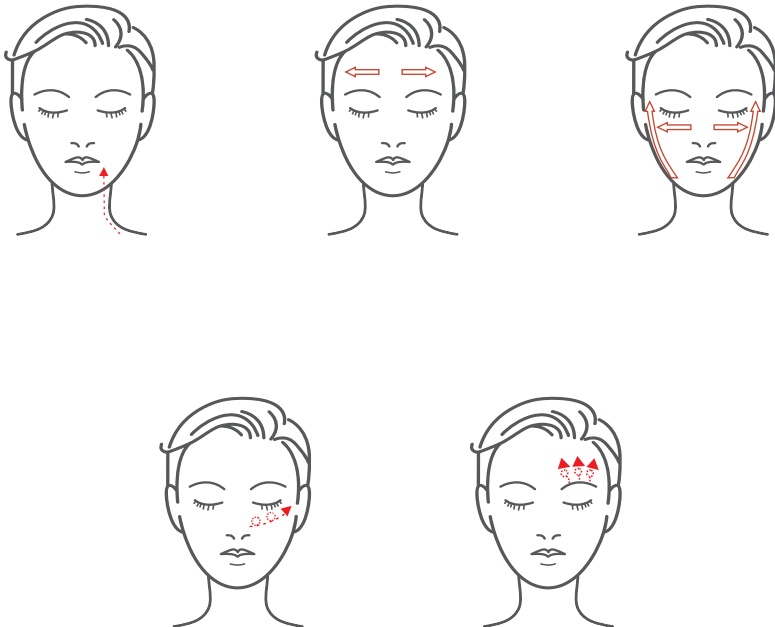

Buik

(1) Rond de navel van klein tot groot, cirkel met de klok om dikdarm peristalsis te helpen;

(2) Van de kleine cirkel naar de grote cirkel, duw het tegen de klok.

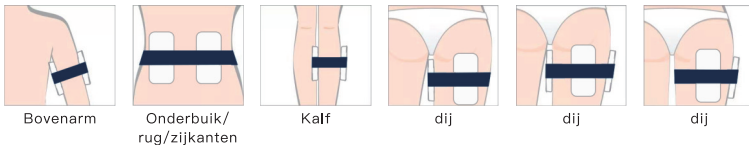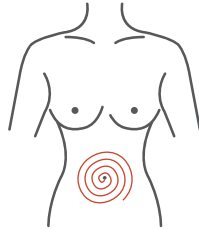

Warme tips voor jou

1. Gebruik niet op uw oorspronkelijke en droge huidoppervlakte, het zal uw huid verbranden. Zorg ervoor dat u crème of oliën aanbrengen op uw huid dan kunt u gebruiken.

2. Bij het gebruik, moet er een waterig medium (etherische olie/crèmes, enz.) zijn, anders zal het de machine beschadigen. Gebruik niet op hetzelfde deel te lang, en vermijd lichaamsdelen met botten.

3. Sluit de macht niet aan totdat de sonde goed is geïnstalleerd.

4. De machine mag niet probe vervangen wanneer in de laadstaat.

5. Verwijder alstublieft de metaalssieraden wanneer u de machine

gebruikt.

6. Wanneer de machine gedurende 1 uur wordt gebruikt, stopt u alstublieft gedurende 10 minuten om de machine te laten rusten.

7. Zorg ervoor dat u de macht na gebruik uitschakelt, en schoonmaak de sonde houdt goed onderhoud voor volgende keer gebruik.

8. Houd de sonde elke keer schoon, gebruik een droge doek om het te vegen, gebruik geen water om schoon te maken.

9. Na het gebruik, reinig u de huid en breng hydraterend masker of crèmes, oliën na 10 minuten toe.

10. Bij het gebruik van 80KHead kunnen sommige mensen tinnitus ervaren. Dit is normaal omdat deze geluidsgolf het bereik van menselijke geluidsgolven overschrijdt.

Garantie na service

Wij beloven dat alle machines een strenge inspectie door ons ervaren om de beste kwaliteit te verzekeren. Wij zullen onze professionele vaardigheden inzetten om uw probleem aan te pakken.

Ik hoop dat jullie samen met ons op deze reis kunnen gaan.

Als u vragen of andere problemen over onze producten hebt, neem dan gerust contact met ons op zonder aarzeling. We staan altijd aan je zijde.

Made in China