


40K blasting fat R.F multipolar slimming instrument



Part name :

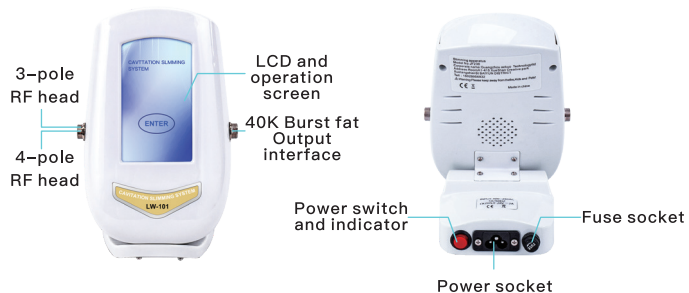

Operating instructions:

1. Connect the handle to the corresponding jack and connect the power cord;
2. Press the power switch, the indicator light and LCD will be on;
3. Click the "enter" key in the LCD (as shown in Figure 1) to enter the operation mode (as shown in Figure 2) and then select the required function;
4. Touch the 40K key to display figure 3, adjust the required mode, working time and working intensity, press the "start" key, the 40K grease blasting head starts to work, and other R.F function selection methods are the same;
5. After use, press the "back" key to return to the interface shown in Figure 1, and then turn off the power supply.



Function and operation principle:

1、40KHZ Fat blasting head

The 4000Hz sound wave emitted by the explosive head with strong sound wave can make the fat cells of human body produce a strong impact after entering the human body, which can effectively consume heat, water and burst the fat cells, reduce the fat cells and achieve the effect of removing fat.

Main efficacy

- a. Lose weight in whole or in part;
- b. Increase the speed of metabolism, strengthen the elimination of waste and moisture;
- c. Repair of stria gravidarum;
- d. Relax muscle, relieve muscle spasm, relieve muscle pain symptoms;
- e. Tighten the muscles of arms, feet, thighs, buttocks, back and abdomen to reshape the body;
- f. It can effectively improve the orange skin of buttocks and thighs, and solve the problem of postpartum abdominal relaxation.

2、4 pole RF head

It can dissolve fat, detoxify lymph, tighten skin, enhance skin elasticity, reach fat layer directly, have the function of directional RF output, accelerate the movement of fat cells to generate heat energy, and discharge the excess fat and toxin in the body out of the body through sweat glands, liver intestine circulation and lymph circulation, so as to dissolve fat.

3、3 pole RF head

When it acts on the skin, it can heat the collagen fiber of the dermis to 45–65 degrees, the collagen fiber will contract immediately, and the loose skin wrinkles will be tightened. At the same time, the stimulated collagen hyperplasia of the dermis will increase the thickness and density of the dermis, so as to remove wrinkles, cut scars, restore the elasticity and luster of the skin to achieve the purpose of tightening and removing wrinkles.

Scope of application:

- a. Arms, calves, thighs, arms, back, abdomen and other parts;
- b. It can improve and treat the adipose tissue in various conditions;
- c. Shushou, decompression and Shushou pain (such as arthralgia and sciatica) can promote the mechanical aerobic movement of skin tissue, relieve the pressure quickly and eliminate fatigue;
- d. Enhance and tighten skin, restore skin elasticity;
- e. Activate cell circulation, promote metabolism, produce more collagen and elastic fiber, improve skin tissue of face and body;


Operation method:

For example: for the operation of body parts (excluding the face), use the fat blasting head and RF head, and operate in the following order: Before operation, clean the skin first, use the essential oil or gel to smear evenly on the skin surface, then massage.

Using Guidance


Thigh

- (1) From bottom to top, push to groin to dredge lymph;
- (2) Turning anticlockwise from bottom to top can help break down fat;
- (3) Decompose greasy by pushing back and forth;
- (4) Pull down from the knee to the groin to improve the curve.

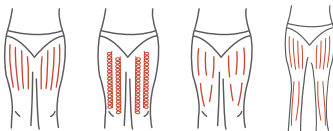


Hips

- (1) Pull to the waist in the direction of lymph;
- (2) Circle anticlockwise from bottom to top and move back and forth;
- (3) According to the muscle texture, it can slide and compact the buttock skin, making the buttock plump and firm, presenting the perfect curve.

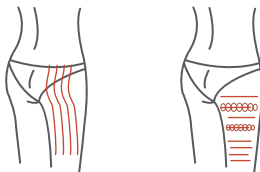


Back

- (1) Push back and forth 2–3 times;
- (2) Circle anticlockwise to stimulate the lymph nodes;
- (3) On the back, turn anticlockwise and move up and down to help break down fat;
- (4) Using lymphatic drainage technique to pull toxin to lymph nodes can help improve back curve.

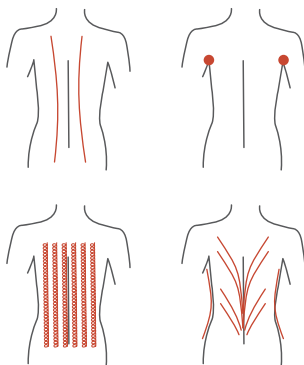


Arm

- (1) From the inner elbow to the armpit, do lymphatic drainage;
- (2) To stimulate lymph nodes in a circle;
- (3) Break down excess fat by turning it anticlockwise or pushing it back and forth;
- (4) Tighten skin from elbow to armpit.

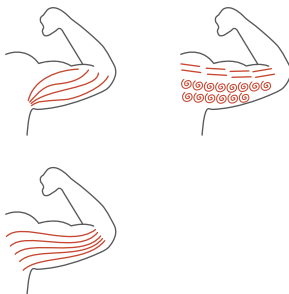


Abdomen

- (1) Around the navel from small to large, clockwise circle to help large intestine peristalsis;
- (2) From the small circle to the large circle, push it anticlockwise.

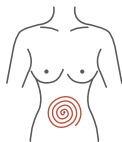

Face

- (1) Evenly apply the product on the face, use the face RF head, operate from the bottom to the top to lift the face, make the skin in a tense state, it is recommended to use for 5 minutes;
- (2) Apply the product evenly to the face, use the RF head on the face, operate in the direction of the arrow, it is recommended to use it for 5–8 minutes.

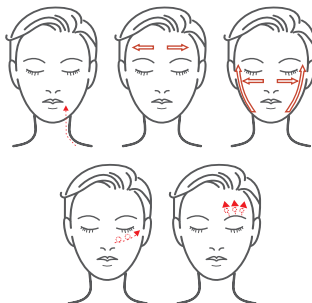

Unsuitable people :

1. If there is a wound on the skin, avoid the wound or not;
2. Those suffering from leprosy are forbidden to do so;
3. It is forbidden for patients with heart disease (such as arrhythmia), especially those with pacemaker;
4. Cancer, cancer patients are forbidden to do;
5. Patients with acute heart phlegm or infectious diseases are forbidden to do so;
6. Pregnant women, breast-feeding women, forbidden to do during menstruation;
7. Serious diseases, such as heart disease, gastric ulcer, severe gastric disease, duodenal ulcer, hypertension, abdominal operation less than three months, diabetes, etc;
8. Metal and silica gel are forbidden in vivo;
9. During operation, the handle must be 90 degrees vertical to the skin to avoid discomfort to the guest;
10. Before starting the operation, first contact the probe to the skin vertically, then turn on the host switch, adjust the operation mode energy to the minimum, and then adjust the intensity according to the customer's skin bearing capacity;

Precautions for use :

- 1, first clean the skin, then use a special gel or weight loss essential oil.
2. There must be water medium (such as essential oil, etc.) in the treatment, otherwise it will cause certain loss to the instrument;
3. The operation head does not stay in one place for a long time, avoiding places with bones;
4. Do not use disinfectant product to disinfect, suggest to use wet cotton or towel;
5. The operator and the person receiving the treatment take off the metal decorations on the body;
6. If the machine is used continuously for 1 hour, please stop for 10 minutes, and then use it again;
7. Tinnitus may occur to some of the guests when using the fat blasting head, which is a normal phenomenon, because this wave band has exceeded the range of human acoustic wave.

Made in China

40K sabbiatura grasso R.F strumento dimagrante multipolare



Nome della parte:



40K Testa di granigliatura grassa



Testa RF a 3 poli



Testa RF a 4 poli

Istruzioni per l'uso:

1. Collegare la maniglia alla presa corrispondente e collegare il cavo di alimentazione;
2. Premere l'interruttore di alimentazione, la spia e LCD saranno accesi;
3. Fare clic sul tasto "enter" nel LCD (come mostrato in Figura 1) per entrare nella modalità operativa (come mostrato in Figura 2) e quindi selezionare la funzione richiesta;
4. Toccare il tasto 40K per visualizzare la figura 3, regolare la modalità richiesta, l'orario di lavoro e l'intensità di lavoro, premere il tasto "start", la testa di sabbatura 40K inizia a funzionare e altri metodi di selezione della funzione R.F sono gli stessi;
5. Dopo l'uso, premere il tasto "indietro" per tornare all'interfaccia mostrata in Figura 1, quindi spegnere l'alimentazione elettrica.



Funzionamento e principio di funzionamento:

1,40KHZ Testa di granigliatura grassa

L'onda sonora 4000Hz emessa dalla testa esplosiva con forte onda sonora può far sì che le cellule grasse del corpo umano producano un forte impatto dopo l'ingresso nel corpo umano, che può efficacemente consumare calore, acqua e scoppiare le cellule grasse, ridurre le cellule grasse e raggiungere l'effetto di rimozione del grasso.

Efficacia principale

- a. perdere peso in tutto o in parte;
- b. aumentare la velocità del metabolismo, rafforzare l'eliminazione di rifiuti e umidità;
- c. Riparazione della stria gravidarum;
- d. Rilassare il muscolo, alleviare lo spasmo muscolare, alleviare i sintomi del dolore muscolare;
- e. Stringere i muscoli di braccia, piedi, cosce, glutei, schiena e addome per rimodellare il corpo;
- f. Può migliorare efficacemente la pelle arancione di glutei e cosce e risolvere il problema del rilassamento addominale post parto.

2、Testa RF a 4 poli

Può sciogliere il grasso, disintossicare la linfa, stringere la pelle, migliorare l'elasticità della pelle, raggiungere direttamente lo strato grasso, avere la funzione di uscita RF direzionale, accelerare il movimento delle cellule grasse per generare energia termica e scaricare il grasso in eccesso e la tossina nel corpo fuori dal corpo attraverso le ghiandole sudoripare, la circolazione intestinale del fegato e la circolazione linfatica, in modo da sciogliere il grasso.

3、Testa RF a 3 poli

Quando agisce sulla pelle, può riscaldare la fibra di collagene del derma a 45–65 gradi, la fibra di collagene si contrarrà immediatamente e le rughe allentate della pelle saranno strette. Allo stesso tempo, l'iperplasia stimolata del collagene del derma aumenterà lo spessore e la densità del derma, in modo da rimuovere le rughe, tagliare le cicatrici, ripristinare l'elasticità e la lucentezza della pelle per raggiungere lo scopo di stringere e rimuovere le rughe.

Campo di applicazione:

- a. braccia, polpacci, cosce, braccia, schiena, addome e altre parti;
- b. Può migliorare e trattare il tessuto adiposo in varie condizioni;
- c. Shushou, decompressione e dolore Shushou (come artralgia e sciatica) possono promuovere il movimento aerobico meccanico del tessuto cutaneo, alleviare la pressione rapidamente ed eliminare la fatica;
- d. Migliorare e stringere la pelle, ripristinare l'elasticità della pelle;
- e. Attivare la circolazione cellulare, promuovere il metabolismo, produrre più collagene e fibra elastica, migliorare il tessuto della pelle del viso e del corpo;


Metodo operativo:

Ad esempio: per il funzionamento delle parti del corpo (escluso il viso), utilizzare la testa di granigliatura grassa e la testa RF e operare nel seguente ordine: Prima dell'operazione, pulire prima la pelle, utilizzare l'olio essenziale o il gel per strisciare uniformemente sulla superficie della pelle, quindi massaggiare.

Uso della guida


Coscia

- (1) dal basso verso l'alto, spingere all'inguine per dragare linfa;
- (2) Girare in senso antiorario dal basso verso l'alto può aiutare a rompere il grasso;
- (3) Decomporre grasso spingendo avanti e indietro;
- (4) Tirare giù dal ginocchio all'inguine per migliorare la curva.

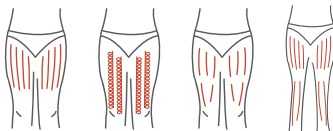


Hips

- (1) Tirare alla vita in direzione della linfa;
- (2) Cerchio antiorario dal basso verso l'alto e muoversi avanti e indietro;
- (3) Secondo la struttura muscolare, può far scorrere e compattare la pelle del gluteo, rendendo il gluteo corposo e sodo, presentando la curva perfetta.

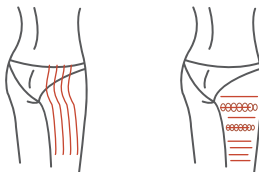


Indietro

- (1) Spingere avanti e indietro 2-3 volte;
- (2) Cerchio in senso antiorario per stimolare i linfonodi;
- (3) sulla schiena, girare in senso antiorario e muoversi su e giù per aiutare a rompere il grasso;
- (4) Utilizzando la tecnica di drenaggio linfatico per tirare la tossina ai linfonodi può aiutare a migliorare la curva della schiena.

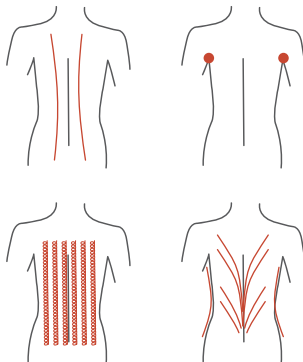


Braccio

- (1) dal gomito interno all'ascella, fare drenaggio linfatico;
- (2) Per stimolare i linfonodi in cerchio;
- (3) abbattere il grasso in eccesso girandolo in senso antiorario o spingendolo avanti e indietro;
- (4) Stringa la pelle dal gomito all'ascella.

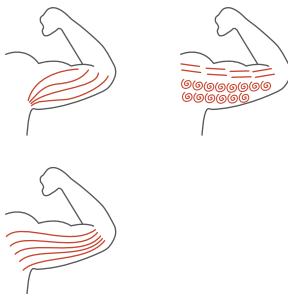


Addome

- (1) Intorno all'ombelico da piccolo a grande, cerchio in senso orario per aiutare la peristalsi dell'intestino crasso;
- (2) Dal piccolo cerchio al grande cerchio, spingilo in senso antiorario.

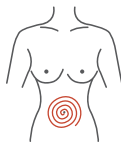

Faccia

- (1) Applicare uniformemente il prodotto sul viso, utilizzare la testa RF del fronte, operare dal basso altop per sollevare il viso, rendere la pelle in uno stato teso, si consiglia di utilizzare per 5 minuti;
- (2) Applicare il prodotto uniformemente sul viso, utilizzare la testa RF sul viso, operare nella direzione della freccia, si consiglia di usarlo per 5–8 minuti.

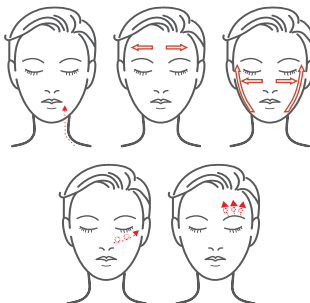

Persone inadatte:

1. Se c'è una ferita sulla pelle, evitare la ferita o no;
2. A chi soffre di lebbra è proibito farlo;
3. È vietato ai pazienti con malattie cardiache (come aritmia), in particolare quelli con pacemaker;
4. Cancro, pazienti di cancro sono vietati a fare;
5. Ai pazienti con flemma cardiaco acuto o malattie infettive è vietato farlo;
6. donne incinte, donne che allattano, vietato fare durante le mestruazioni;
7. malattie gravi, quali malattie cardiache, ulcera gastrica, malattia gastrica grave, ulcera duodenale, ipertensione, operazione addominale meno di tre mesi, diabete, ecc;
8. Metallo e gel di silice sono vietati in vivo;
9. durante il funzionamento, la maniglia deve essere verticale di 90 gradi alla pelle per evitare disagio per l'ospite;
10. prima di iniziare l'operazione, prima di contattare la sonda alla pelle verticalmente, quindi accendere l'interruttore host, regolare l'energia della modalità di funzionamento al minimo e quindi regolare l'intensità secondo la capacità portante della pelle del cliente;

Precauzioni per l'uso:


1. prima pulire la pelle, quindi utilizzare un gel speciale o olio essenziale di perdita di peso.
2. Ci deve essere acqua media (come olio essenziale, ecc.) nel trattamento, altrimenti causerà una certa perdita allo strumento;
3. la testa dell'operazione non rimane in un posto per molto tempo, evitando luoghi con ossa;
4. non utilizzare il prodotto disinfettante per disinfettare, suggerire di utilizzare cotone bagnato o asciugamano;
5. l'operatore e la persona che riceve il trattamento tolgono le decorazioni metalliche sul corpo;
6. se la macchina viene utilizzata continuamente per 1 ora, si prega di fermarsi per 10 minuti e quindi usarlo di nuovo;
7. l'acufene può verificarsi ad alcuni degli ospiti quando si utilizza la testa di granigliatura grassa, che è un fenomeno normale, perché questa banda d'onda ha superato la gamma dell'onda acustica umana.

Made in China

40k Blast fat r.f minceur multipolaire



Nom du composant:

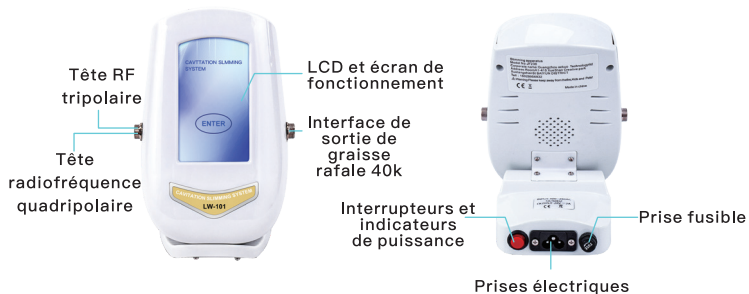

40k grosse
tête de dynamitage



Tête RF
tripolaire



Tête
radiofréquence
quadripolaire

Instructions de fonctionnement:

1. Connectez la poignée à la prise correspondante et connectez le cordon d'alimentation;
2. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation, le voyant et l'affichage à cristaux liquides sont allumés;
3. Appuyez sur la touche "entrée" dans l'écran LCD (comme le montre la figure 1) pour passer en mode de fonctionnement (comme le montre la figure 2), puis sélectionnez la fonction souhaitée;
4. Touchez la touche 40k pour afficher la figure 3, Ajustez le mode requis, le temps de travail et l'intensité de travail, appuyez sur la touche "start", la tête de pulvérisation de graisse 40k commence à fonctionner, les autres méthodes de sélection de fonction r.f sont les mêmes;
- 5, une fois que vous avez terminé d'utiliser, appuyez sur la touche "retour" pour revenir à l'interface comme le montre la figure 1, puis éteignez l'alimentation.



Fonction et principe de fonctionnement:

1, 40khz fat tête d'explosion

Les ondes sonores 4000hz des cheveux explosifs, avec des ondes sonores fortes, peuvent faire des cellules graisseuses du corps humain dans le corps humain après avoir produit une forte force d'impact, peuvent brûler efficacement des calories, de l'eau, faire éclater les cellules graisseuses, réduire les cellules graisseuses, atteindre l'effet d'élimination des graisses.

Efficacité principale

- A. perte de poids totale ou partielle;
- B. augmenter la vitesse du métabolisme et renforcer l'élimination des déchets et de l'humidité;
- C. réparation des vergetures;
- D. détendre les muscles, soulager les spasmes musculaires et soulager les symptômes de la douleur musculaire;
- E. resserrer les muscles des bras, des pieds, des cuisses, des hanches, du dos et de l'abdomen et remodeler le corps;
- F. peut améliorer efficacement la peau orange des hanches et des cuisses, résoudre le problème du relâchement abdominal post – partum.

2、Tête radiofréquence quadripolaire

Il peut dissoudre la graisse, détoxifier la lymphe, raffermir la peau, améliorer l'élasticité de la peau, aller directement à la couche de graisse, a la fonction de sortie RF dirigée, accélérer le Mouvement des cellules adipeuses pour produire de l'énergie thermique, éliminer l'excès de graisse et les toxines du corps hors du corps par les glandes sudoripares, la circulation hépatique et intestinale et la circulation lymphatique, dissolvant ainsi la graisse.

3、Tête RF tripolaire

Lorsqu'il agit sur la peau, les fibres de collagène de la couche dermique peuvent être chauffées à 45 – 65 degrés, les fibres de collagène se contractent instantanément et les rides de la peau flasque se resserrent. Dans le même temps, l'hyperplasie de collagène qui stimule le derme augmente l'épaisseur et la densité du derme, ce qui élimine les rides, réduit les cicatrices et restaure l'élasticité et l'éclat de la peau dans le but de raffermir et d'éliminer les rides.

Champ d'application:

- A. parties des bras, mollets, cuisses, bras, dos, abdomen, etc.;
- B. peut améliorer et traiter le tissu adipeux dans diverses conditions;
- C. la relaxation, la décompression, le soulagement de la douleur (par exemple, arthralgie, sciatique) peuvent favoriser l'exercice aérobie mécanique des tissus cutanés, soulager rapidement le stress et éliminer la fatigue;
- D. renforce la peau ferme et restaure l'élasticité de la peau;
- E. activer la circulation cellulaire, stimuler le métabolisme, produire plus de collagène et d'élasthane, améliorer le tissu cutané du visage et du corps;


Méthode de fonctionnement:

Par exemple: pour la manipulation des parties du corps (à l'exclusion du visage), utilisez une tête de projection de graisse et une tête RF, dans l'ordre suivant: nettoyez d'abord la peau avant l'opération, appliquez uniformément sur la surface de la peau avec des huiles essentielles ou des gels, puis massez.

Guide d'utilisation


Cuisses

(1) de bas en haut, en poussant vers la lymphatique débouchante inguinale; (2) rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de bas en haut peut aider à décomposer la graisse; (3) décomposer le gras en poussant d'avant en arrière; (4) tirez vers le bas du genou à l'aîne pour améliorer la courbe.

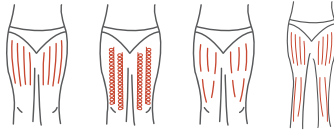


Les hanches

(1) tirer dans la direction lymphatique vers la taille; (2) rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de bas en haut, mouvement d'avant en arrière; (3) selon la texture musculaire, faites glisser la peau de la hanche ferme pour que la hanche soit repulpée et ferme et présente une courbe parfaite.

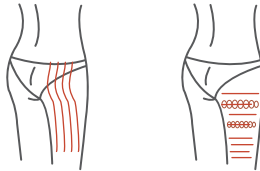


< retour

(1) Pousser avant et arrière 2 – 3 fois; (2) rotation dans le sens antihoraire pour stimuler les ganglions lymphatiques; (3) le dos tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, se déplace de haut en bas, aide à décomposer la graisse; (4) l'utilisation de la technique de drainage lymphatique pour drainer les toxines vers les ganglions lymphatiques peut aider à améliorer la courbe du dos.

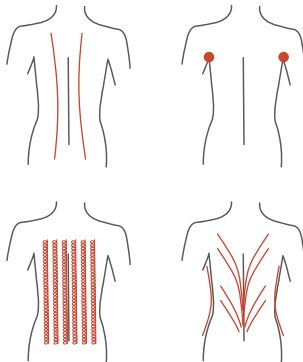


Bras

- (1) de l'intérieur du coude à l'aisselle, faire le drainage lymphatique;
- (2) Stimuler les ganglions lymphatiques pour former un cercle;
- (3) décomposer l'excès de graisse en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou en poussant vers l'avant et vers l'arrière;
- (4) serrer la peau des coudes aux aisselles.

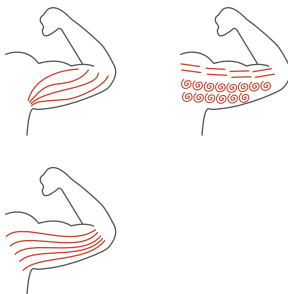


L'abdomen

- (1) autour du nombril est petit à grand, enroulé dans le sens des aiguilles d'une montre pour aider le péristaltisme du gros intestin;
- (2) de petit à grand cercle, pousser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

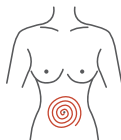

Face à face

- (1) appliquez le produit uniformément sur le visage, utilisez la tête RF du visage, travaillez de bas en haut, tirez le visage, laissez la peau dans un état de tension, il est recommandé de l'utiliser pendant 5 minutes;
- (2) appliquez le produit uniformément sur le visage, utilisez la tête RF sur le visage, utilisez la direction de la flèche, il est recommandé d'utiliser 5 – 8 minutes.

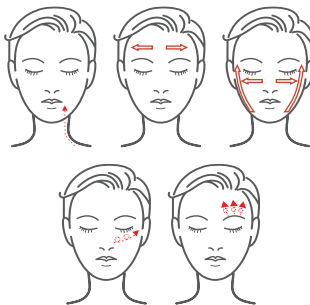

Personnes qui ne conviennent pas:

1. Si vous avez une plaie sur la peau, évitez – la ou non;
2. Interdiction de la lèpre chez les personnes touchées par la lèpre;
3. Contre – indiqué chez les patients atteints de maladies cardiaques (telles que les arythmies cardiaques), en particulier ceux avec un stimulateur cardiaque;
4. Le cancer, les patients atteints de cancer sont interdits de le faire;
5. Patients souffrant d'expectorations cardiaques aiguës ou de maladies infectieuses, l'utilisation est interdite;
6. Femmes enceintes et allaitantes, il est interdit de le faire pendant la menstruation;
7. Maladies graves telles que les maladies cardiaques, les ulcères d'estomac, les maladies gastriques graves, les ulcères duodénaux, l'hypertension artérielle, la chirurgie abdominale dans les trois mois, le diabète, etc.;
8. Le métal et le gel de silice sont interdits dans le corps;
9. Lors de l'opération, la poignée doit être perpendiculaire à la peau à 90 degrés, afin que les invités ne se sentent pas mal à l'aise;
10. Avant de commencer l'opération, la sonde est d'abord en contact vertical avec la peau, puis l'interrupteur principal est activé, l'énergie du mode de fonctionnement est ajustée au minimum, puis l'intensité est ajustée en fonction de la tolérance de la peau du client;

Précautions d'utilisation:

- 1, nettoyez d'abord la peau, puis utilisez un gel spécial ou une huile essentielle de perte de poids.
2. Il doit y avoir un milieu aqueux (comme les huiles essentielles, etc.) dans le traitement, sinon il causera une certaine perte à l'instrument;
3. La tête chirurgicale ne reste pas longtemps au même endroit, évitez les endroits avec des os;
4. N'utilisez pas de produits désinfectants pour la désinfection, il est recommandé d'utiliser du coton humide ou une serviette;
5. L'opérateur et la personne traitée retirent les ornements métalliques du corps;
6. Si la machine est utilisée en continu pendant 1 heure, veuillez arrêter de l'utiliser pendant 10 minutes avant de l'utiliser à nouveau;
7. Certains invités peuvent avoir des acouphènes lors de l'utilisation de têtes d'engrais frites, ce qui est un phénomène normal, car cette bande a dépassé la portée des ondes sonores humaines.

Made in China

40K Strahlen Fett R.F multipolar Abnehmen Instrument



Teilename:



40K
Fettstrahlkopf



3-poliger
HF-Kopf



4-poliger
HF-Kopf

Bedienungsanleitung:

1. Verbinden Sie den Griff mit der entsprechenden Buchse und schließen Sie das Netzkabel an;
2. Drücken Sie den Netzschalter, die Anzeigeleuchte und das LCD sind eingeschaltet;
3. Klicken Sie auf die "Enter"-Taste auf dem LCD (wie in Abbildung 1 gezeigt), um in den Betriebsmodus (wie in Abbildung 2) zu gelangen und wählen Sie dann die gewünschte Funktion aus;
4. Berühren Sie die 40K-Taste, um Abbildung 3 anzuzeigen, stellen Sie den erforderlichen Modus, die Arbeitszeit und die Arbeitsintensität ein, drücken Sie die "Start"-Taste, der 40K-Fettstrahlkopf beginnt zu arbeiten, und andere R.F-Funktionsauswahlmethoden sind die gleichen;
5. Drücken Sie nach dem Gebrauch die "Zurück"-Taste, um zur in Abbildung 1 gezeigten Schnittstelle zurückzukehren, und schalten Sie dann das Netzteil aus.



Funktions- und Funktionsprinzip:

1、40KHZ Fett Sprengkopf

Die 4000Hz Schallwelle, die vom explosiven Kopf mit starker Schallwelle emittiert wird, kann die Fettzellen des menschlichen Körpers einen starken Einfluss nach dem Eintritt in den menschlichen Körper erzeugen lassen, der effektiv Wärme, Wasser verbrauchen und die Fettzellen platzen kann, die Fettzellen reduzieren und den Effekt der Fettentfernung erzielen kann.

Hauptwirksamkeit

- a. ganz oder teilweise abnehmen;
- b. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit des Stoffwechsels, stärken Sie die Beseitigung von Abfall und Feuchtigkeit;
- c. Reparatur von Stria gravidarum;
- d. Muskel entspannen, Muskelkrämpfe lindern, Muskelschmerzsymptome lindern;
- e. Straffen Sie die Muskeln der Arme, Füße, Oberschenkel, Gesäß, Rücken und Bauch, um den Körper umzuformen;
- f. Es kann die orangefarbene Haut von Gesäß und Oberschenkeln effektiv verbessern und das Problem der postpartalen Bauchentspannung lösen.

2、4-poliger HF-Kopf

Es kann Fett auflösen, Lymphe entgiften, Haut straffen, Hautelastizität erhöhen, Fettschicht direkt erreichen, die Funktion der gerichteten RF-Ausgabe haben, die Bewegung von Fettzellen beschleunigen, Wärmeenergie zu erzeugen, und das überschüssige Fett und Toxin im Körper aus dem Körper durch Schweißdrüsen, Leberdarmzirkulation und Lymphzirkulation entladen, um Fett aufzulösen.

3、3-poliger HF-Kopf

Wenn es auf die Haut wirkt, kann es die Kollagenfaser der Dermis auf 45–65 Grad erhitzen, die Kollagenfaser zieht sich sofort zusammen und die losen Hautfalten werden gestrafft. Gleichzeitig erhöht die stimulierte Kollagen Hyperplasie der Dermis die Dicke und Dichte der Dermis, um Falten zu entfernen, Narben zu schneiden, die Elastizität und den Glanz der Haut wiederherzustellen, um den Zweck der Straffung und Entfernung von Falten zu erreichen.

Anwendungsbereich:

- a. Arme, Waden, Oberschenkel, Arme, Rücken, Bauch und andere Teile;
- b. Es kann das Fettgewebe unter verschiedenen Bedingungen verbessern und behandeln;
- c. Shushou, Dekompression und Shushou Schmerzen (wie Arthralgie und Ischias) können die mechanische aerobe Bewegung des Hautgewebes fördern, den Druck schnell entlasten und Müdigkeit beseitigen;
- d. Haut verbessern und straffen, Hautelastizität wiederherstellen;
- e. Zellzirkulation aktivieren, Stoffwechsel fördern, mehr Kollagen und elastische Fasern produzieren, Hautgewebe von Gesicht und Körper verbessern;


Arbeitsweise:

Zum Beispiel: für die Operation von Körperteilen (außer dem Gesicht), verwenden Sie den Fettstrahlkopf und den HF-Kopf und arbeiten Sie in der folgenden Reihenfolge: Reinigen Sie die Haut zuerst, verwenden Sie das ätherische Öl oder Gel, um gleichmäßig auf die Hautoberfläche zu schmieren, dann massieren Sie.

Verwendung von Leitlinien


Oberschenkel

- (1) Von unten nach oben, drücken Sie zur Leiste, um Lymphe auszubaggern;
- (2) Drehen gegen den Uhrzeigersinn von unten nach oben kann helfen, Fett abzubauen;
- (3) Fettig abbauen, indem man hin und her drückt;
- (4) Ziehen Sie vom Knie zur Leiste, um die Kurve zu verbessern.

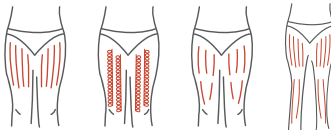


Hüften

- (1) Ziehen Sie zur Taille in Richtung Lymphe;
- (2) Kreisen Sie gegen den Uhrzeigersinn von unten nach oben und bewegen Sie sich hin und her;
- (3) Entsprechend der Muskelbeschaffenheit kann es die Gesäßhaut gleiten und verdichten, wodurch das Gesäß prall und fest wird und die perfekte Kurve präsentiert wird.

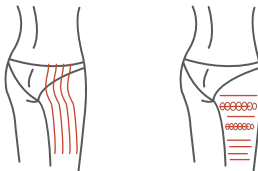


Zurück

- (1) 2–3 Mal hin und her drücken;
- (2) Kreise gegen den Uhrzeigersinn, um die Lymphknoten zu stimulieren;
- (3) Drehen Sie sich auf dem Rücken gegen den Uhrzeigersinn und bewegen Sie sich auf und ab, um Fett abzubauen;
- (4) Die Verwendung von Lymphdrainagetechnik, um Toxin zu Lymphknoten zu ziehen, kann helfen, die Rückenkurve zu verbessern.

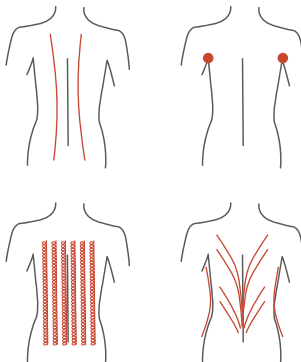


Arm

- (1) Vom inneren Ellbogen bis zur Achselhöhle Lymphdrainage durchführen;
- (2) Lymphknoten im Kreis zu stimulieren;
- (3) Brechen Sie überschüssiges Fett ab, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen oder hin und her drücken;
- (4) Spannen Sie die Haut vom Ellbogen bis zur Achselhöhle.

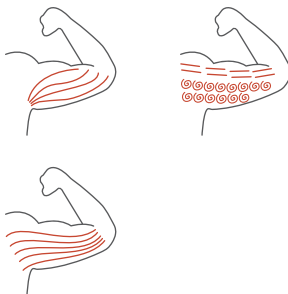


Bauch

- (1) Rund um den Nabel von klein nach groß, im Uhrzeigersinn, um die Dickdarmperistaltik zu unterstützen;
- (2) Vom kleinen zum großen Kreis drücken Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.

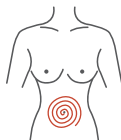

Gesicht

- (1) Tragen Sie das Produkt gleichmäßig auf das Gesicht auf, verwenden Sie den Gesicht RF Kopf, arbeiten Sie von unten nach oben, um das Gesicht anzuheben, machen Sie die Haut in einem angespannten Zustand, es wird empfohlen, für fünf Minuten zu verwenden;
- (2) Tragen Sie das Produkt gleichmäßig auf das Gesicht auf, verwenden Sie den RF-Kopf auf dem Gesicht, arbeiten Sie in Richtung des Pfeils, es wird empfohlen, es für 5–8 Minuten zu verwenden.

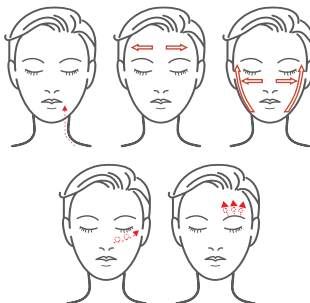

Ungeeignete Menschen:

1. Wenn es eine Wunde auf der Haut gibt, vermeiden Sie die Wunde oder nicht;
2. Diejenigen, die an Aussatz leiden, ist es verboten, dies zu tun;
3. Es ist verboten für Patienten mit Herzerkrankungen (wie Arrhythmie), insbesondere diejenigen mit Herzschrittmacher;
4. Krebs, Krebspatienten sind verboten zu tun;
5. Patienten mit akutem Herzschmerz oder Infektionskrankheiten sind verboten, dies zu tun;
6. Schwangere Frauen, stillende Frauen, verboten während der Menstruation zu tun;
7. Schwere Krankheiten, wie Herzerkrankung, Magengeschwür, schwere Magenkrankung, Zwölffingerdarmgeschwür, Hypertonie, Bauchoperation weniger als drei Monate, Diabetes usw.;
8. Metall und Kieselgel sind in vivo verboten;
9. Während des Betriebs muss der Griff 90° senkrecht zur Haut sein, um Beschwerden für den Gast zu vermeiden;
10. Bevor Sie den Betrieb beginnen, kontaktieren Sie zuerst die Sonde vertikal zur Haut, schalten Sie dann den Hostschalter ein, stellen Sie die Betriebsmodus-Energie auf das Minimum ein und stellen Sie dann die Intensität entsprechend der Hauttragfähigkeit des Kunden ein;

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

- 1, reinigen Sie zuerst die Haut, dann verwenden Sie ein spezielles Gel oder Gewichtsverlust ätherisches Öl.
2. Es muss Wassermedium (wie ätherisches Öl usw.) in der Behandlung sein, sonst verursacht es einen bestimmten Verlust für das Instrument;
3. Der Operationskopf bleibt nicht lange an einem Ort und vermeidet Orte mit Knochen;
4. Verwenden Sie kein Desinfektionsmittel zur Desinfektion, schlagen Sie vor, nasse Baumwolle oder Handtuch zu verwenden;
5. Der Bediener und die Person, die die Behandlung erhält, nehmen die Metalldekorationen auf dem Körper ab;
6. Wenn die Maschine ununterbrochen für eine Stunde verwendet wird, halten Sie bitte für zehn Minuten an und verwenden Sie sie dann erneut;
7. Tinnitus kann bei einigen Gästen auftreten, wenn der Fettblasenkopf verwendet wird, was ein normales Phänomen ist, weil dieses Wellenband den Bereich der menschlichen akustischen Welle überschritten hat.

Made in China

Medidor de adelgazamiento multipolar R.F. de grasa explosiva de 40k



Nombre de la pieza:



Cabeza de explosión
de grasa de 40k



Cabeza de RF
de 3 polos



Cabeza de RF
de 4 polos

Instrucciones de operación:

1. conecte el mango al enchufe correspondiente y conecte el cable de alimentación;
2. Presione el interruptor de alimentación y se encenderán el indicador y el lcd;
3. haga clic en el botón "entrar" en el LCD (como se muestra en la figura 1) para entrar en el modo de operación (como se muestra en la figura 2) y luego seleccione la función deseada;
4. toque la tecla 40k para mostrar la figura 3, ajuste el modo necesario, el tiempo de trabajo y la intensidad de trabajo, presione la tecla "inicio", la cabeza de chorro de arena 40k comienza a funcionar, y el método de selección de otras funciones r.f es el mismo;
5. después de usarlo, Presione el botón "volver" para volver a la interfaz mostrada en la figura 1, y luego apague la fuente de alimentación.



Función y principio de funcionamiento:

1. cabeza de explosión de grasa de 40 kHz

Las ondas sonoras de 4000hz que salen del cabello explosivo tienen ondas sonoras muy fuertes, lo que puede hacer que las células grasas del cuerpo produzcan un fuerte impacto después de entrar en el cuerpo humano, puede consumir eficazmente calorías, agua y células grasas explosivas, reducir las células grasas y lograr el efecto de perder peso.

Eficacia principal

1. perder peso total o parcialmente;
2. aumentar la velocidad metabólica y fortalecer la eliminación de residuos y agua;
3. reparación de estrías;
4. relajar los músculos, aliviar los espasmos musculares y aliviar los síntomas del dolor muscular;
5. apretar los músculos de los brazos, pies, muslos, caderas, espalda y abdomen y remodelar el cuerpo;
6. puede mejorar efectivamente la piel naranja de las caderas y los muslos y resolver el problema de la relajación abdominal posparto.

2、 Cabeza de radiofrecuencia de 4 polos

Puede disolver la grasa, desintoxicar la linfa, endurecer la piel, aumentar la elasticidad de la piel, llegar directamente a la capa de grasa, tener la función de dirigir la salida de radiofrecuencia, acelerar el Movimiento de las células grasas para generar energía térmica y expulsar el exceso de grasa y toxinas del cuerpo del cuerpo a través de las glándulas sudoríparas, la circulación hepatointestinal y la circulación linfática, disolviendo así la grasa.

3、 Cabeza de radiofrecuencia de 3 polos

Cuando actúa sobre la piel, puede calentar las fibras de colágeno de la dermis a 45 – 65 grados, que se contraen inmediatamente y las arrugas relajadas de la piel se endurecen. Al mismo tiempo, estimular la hiperplasia de colágeno de la dermis aumenta el espesor y la densidad de la dermis, eliminando así las arrugas, cortando las cicatrices y restaurando la elasticidad y el brillo de la piel para lograr el propósito de endurecer y eliminar las arrugas.

ámbito de aplicación:

1. brazos, pantorrillas, muslos, brazos, espalda, abdomen y otras partes;
2. puede mejorar y tratar el tejido adiposo en diversas situaciones;
3. el alivio de las manos, la descompresión y el dolor de manos (como la artritis y la ciática) pueden promover el ejercicio aeróbico mecánico de los tejidos de la piel, aliviar rápidamente el estrés y eliminar la fatiga;
4. fortalecer la piel compacta y restaurar la elasticidad de la piel;
5. activar la circulación celular, promover el metabolismo, producir más colágeno y fibras elásticas y mejorar el tejido cutáneo de la cara y el cuerpo;


Método de operación:

Por ejemplo: para el manejo de partes del cuerpo (excepto la cara), use una cabeza de chorro de grasa y una cabeza de radiofrecuencia, y opere en el siguiente orden: antes de la operación, limpie la piel y aplique uniformemente sobre la superficie de la piel con aceite esencial o gel, y luego masajee.

Orientación sobre el uso


Muslo

- (1) de abajo hacia arriba, empuje la ingle para desbloquear la linfa;
- (2) girar en sentido contrario a las agujas del reloj de abajo a arriba puede ayudar a descomponer la grasa;
- (3) descomponer la grasa empujando de ida y vuelta;
- (4) tire hacia abajo de la rodilla hasta la ingle para mejorar la curva.

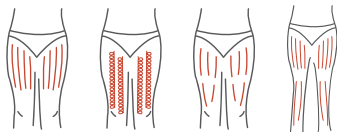


Caderas

- (1) tire hacia la cintura en la dirección de la linfa;
- (2) girar de abajo hacia arriba en sentido contrario a las agujas del reloj y moverse hacia adelante y hacia atrás;
- (3) dependiendo de la textura muscular, puede deslizarse y comprimir la piel de la cadera, haciendo que la cadera esté llena y apretada, mostrando una curva perfecta.

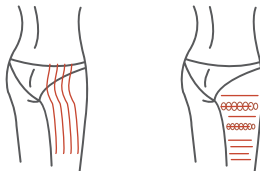


< regreso

- (1) empujar de ida y vuelta 2 – 3 veces;
- (2) girar en sentido contrario a las agujas del reloj para estimular los ganglios linfáticos;
- (3) en la espalda, girar en sentido contrario a las agujas del reloj y moverse hacia arriba y hacia abajo para ayudar a descomponer la grasa;
- (4) el uso de técnicas de drenaje linfático para atraer toxinas a los ganglios linfáticos puede ayudar a mejorar la curva de la espalda.

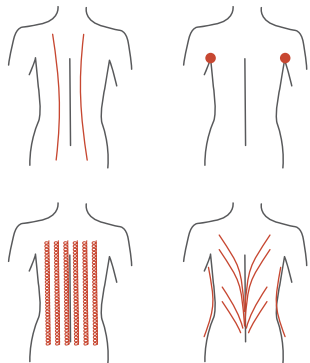


Brazo

- (1) hacer drenaje linfático desde el interior del codo hasta la axila;
- (2) estimular los ganglios linfáticos para que sean redondos;
- (3) descomponer el exceso de grasa girando en sentido contrario a las agujas del reloj o empujando de ida y vuelta;
- (4) endurecer la piel desde el codo hasta la axila.

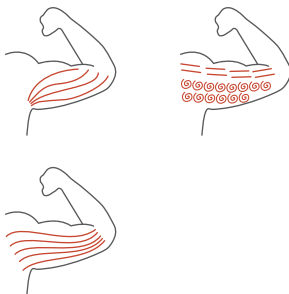


Abdomen

- (1) alrededor del ombligo, de pequeño a grande, da vueltas en el sentido de las agujas del reloj para ayudar a la motilidad del intestino grueso;
- (2) de un círculo pequeño a un círculo grande, empuje en sentido contrario a las agujas del reloj.

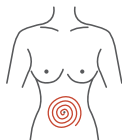

Enfrentar

- (1) aplicar este producto uniformemente sobre la cara, usar la cabeza de radiofrecuencia facial, operar de abajo hacia arriba para levantar la cara, para que la piel esté en tensión, se recomienda usarlo durante 5 minutos;
- (2) aplicar este producto uniformemente sobre la cara, alinear la cara con la cabeza de radiofrecuencia y operar en la dirección de la flecha. se recomienda usarlo durante 5 – 8 minutos.

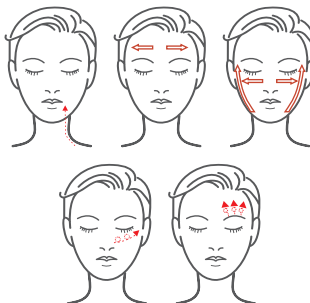

Persona inadecuada:

1. si hay una herida en la piel, evite la herida o no;
2. los pacientes con lepra no deben hacerlo;
3. está prohibido el uso en pacientes con enfermedades cardíacas (como arritmias cardíacas), especialmente en pacientes con marcapasos;
4. está prohibido para los pacientes con cáncer y cáncer;
5. está prohibido hacerlo en pacientes con esputo cardíaco agudo o enfermedades infecciosas;
6. las mujeres embarazadas y lactantes están prohibidas durante la menstruación;
7. enfermedades graves, como enfermedades cardíacas, úlceras gástricas, enfermedades gástricas graves, úlceras duodenales, hipertensión, cirugía abdominal dentro de los tres meses, diabetes, etc.
8. está prohibido el uso de metales y silicona en el cuerpo;
9. al operar, el mango debe ser 90 grados perpendiculares a la piel para evitar que los huéspedes se sientan incómodos;
10. antes de comenzar la operación, primero ponga la sonda en contacto vertical con la piel, luego encienda el interruptor principal, ajuste la energía del modo de operación al mínimo y luego ajuste la intensidad de acuerdo con la resistencia de la piel del cliente;

Precauciones de uso:

1. Primero limpie la piel y luego use gel especial o aceite esencial para adelgazar.
2. debe haber medios de agua (como aceites esenciales, etc.) durante el tratamiento, de lo contrario causará ciertas pérdidas al instrumento;
3. no se quede en un solo lugar durante mucho tiempo y evite lugares con huesos;
4. no use productos de desinfección para la desinfección, se recomienda usar algodón húmedo o toallas;
5. el operador y la persona tratada se quitan los adornos metálicos del cuerpo;
6. si la máquina se usa durante 1 hora consecutiva, Deténgase durante 10 minutos y luego vuelva a usarla;
7. es normal que algunos huéspedes tengan tinnitus al usar cabezas explosivas de grasa, ya que esta banda ha superado ya el rango de ondas sonoras humanas.

Made in China

40K stralend vet R.F multipolair afslankinstrument



Deelnaam:



40K Vetstraalkop



3-polige
RF-kop



4-polige
RF-kop

Gebruiksaanwijzing:

1. Sluit het handvat aan op de overeenkomstige jack en sluit het netsnoer aan;
2. Druk op de stroomschakelaar, het indicatielampje en LCD zullen branden;
3. Klik op de "enter"-toets op het LCD-scherm (zoals weergegeven in figuur 1) om de bedrijfsmodus te openen (zoals weergegeven in figuur 2) en selecteer vervolgens de gewenste functie;
4. Raak de 40K toets aan om figuur 3 weer te geven, pas de vereiste modus, werktijd en werkintensiteit aan, druk op de "start" toets, de 40K vetstraalkop begint te werken, en andere R.F functie selectiemethoden zijn hetzelfde;
5. Druk na gebruik op de "terug"-toets om terug te keren naar de interface weergegeven in Figuur 1 en schakel vervolgens de voeding uit.



Functie- en werkingsprincipe:

1,40KHZ Vet stralend hoofd

De 4000Hz geluidsgolf die door het explosieve hoofd met sterke geluidsgolf wordt uitgestraald, kan ervoor zorgen dat de vetcellen van menselijk lichaam een sterke impact produceren na het binnengaan van het menselijk lichaam, dat effectief warmte, water en de vetcellen kan consumeren, de vetcellen kan verminderen en het effect van het verwijderen van vet kan bereiken.

Belangrijkste werkzaamheid

- a. geheel of gedeeltelijk afvallen;
- b. Verhoog de snelheid van metabolisme, versterk de eliminatie van afval en vocht;
- c. reparatie van stria gravidarum;
- d. Ontspan spier, verlicht spierspasme, verlicht spierpijnsymptomen;
- e. Trek de spieren van armen, voeten, dijen, billen, rug en buik aan om het lichaam opnieuw vorm te geven;
- f. Het kan effectief de oranje huid van billen en dijen verbeteren, en het probleem van postpartum abdominale ontspanning oplossen.

2、4-polige RF-kop

Het kan vet oplossen, lymfe ontgiften, huid aanscherpen, huidelasticiteit verbeteren, vetlaag direct bereiken, de functie van directionele RF-output hebben, de beweging van vetcellen versnellen om warmteenergie te genereren, en het overtollige vet en toxine in het lichaam uit het lichaam door zweetklieren, leverdarmcirculatie en lymfecirculatie lozen, om vet op te lossen.

3、3-polige RF-kop

Wanneer het op de huid inwerkt, kan het de collageenvezel van de dermis verwarmen tot 45-65 graden, zal de collageenvezel onmiddellijk samentrekken en zullen de losse huidrimpels worden aangescherpt. Tegelijkertijd zal de gestimuleerde collagen hyperplasie van de dermis de dikte en dichtheid van de dermis verhogen, om rimpels te verwijderen, littekens te snijden, de elasticiteit en glans van de huid te herstellen om het doel van het aanscherpen en verwijderen van rimpels te bereiken.

Toepassingsgebied:

- Armen, kuiten, dijen, armen, rug, buik en andere delen;
- Het kan het vetweefsel in verschillende omstandigheden verbeteren en behandelen;
- Shushou, decompressie en Shushou pijn (zoals artralgie en ischias) kunnen de mechanische aërobe beweging van huidweefsel bevorderen, de druk snel verlichten en vermoeidheid elimineren;
- Verbeter en trek huid aan, herstel huidelasticiteit;
- Activeer celcirculatie, bevorder metabolisme, produceer meer collageen en elastische vezel, verbeter huidweefsel van gezicht en lichaam;


Werkingsmethode:

Bijvoorbeeld: voor de verrichting van lichaamsdelen (met uitzondering van het gezicht), gebruik het vetstraalhoofd en RF-hoofd, en werk in de volgende volgorde: Reinig de huid eerst, gebruik de etherische olie of gel om gelijkmatig op het huidoppervlak te smeren en masseer vervolgens.

Richtlijnen gebruiken


dij

- (1) Van onder naar boven, duw naar lies om lymfe te baggeren;
- (2) Het draaien tegen de klok in van onder naar boven kan helpen vet af te breken;
- (3) Ontcomposeer vettig door heen en weer te duwen;
- (4) Trek naar beneden van de knie naar de lies om de curve te verbeteren.

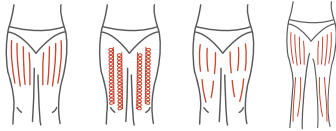


Heupen

- (1) Trek naar de taille in de richting van lymfe;
- (2) Cirkel tegen de klok in van onder naar boven en beweeg heen en weer;
- (3) Volgens de spiertextuur, kan het de billenhuid glijden en compacteren, waardoor de bill mollar en stevig wordt en de perfecte curve presenteert.

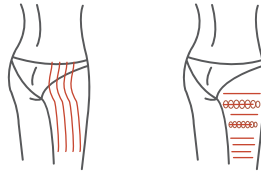


Terug

- (1) Duw heen en weer 2–3 keer;
- (2) Cirkel tegen de klok in om de lymfeklieren te stimuleren;
- (3) Draai op de rug tegen de klok in en beweeg omhoog en omlaag om vet af te breken;
- (4) Het gebruik van lymfdrainagetechniek om toxine naar lymfeklieren te trekken kan helpen de rugcurve te verbeteren.

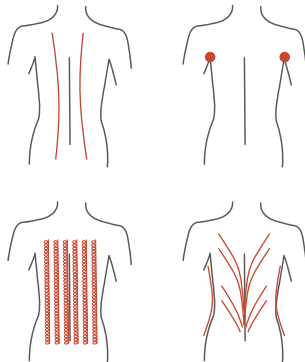


Arm

- (1) Van de binnenste elleboog naar de oksel, doe lymfedrainage;
- (2) Om lymfeklieren in een cirkel te stimuleren;
- (3) Breek overtollig vet af door het tegen de klok in te draaien of het heen en weer te duwen;
- (4) Trek de huid van elleboog tot oksel aan.

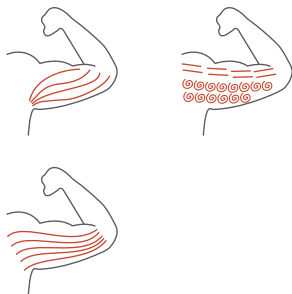


Buik

- (1) Rond de navel van klein naar groot, met de klok mee cirkel om de peristaltiek van de dikke darm te helpen;
- (2) Duw deze van de kleine naar de grote cirkel tegen de klok in.

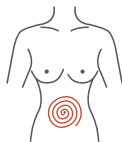

Gezicht

- (1) Breng het product gelijkmatig aan op het gezicht, gebruik het gezicht RF-hoofd, werk van onder naar boven om het gezicht op te tillen, maak de huid in een gespannen staat, het wordt aanbevolen om vijf minuten te gebruiken;
- (2) Breng het product gelijkmatig aan op het gezicht, gebruik de RF-kop op het gezicht, werk in de richting van de pijl, het wordt aanbevolen om het voor 5–8 minuten te gebruiken.

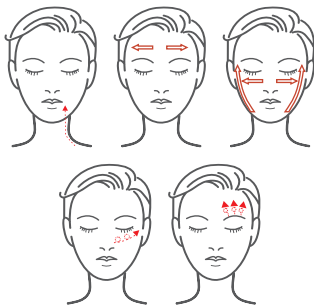

Ongeschikte mensen:

1. Als er een wond op de huid is, vermijd de wond of niet;
2. Degenen die lijden aan melaatsheid is verboden dit te doen;
3. Het is verboden voor patiënten met hartaandoeningen (zoals aritmie), vooral die met pacemaker;
4. Kanker, kankerpatiënten zijn verboden om te doen;
5. Patiënten met acute hartslijm of infectieziekten zijn verboden dit te doen;
6. Zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, verboden om te doen tijdens de menstruatie;
7. Ernstige ziekten, zoals hartziekte, maagzweer, ernstige maagziekte, twaalfvingerige zweer, hypertensie, abdominale operatie minder dan drie maanden, diabetes, enz;
8. Metaal en silicagel zijn verboden in vivo;
9. Tijdens verrichting, moet het handvat 90° verticaal aan de huid zijn om ongemak aan de gast te vermijden;
10. Voordat de verrichting begint, eerst contact opnemen met de sonde verticaal op de huid, dan de hostschakelaar inschakelen, de verrichtingsmodusenergie op het minimum aanpassen en vervolgens de intensiteit volgens de huiddraagcapaciteit van de klant aanpassen;

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik:

1. reinig eerst de huid en gebruik dan een speciale gel of gewichtsverlies etherische olie.
2. Er moet water medium (zoals etherische olie, enz.) in de behandeling zijn, anders zal het zeker verlies aan het instrument veroorzaken;
3. Het operatiehoofd blijft niet lang op één plaats, vermijdt plaatsen met botten;
4. Gebruik geen desinfecterend product om te desinfecteren, stel voor om natte katoen of handdoek te gebruiken;
5. De operator en de persoon die de behandeling ontvangt nemen de metalen decoraties op het lichaam af;
6. Als de machine continu voor één uur wordt gebruikt, stop dan voor tien minuten, en gebruik het dan opnieuw;
7. Tinnitus kan bij sommige van de gasten optreden bij het gebruik van de vette straalkop, wat een normaal fenomeen is, omdat deze golfband het bereik van menselijke akoestische golf heeft overschreden.

Made in China