

MINI 40K

Fat-blasting Weight-reducing Device

To reduce your weight professionally

USER'S MANUAL

mini 40K
cavitation



About Product

Dear customer,thank you for purchasing this weight-reducing device!

We believe this device will offer you a professional way of weight-losing and help you shake off extra fat effectively.As its name called,40K indicates the device's working frequency is 40000Hz which technically is the ultrasonic that inafrequency band which is very ideal for reducing weight.

Safe to use as it is,you still need to read the user manual through before operations.



CONTENTS

Product theory & theory	1
Product details	4
Use guide	6
Advised use guide	8
Device safety concerns	9
Cautions on treatment wand	10
Tips	11
After sale service	12

PRODUCT WORKING THEORY & EFFICACY

The fat-blasting device comes with the fat reducing theory of ultrasonic which produces high density energy. When the ultrasonic penetrates deeply to skin, the ultra wave can alienate fat cells to cause voids, these voids will implode to release the accumulated ultra sonic energy and trigger ultra fast micro vibration to burn fat instantly. This weight losing method enjoys the feature that zero hurts to skin tissues and lymph. Also this device helps user to tighten and lift skin to shape you a dream figure.




PRODUCT EFFICACY



85% resolved fat will be channeled out of body through lymph system,
15% fat will be translated into sugar via liver to support man's daily activities.

- 1.This weight reducing device can be a alternative of liposuction.
- 2.This device helps in tightening and lifting skin,also promote skin blood circulation.
- 3.Helps users to relax and massage their skin and muscles.
- 4.Effective in reducing weight and resolve fat under skin.
- 5.Effective to remove cellulite and helps parturient to solve problems like sagging belly after childbirth.

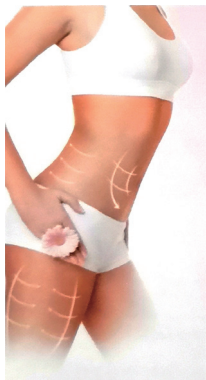

Shape you the attractive figure

Lift and tighten skin
Skin tightening
Refine skin
Belly care
Lift and shape hip

Efficacy



- 1.Waist
Promote peristole and ovarian function.
- 2.Hip
Shape hip and tighten Skin.

Efficacy comparison



Shape waist and legs



Device technology

- 1.world class fat blasting technology.
- 2.Applicable for all skin types.
- 3.Painless,zero skin hurts,no skin tissue damages.
- 4.Easy operation,convenient to use.
- 5.Effective and safe.

Device features

- 1.Reduce weight without surgery.
- 2.No hurt and bleeding.
- 3.Zero adverse effects.
- 4.No damages to skin tissues.
- 5.Easy to operate.

PRODUCT STRUCTURE SHOW

Product parameters

Frequency:40--60Hz

Energy output:35--60J/cm²

Power:60W


Weight:2.4Kg

Product size:280*280*130mm

Power input:100--240V 2A(MAX)



Device addapter

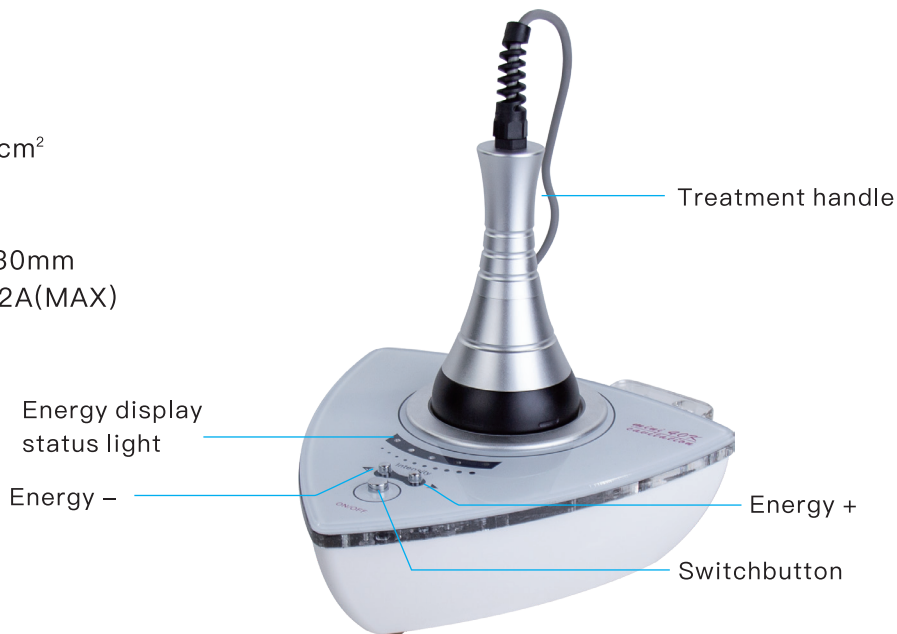

THE BACK OF THE PRODUCT STRUCTURE




USE GUIDE


1. Please store this device in cool place and make sure the heat emission fan at the bottom of the device has enough space for ventilating heat.
2. Please carefully and rightly connect the treatment handle.
3. The red switch button lies at the back of the device . “I” means the device is on, “O” means the device is off.
4. Long press the ON/OFF button for 2 seconds, then the third light will be on, that means user at the moment can be adjustable.
5. The 40K fat-blasting head's max continuous working time is 30 minutes, after 30 minutes using, please stop using for about 5 minutes to cool down the surface temperature of the treatment head.
This device has been preset before delivery.
6. After using, please switch off the device and unplug it.
7. After use according to the “OFF” button on the surface of the instrument and equipment at the back of the red button “O” to shut down the instrument, then unplug the power cord, etc.

ADVISED USE GUIDE


Before use the device, please smear some skin care gel on the target skin area. Then adjust the proper device working intensity and follow the instructions below.

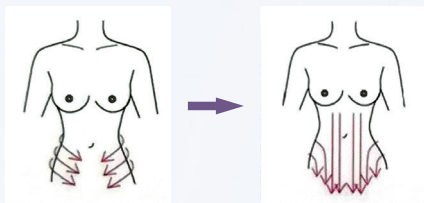


Glide the treatment head slowly and gently by following skin texture from belly to groin. Please follow the instructions showed in the picture.

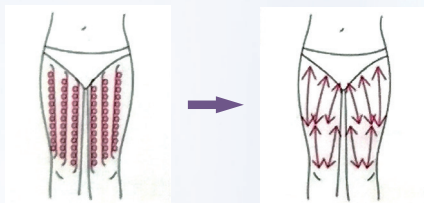

Glide the treatment head slowly from bottom to the top and repeat this for several times. Please follow the instructions showed in the picture.

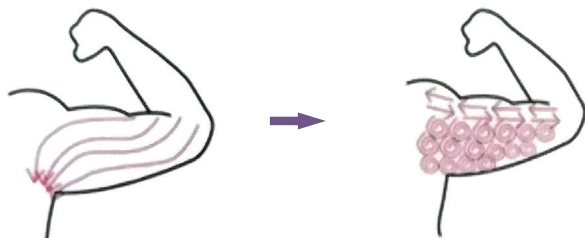

First,glide the treatment head from the elbow to the armpit and glide in circle.
Then do this movement in reverse direction and repeat the whole process for several times.

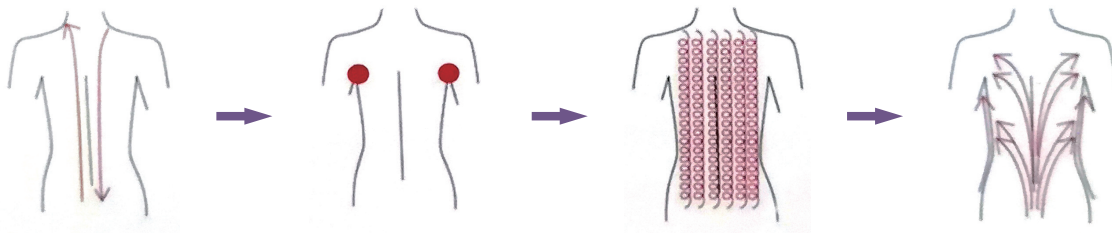

First,glide the treatment head slowly and gently from the upper part of the body to the bladder and repeat this process for several times.
Then glide the treatment in circle to burn the fat inside body.Next glide the treatment by following the directions showed in above picture to promote the lymph circulation.

SAFETY CONCERNS

- 1.This device belongs to a sophisticated kind which should be kept dry and cool.
 - 2.Prevent this device from any violent impacts.
 - 3.Please clean this device frequently to ensure a normal and smooth running.
 - 4.If the device is not in use,please cover it by using a cloth cover to keep it from dust.
- When the device is left unused for a long time,please plug the device every 15 days to keep the device from damages caused by humidity.

USE PROHIBITED

- 1.Device's cable is damaged or find the cable is overheated.
- 2.Device is not tightly connected to the power socket.
- 3.Do not bend the device's plug forcefully.
- 4.Do not unplug the device during device using.
- 5.Do not use incompatible power cable.
- 6.Make sure the device is unreachable for kids.
- 7.Do not clean the device by using any corrosive liquid.
- 8.Do not operate the device when hands are wet.

CAUTIONS ON USING TREATMENT HEAD

1. Make sure the treatment head fully contact the target skin, better vertically.
2. Glide the head slowly and gently.
3. After finish using, please switch off the function of this treatment head.
4. Any damages found on the electron of this treatment head.



REMINDER

- 1.The ultrasonic produced by this device may cause uncomfortable tinnitus which is normal during this device using.
- 2.Please attach enough attention to the maintenance of the device,the sophisticated units inside especially.
- 3.Loosened device components connections may result in short circuit.
- 4.After device using,please clean it rightly for next time use.
- 5.Patient who has skin wounds or injury are forbidden to take the treatment.
- 6.Diseases suffers like epilepsy,heart disease or diabetes are forbidden to take the treatment.
- 7.Pregnant women,women in period or suckling period are forbidden to take the treatment.



AFTER SALE SERVICE

This device(main body of this device)enjoys 6 months warranty since the day of purchase.
Any device(main body of this device)problems detected in 3 months,charge-free repair service is offered,repair fee is redquired over 3 months.

The device accessories enjoy 1 month charge-free repair for surfaced quality problems, repair fee is required over 1 month.

Following device malfunctions are not included in the range of charge-free repair service.

- 1.Dismantle or alter the device by users themselves.
- 2.Accidentally fall during device using.
- 3.Device malfunctions caused by poor maintenance.
- 4.Operate the device without following the product manual.

Service card

Product name:_____ Date of purchase:_____ Buyer'sname: _____

TEL:_____ Address:_____ Date of repair:_____

Malfunction description:_____

Repair statement:_____

mini 40K
cavitation

MINI 40K

zyklisches Fettstrahlen Gewichtsreduzierende Vorrichtung

Um Ihr Gewicht professionell zu reduzieren

BENUTZERHANFAHREN

mini 40K
cavitation



Über das Produkt

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf dieses Gewichtsreduktionsgerät!

Wir glauben, dass dieses Gerät Ihnen eine professionelle Möglichkeit der Gewichtsabnahme bietet und Ihnen hilft, zusätzliches Fett effektiv abzuschütteln. Wie sein Name genannt, zeigt 40K an, dass die Arbeitsfrequenz des Geräts 40000Hz ist, was technisch der Ultraschall ist, der das Infrarotband ist, das sehr ideal ist, um Gewicht zu reduzieren.

Sicher zu verwenden, wie es ist, müssen Sie das Benutzerhandbuch vor dem Betrieb noch durchgelesen.



INHALT

Produkttheorie Theorie	1
Produktdetails	4
Gebrauchsanleitung	6
Empfohlene Gebrauchsanleitung	8
Bedenken hinsichtlich der Produktsicherheit	9
Vorsicht beim Behandlungsstab	10
Tipps	11
Kundendienst	12

ARBEITSTHEORIE DER PRODUKTE

Das Fett-Strahlgerät kommt mit der fettreduzierenden Theorie des Ultraschalls, die Energie der hohen Dichte produziert. Wenn der Ultraschall tief in die Haut eindringt, kann die Ultrawelle Fettzellen entfremden, um Hohlräume zu verursachen, implodieren diese Hohlräume, um die angesammelte Ultraschallenergie freizugeben und ultraschnelle Mikrovibration auszulösen, um Fett sofort zu verbrennen. Diese Gewichtsverlust-Methode genießt die Eigenschaft, dass null schmerzt zu Hautgewebe und Lymphe. Auch dieses Gerät hilft dem Benutzer, die Haut zu straffen und anzuheben, um Ihnen eine Traumfigur zu formen.



PRODUKTEFFIKATÄT



85% aufgelöstes Fett wird aus dem Körper durch Lymphsystem kanalisiert, 15% Fett wird über Leber in Zucker umgewandelt, um die täglichen Aktivitäten des Menschen zu unterstützen.

- 1.This Gewichtsreduktionsgerät kann eine Alternative der Fettabsaugung sein.
- 2.This Gerät hilft bei der Straffung und Anhebung der Haut, fördert auch die Hautdurchblutung.
- 3.Helps Benutzer zu entspannen und ihre Haut und Muskeln zu massieren.
- 4.Effective in der Gewichtsreduktion und lösen Fett unter Haut.
- 5.Effective Cellulite zu entfernen und hilft Gebärenden, Probleme wie schlaffer Bauch zu lösen nach der Geburt.



Gestalten Sie die attraktive Figur

Haut anheben und straffen
Hautstraffung
Hautverfeinern
Bauchpflege
Hüfte anheben und formen

Wirksamkeit



1. Taille
Förderung der Peristole und der Eierstockfunktion.
2. Hüfte
Hüfte formen und Haut straffen.

Wirksamkeitsvergleich



Taille und Beine formen



Gerätetechnik

1. world class Fett Blasting Technologie.
2. Anwendbar für alle Hauttypen.
3. Painless, keine Hautverletzungen, keine Hautgewebsschäden.
4. Easy Operation, bequem zu bedienen.
5. Effektiv und sicher.

Geräte Merkmale

1. Reduce Gewicht ohne Operation.
2. Keine Schmerzen und Blutungen.
3. Zero Nebenwirkungen.
4. Keine Schäden an Hautgewebe.
5. Easy zu bedienen.

PRODUKTSTRUKTUR SHOW

Produktparameter

Frequenz:40--60Hz

Energieleistung:35--60J/cm²

Leistung:60W

Gewicht:2,4Kg

Produktgröße: 280*280*130mm

Leistungseingang:100--240V 2A(MAX)



Device-Addapter



DIE Rückseite DER PRODUKTSTRUKTUR




ANWENDUNG


1. Bitte bewahren Sie dieses Gerät an einem kühlen Ort auf und stellen Sie sicher, dass der Wärmeabgabeventilator an der Unterseite des Geräts hat genug Platz zum Lüften von Wärme.
2. Bitte schließen Sie sorgfältig und richtig den Behandlungsgriff an.
3. Der rote Schalter-Knopf liegt auf der Rückseite des Geräts. "I" bedeutet, dass das Gerät eingeschaltet ist, "O" bedeutet, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
4. Long drücken Sie die ON/OFF-Taste für zwei Sekunden, dann leuchtet das dritte Licht, das bedeutet Benutzer beider Moment einstellbar ist.
5. Die maximale ununterbrochene Arbeitszeit des Fettstrahlkopfes 40K ist 30 Minuten, nach 30 Minuten Gebrauch, Bitte beenden Sie die Anwendung für etwa fünf Minuten, um die Oberflächentemperatur des Behandlungskopfes abzukühlen. Dieses Gerät wurde vor Auslieferung voreingestellt.
6. After Gebrauch, schalten Sie bitte das Gerät aus und ziehen Sie es aus.
7. After Gebrauch entsprechend der Taste "OFF" auf der Oberfläche des Instruments und der Ausrüstung bei der Rückseite des roten Knopfes "O", um das Instrument abzuschalten, dann ziehen Sie das Netzkabel, usw.

ANWENDUNGSANLEITUNG


Bevor Sie das Gerät verwenden, schmieren Sie bitte etwas Hautpflegegel auf den Zielhautbereich. Stellen Sie dann die richtige Arbeitsintensität des Geräts ein und folgen Sie den Anweisungen unten.

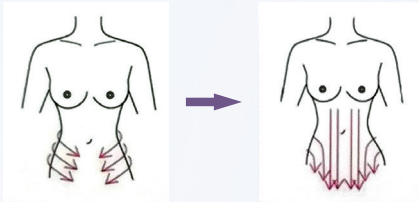


Gleiten Sie den Behandlungskopf langsam und sanft, indem Sie der Hautstruktur von Bauch bis Leiste folgen. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bild.

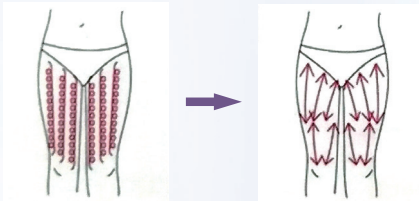

Gleiten Sie den Behandlungskopf langsam von unten nach oben und wiederholen Sie dies mehrmals. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bild.

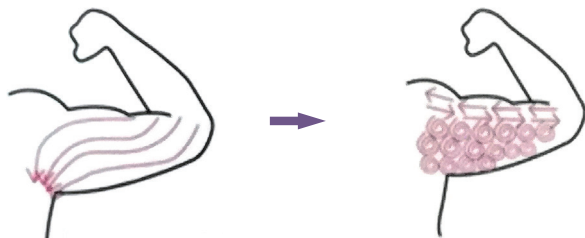

Zuerst gleiten Sie den Behandlungskopf vom Ellbogen zur Achselhöhle und gleiten Sie im Kreis. Dann machen Sie diese Bewegung in umgekehrter Richtung und wiederholen Sie den gesamten Vorgang mehrmals.

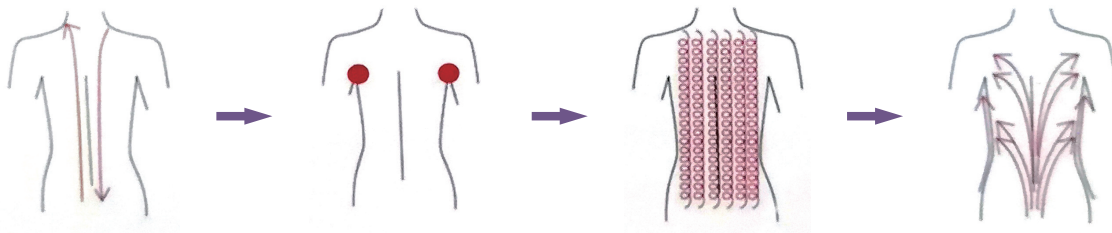

Zuerst gleiten Sie den Behandlungskopf langsam und sanft vom oberen Teil des Körpers zur Blase und wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals. Dann gleiten Sie die Behandlung im Kreis, um das Fett im Körper zu verbrennen. Anschließend gleiten Sie die Behandlung, indem Sie den Anweisungen folgen, die im obigen Bild gezeigt werden, um die Lymphzirkulation zu fördern.

SICHERHEITSBEZOGENE

1. Dieses Gerät gehört zu einer anspruchsvollen Art, die trocken und kühl gehalten werden sollte. 2. Prevent dieses Gerät von jeglichen gewaltsamen Auswirkungen. 3. Bitte reinigen Sie dieses Gerät häufig, um einen normalen und reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. 4. Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bedecken Sie es bitte mit einer Stoffabdeckung, um es vor Staub zu schützen. Wenn das Gerät für eine lange Zeit unbenutzt bleibt, schließen Sie das Gerät bitte alle 15–Tage an. Halten Sie das Gerät vor Schäden durch Feuchtigkeit.

VERBOTEN

1. Das Kabel des Geräts ist beschädigt oder das Kabel ist überhitzt.
2. Device ist nicht fest mit der Steckdose verbunden.
3. Biegen Sie den Stecker des Gerätes nicht gewaltsam.
4. Ziehen Sie das Gerät während der Verwendung nicht vom Netzstecker.
5. Verwenden Sie kein inkompatibles Netzkabel.
6. Stellen Sie sicher, dass das Gerät für Kinder nicht erreichbar ist.
7. Reinigen Sie das Gerät nicht mit einer korrosiven Flüssigkeit.
8. Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn die Hände nass sind.

VORSICHT ZUR VERWENDUNG DES BEHANDLUNGSKOPFes

1. Stellen Sie sicher, dass der Behandlungskopf vollständig mit der Zielhaut in Kontakt tritt, besser vertikal.
2. Gleiten Sie den Kopf langsam und sanft.
3. After beenden Sie die Verwendung, schalten Sie bitte die Funktion dieses Behandlungskopfes aus.
4. Any Schäden am Elektron dieses Behandlungskopfes gefunden.



ERMERKUNG

1. Der Ultraschall, der von diesem Gerät produziert wird, kann unangenehmen Tinnitus verursachen, der während dieses Geräts normal ist.
2. Please legen Sie genügend Aufmerksamkeit auf die Wartung des Geräts, die anspruchsvollen Einheiten innen besonders.
3. Loosened Gerätekomponenten Verbindungen können zu Kurzschluss führen.
4. After Gerät verwenden, reinigen Sie es bitte richtig für den nächsten Gebrauch.
5. Patient, der Hautwunden oder Verletzungen hat, ist verboten, die Behandlung zu nehmen.
6. Diseases leidet wie Epilepsie, Herzerkrankungen oder Diabetes sind verboten, die Behandlung zu nehmen.
7. Schwangere Frauen, Frauen in Periode oder Stillzeit sind verboten, die Behandlung zu nehmen.



NACHVERKAUFSERVICE

Dieses Gerät (Hauptteil dieses Geräts) genießt 6-monatige Garantie seit dem Tag des Kaufs. Jedes Gerät (Hauptteil dieses Geräts) Probleme entdeckt in drei Monaten, kostenloser Reparaturservice wird angeboten, Reparaturgebühr wird über drei Monate reduziert. Das Gerätezubehör genießt 1-monatige kostenlose Reparatur für aufgedeckte Qualitätsprobleme, Reparaturgebühr ist über einen Monat erforderlich. Nachfolgende Gerätestörungen gehören nicht zum kostenlosen Reparaturservice.

1. Demontieren oder ändern Sie das Gerät durch Benutzer selbst.
2. Versehentlich fallen während der Verwendung des Geräts.
3. Device Fehlfunktionen verursacht durch schlechte Wartung.
4. Operate das Gerät, ohne der Bedienungsanleitung des Produkts zu folgen.

Servicekarte

Produktname: _____ Kaufdatum: _____ Käufer'sname: _____

TEL: _____ Adresse: _____ Datum der Reparatur: _____

Beschreibung der Störung: _____

Reparaturanweisung: _____

mini 40K
cavitation

MINI 40K

Dispositivo di riduzione del peso

Per ridurre il peso professionale

MANUALE DELL'UTENTE

mini 40K
cavitation



Informazioni sul prodotto

Caro cliente, grazie per l'acquisto di questo dispositivo di riduzione del peso!

Crediamo che questo dispositivo ti offrirà un modo professionale di perdere peso e ti aiuterà a scuotere efficacemente il grasso extra. Come il suo nome chiamato, 40K indica che la frequenza di lavoro del dispositivo è 40000Hz che tecnicamente è la banda ultrasonica che inafrequenza che è molto ideale per ridurre il peso.

Sicuro da usare così com'è, è ancora necessario leggere il manuale utente attraverso prima delle operazioni.



CONTENUTI

Teoria e teoria dei prodotti	1
Dettagli del prodotto	4
Uso guida	6
Guida all'uso consigliata	8
Problemi relativi alla sicurezza dei dispositivi	9
Precauzioni sulla bacchetta di trattamento	10
Consigli	11
Servizio post vendita	12

TEORIA ED EFFICACIA DEL LAVORO DEL PRODOTTO

Il dispositivo di granigliatura di grasso viene fornito con la teoria di riduzione del grasso di ultrasuoni che produce energia ad alta densità. Quando l'ultrasuono penetra profondamente alla pelle, l'onda ultra può alienare le cellule di grasso per causare vuoti, questi vuoti imploderanno per rilasciare l'energia ultrasonica accumulata e innescare micro vibrazione ultra veloce per bruciare i grassi istantaneamente. Questo metodo di perdita di peso gode della caratteristica che zero fa male ai tessuti della pelle e alla linfa. Anche questo dispositivo aiuta l'utente a stringere e sollevare la pelle per modellare una figura da sogno.




EFFICACIA DEL PRODOTTO



85% di grasso risolto sarà canalizzato fuori dal corpo attraverso il sistema linfatico, 15% di grasso sarà tradotto in zucchero tramite il fegato per sostenere le attività quotidiane dell'uomo.

1. Questo dispositivo di riduzione del peso può essere un'alternativa di liposuzione.
2. Questo dispositivo aiuta a stringere e sollevare la pelle, inoltre promuove la circolazione sanguigna della pelle.
3. Aiuta gli utenti a rilassarsi e massaggiare la loro pelle e muscoli.
4. Efficace nel ridurre il peso e risolvere il grasso sotto la pelle.
5. Effective per rimuovere la cellulite e aiuta parturient a risolvere problemi come la pancia cadente dopo il parto.

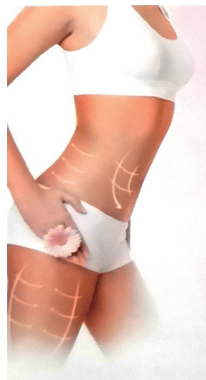

Shape you the attractive figure

Sollevare e stringere la pelle
Stretto cutaneo
Raffina la pelle
Cura del ventre
Sollevare e modellare l'anca



Efficacia

1. Vita
Promuovere la peristolia e la funzione ovarica.
2. Hip
Forma l'anca e stringi la pelle.

Confronto dell'efficacia



Forma vita e gambe



Tecnologia dei dispositivi

1. tecnologia di granigliatura grassa di classe mondiale.
2. Applicabile per tutti i tipi di pelle.
3. Painless, zero ferite della pelle, nessun danno del tessuto della pelle.
4. Easy operazione, conveniente da usare.
5. Efficace e sicuro.

Caratteristiche del dispositivo

1. Reduce peso senza intervento chirurgico.
2. No male e sanguinamento.
3. Zero effetti avversi.
4. No danni ai tessuti della pelle.
5. Easy da usare.

STRUTTURA DEL PRODOTTO

Parametri del prodotto

Frequenza: 40--60Hz

Potenza energetica: 35--60J/cm²

Potenza: 60W

Peso: 2,4Kg

Dimensione del prodotto: 280*280*130mm

Ingresso di alimentazione: 100--240V 2A (MAX)



Adattatore debruce

Indicatore di stato
dell'indicatore energetico

Energia -

Maniglia di trattamento

Energia +

Pulsante di
commutazione



IL POSTO DELLA STRUTTURA DEL PRODOTTO




USE GUIDA


1. Si prega di conservare questo dispositivo in luogo fresco e assicurarsi che la ventola di emissione di calore nella parte inferiore del dispositivo abbia abbastanza spazio per ventilare il calore.
2. Please collegare attentamente e giustamente la maniglia del trattamento.
3. Il pulsante rosso dell'interruttore si trova sul retro del dispositivo. "I" significa che il dispositivo è acceso, "O" significa che il dispositivo è spento.
4. Long premere il pulsante ON / OFF per 2 secondi, quindi la terza luce sarà accesa, che significa che l'utente al momento può essere regolabile.
5. Il tempo di lavoro continuo massimo della testa di granigliatura 40K è di 30 minuti, dopo 30 minuti di utilizzo, si prega di smettere di utilizzare per circa 5 minuti per raffreddare la temperatura superficiale della testa di trattamento. Questo dispositivo è stato preimpostato prima della consegna.
6. Dopo l'uso, si prega di spegnere il dispositivo e scollegarlo.
7. After uso secondo il pulsante "OFF" sulla superficie dello strumento e dell'attrezzatura sul retro del pulsante rosso "O" per spegnere lo strumento, quindi scollegare il cavo di alimentazione, ecc.

GUIDA D'USO CONSIGLIATA


Prima di utilizzare il dispositivo, si prega di spalmare un po' di gel di cura della pelle sulla zona della pelle di destinazione. Quindi regolare l'intensità di lavoro corretta del dispositivo e seguire le istruzioni riportate di seguito.

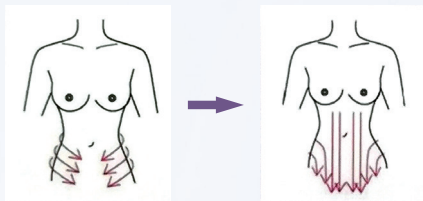


Far scorrere lentamente e delicatamente la testa del trattamento seguendo la struttura della pelle dal ventre all'inguine. Si prega di seguire le istruzioni mostrate nella foto.

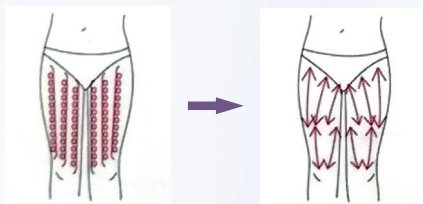

Far scorrere lentamente la testa del trattamento dal basso verso l'alto e ripetere questo per diverse volte. Si prega di seguire le istruzioni mostrate nella foto.

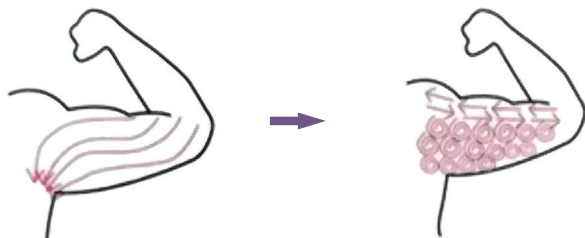

In primo luogo, scivolare la testa del trattamento dal gomito all'ascella e scivolare in cerchio. Quindi fai questo movimento in direzione inversa e ripeti l'intero processo per diverse volte

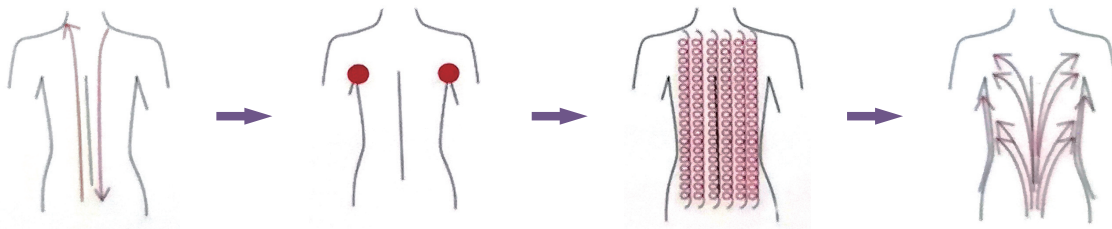

In primo luogo, scivolare lentamente e delicatamente la testa del trattamento dalla parte superiore del corpo alla vescica e ripetere questo processo per diverse volte. Poi scivolare il trattamento in cerchio per bruciare il grasso all'interno del corpo. Successivamente scivolare il trattamento seguendo le indicazioni mostrate nella foto sopra per promuovere la circolazione linfatica.

CONCERNI DI SICUREZZA

1. Questo dispositivo appartiene ad un tipo sofisticato che dovrebbe essere tenuto asciutto e fresco.
2. Prevenire questo dispositivo da eventuali impatti violenti.
3. Si prega di pulire questo dispositivo frequentemente per garantire un funzionamento normale e regolare.
4. Se il dispositivo non è in uso, si prega di coprirlo utilizzando un coperchio di panno per tenerlo dalla polvere. Quando il dispositivo viene lasciato inutilizzato per un lungo periodo di tempo, si prega di collegare il dispositivo ogni 15 giorni per mantenere il dispositivo da danni causati dall'umidità.

USO PROIBITO

1. Il cavo del dispositivo è danneggiato o trova che il cavo è surriscaldato.
2. Device non è strettamente collegato alla presa di corrente.
3. Do non piegare la spina del dispositivo con forza.
4. Non scollegare il dispositivo durante l'utilizzo del dispositivo.
5. Do non utilizzare cavo di alimentazione incompatibile.
6. Assicurarsi che il dispositivo sia irraggiungibile per i bambini.
7. Non pulire il dispositivo utilizzando qualsiasi liquido corrosivo.
8. Non utilizzare il dispositivo quando le mani sono bagnate.

ATTENZIONE SULL'UTILIZZO DELLA TESTA DEL TRATTAMENTO

1. Assicurarsi che la testa di trattamento contatti completamente la pelle di destinazione, meglio verticalmente.
2. Glide la testa lentamente e delicatamente.
3. Dopo aver finito di usare, si prega di spegnere la funzione di questa testa di trattamento.
4. Any danni trovati sull'elettrodo di questa testa di trattamento.



REMINDER

1. L'ultrasuono prodotto da questo dispositivo può causare acufene scomodo che è normale durante l'uso di questo dispositivo.
2. Please collegare abbastanza attenzione alla manutenzione del dispositivo, le unità sofisticate all'interno in particolare.
3. Le connessioni allentate dei componenti del dispositivo possono causare cortocircuito.
4. Dopo l'uso del dispositivo, si prega di pulirlo correttamente per l'uso successivo.
5. Patient che ha ferite della pelle o lesioni è vietato prendere il trattamento.
6. Diseases soffre come epilessia, malattie cardiache o diabete sono vietati per prendere il trattamento.
7. Le donne incinte, le donne in periodo o periodo di allattamento sono vietate a prendere il trattamento.



SERVIZIO post vendita

Questo dispositivo (corpo principale di questo dispositivo) gode di 6 mesi di garanzia dal giorno dell'acquisto. Qualsiasi dispositivo (corpo principale di questo dispositivo) problemi rilevati in 3 mesi, servizio di riparazione gratuito è offerto, tasso di riparazione è richiesto in 3 mesi. Gli accessori del dispositivo godono di 1 mese di riparazione gratuita per problemi di qualità superficiale, tasso di riparazione è richiesto oltre 1 mese. I seguenti malfunzionamenti del dispositivo non sono inclusi nella gamma del servizio di riparazione gratuito.

1. Smontare o alterare il dispositivo dagli utenti stessi.
2. Caduta accidentale durante l'uso del dispositivo.
3. Device malfunzionamenti causati da scarsa manutenzione.
4. Operare il dispositivo senza seguire il manuale del prodotto.

Carta di servizio

Nome del prodotto: _____ Data di acquisto: _____ Nome dell'acquirente: _____

TEL: _____ Indirizzo: _____ Data della riparazione: _____

Descrizione del malfunzionamento: _____

Dichiarazione di riparazione: _____

mini 40K
cavitation

MINI 40K

Dispositif de perte de poids fat jet

Perte de poids professionnelle

Manuel de l'utilisateur

mini 40K
cavitation



À propos du produit

Cher client, merci d'avoir acheté cet appareil de perte de poids

Nous croyons que cet appareil vous fournira un moyen professionnel de perdre du poids et vous aidera à vous débarrasser efficacement de l'excès de graisse.

Comme son nom l'indique, 40k signifie que l'appareil fonctionne à une fréquence de 40 000 Hz et est techniquement ultrasonique dans la bande de fréquences, ce qui est idéal pour réduire le poids.

Bien que sûr à utiliser, vous devez toujours lire le manuel de l'utilisateur avant de l'utiliser.



Contenu

Théorie et théorie du produit	1
Détails du produit	4
Guide d'utilisation	6
Guide d'utilisation recommandé	8
Problèmes de sécurité des équipements	9
Précautions pour la barre de traitement	10
Conseils	11
Service après – vente	12

Principe de fonctionnement et efficacité du produit

L'appareil à jet de graisse utilise la théorie de la réduction des graisses des ultrasons pour produire de l'énergie à haute densité. Lorsque les ultrasons pénètrent profondément dans la peau, les ultrasons alièneront les cellules graisseuses, provoquant des vides qui implosent, libérant l'énergie ultrasonique accumulée, déclenchant des micro - vibrations ultrarapides qui brûlent instantanément les graisses. Cette méthode de perte de poids se caractérise par zéro dommage aux tissus cutanés et à la lymphe. En outre, l'appareil peut également aider les utilisateurs à resserrer et à tirer la peau et à façonner la silhouette de vos rêves.




Efficacité du produit



85% des graisses décomposées seront excrétées par le système lymphatique et 15% seront converties en sucre par le foie pour soutenir les activités quotidiennes des humains.

1. Ce dispositif de perte de poids peut être utilisé comme alternative à la liposuccion.
2. L'appareil aide à resserrer et à tirer la peau, il aide également à promouvoir la circulation sanguine dans la peau.
3. Aidez l'utilisateur à détendre et masser la peau et les muscles.
4. Perte de poids efficace pour résoudre la graisse sous – cutanée.
5. Enlever efficacement la cellulite et aider la mère à résoudre des problèmes tels que l'affaissement de l'abdomen post – partum.

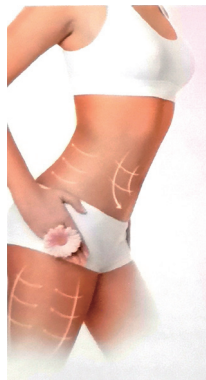

Sculpter votre corps charmant

Tire et resserre la peau
Raffermit la peau
Améliore la peau
Soins abdominaux
Lifting des hanches



Efficacité thérapeutique

1. Tour de taille
Favorise le
péristaltisme et la
fonction ovarienne.
2. Les hanches
Sculptez vos hanches
et Resserrez votre
peau.

Comparaison de l'efficacité



Sculpter la taille
et les jambes



Technologie des équipements

1. Technologie d'explosion de graisse de classe mondiale.
2. Convient à toutes les peaux.
3. Indolore, aucun dommage de peau, aucun dommage de tissu de peau.
4. Opération facile et facile à utiliser.
5. Efficace et sûr.

Fonctions de l'équipement

1. Perte de poids sans chirurgie.
2. Aucune blessure et saignement.
3. Aucune réaction défavorable.
4. Aucun dommage aux tissus cutanés.
5. Facile à utiliser.

Présentation de la structure du produit

Paramètres du produit

Fréquence: 40 – 60HZ

Rendement énergétique: 35 – 60j / CM²

Puissance: 60W

Poids: 2,4 kg

Taille du produit: 280 * 280 * 130mm

Entrée d'alimentation: 100 – – 240V 2A (max)



Plugins pour debice



Le dos de la structure du produit




Guide d'utilisation


1. Veuillez stocker cet appareil dans un endroit frais et assurez – vous que le ventilateur dissipateur de chaleur au bas de l'appareil dispose d'un espace suffisant pour la ventilation.
2. Veuillez attacher soigneusement et correctement la poignée de traitement.
3. Le bouton de commutation rouge est situé à l'arrière de l'appareil. "I" signifie que l'appareil est allumé et "o" signifie que l'appareil est éteint.
4. Appuyez longuement sur le bouton on / off pendant 2 secondes, la troisième lumière s'allume, ce qui signifie que l'utilisateur peut maintenant l'ajuster.
5. Le temps de travail continu maximal de la tête de sablage de graisse 5.40k est de 30 minutes, après 30 minutes d'utilisation, veuillez arrêter l'utilisation pendant environ 5 minutes pour refroidir la température de surface de la tête de traitement. Cet appareil est pré-réglé avant la livraison.
6. Après utilisation, Veuillez éteindre l'appareil et le débrancher. 7. Appuyez sur le bouton "OFF" sur la surface de l'appareil de l'instrument après utilisation, éteignez l'instrument derrière le bouton rouge "o", puis débranchez le cordon d'alimentation, etc.

Guide d'utilisation recommandé


Appliquez un peu de gel de soin de la peau sur la zone de la peau cible avant d'utiliser cet appareil. Ensuite, Ajustez l'intensité de travail appropriée de l'équipement et suivez les instructions ci – dessous.

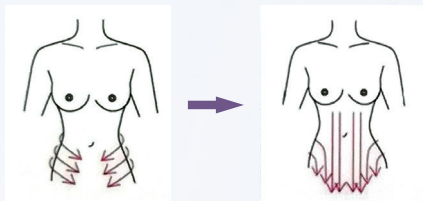


Faites glisser lentement et doucement la tête de traitement en suivant la texture de la peau de l'abdomen à l'aîne. Suivez les instructions sur les images.

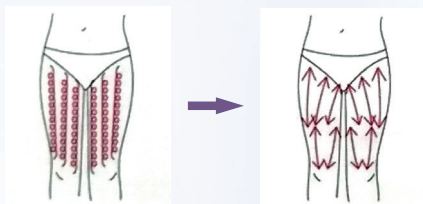

Faites glisser lentement la tête de traitement de bas en haut et Répétez plusieurs fois. Suivez les instructions sur les images.

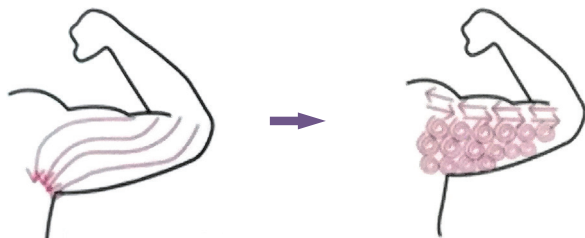

Tout d'abord, faites glisser la tête de traitement du coude à l'aisselle, puis faites glisser en boucle. Ensuite, faites cette action à l'envers et Répétez l'ensemble du processus plusieurs fois.

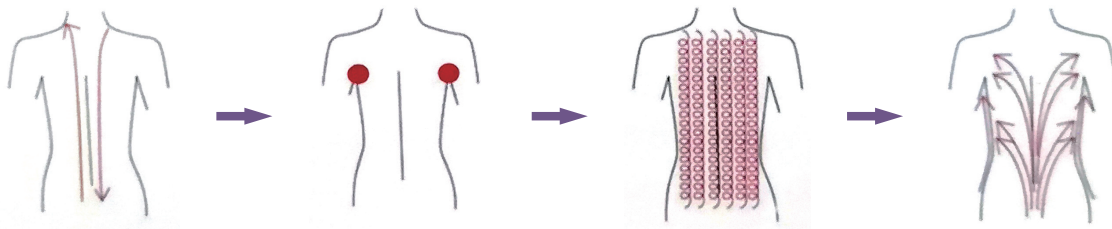

Tout d'abord, faites glisser lentement et doucement la tête de traitement de la partie supérieure du corps vers la vessie et répétez le processus plusieurs fois. Ensuite, le traitement de glissement cyclique brûle la graisse corporelle. Ensuite, suivez les instructions indiquées dans l'image ci – dessus pour faciliter la circulation lymphatique.

Problèmes de sécurité

1. Cet équipement appartient à l'équipement de précision, il doit rester sec et frais.
2. Empêcher tout impact violent sur cet appareil.
3. Veuillez nettoyer cet appareil fréquemment pour assurer un fonctionnement normal et régulier.
4. Si l'appareil n'est pas en cours d'utilisation, couvrez – le avec un couvercle en tissu pour empêcher la poussière de pénétrer. Branchez et débranchez l'appareil tous les 15 jours lorsqu'il n'est pas utilisé depuis longtemps pour éviter qu'il ne soit endommagé par l'humidité.

Utilisation interdite

1. Le câble de l'appareil est endommagé ou trouvé surchauffé.
2. L'appareil n'est pas étroitement connecté à la prise de courant.
3. Ne Pliez pas la fiche de l'appareil avec force.
4. Ne débranchez pas l'appareil lorsque vous l'utilisez.
5. N'utilisez pas de cordon d'alimentation incompatible.
6. Assurez – vous que l'appareil n'est pas accessible aux enfants.
7. N'utilisez aucun liquide corrosif pour nettoyer l'équipement.
8. Ne pas utiliser l'appareil lorsque les mains sont mouillées.

Précautions d'utilisation de la tête de traitement

1. Assurez – vous que la tête de traitement est en contact complet avec la peau cible, idéalement placée verticalement.
2. Faites glisser la tête lentement et doucement.
3. S'il vous plaît désactiver la fonction de cette tête de traitement après l'avoir utilisé.
4. Tout dommage à l'électronique de cette tête de traitement.



Rappel

1. Les ultrasons produits par cet appareil peuvent provoquer des acouphènes inconfortables, ce qui est normal lors de l'utilisation de cet appareil.
2. S'il vous plaît prêter toute l'attention à l'entretien de l'équipement, en particulier les unités complexes à l'intérieur.
3. Une connexion lâche des composants de l'appareil peut provoquer un court – circuit.
4. Après l'utilisation de l'appareil, veuillez le nettoyer correctement pour la prochaine utilisation.
5. Le traitement est interdit aux patients présentant des plaies ou des lésions cutanées.
6. Le traitement est interdit aux patients souffrant de maladies telles que l'épilepsie, les maladies cardiaques ou le diabète.
7. Il est interdit aux femmes enceintes, menstruées ou allaitantes.



Service après – vente

Cet appareil (le corps de cet appareil) est couvert par une garantie de 6 mois à compter de la date d'achat. Tout problème de l'appareil (le corps de cet appareil) est détecté dans les 3 mois, un service de réparation gratuit est disponible, plus de 3 mois sont soumis à des frais de réparation. Les problèmes de qualité de surface des accessoires d'équipement peuvent bénéficier d'un mois de réparation gratuite, plus d'un mois doit payer les frais de réparation. Les pannes d'équipement suivantes ne sont pas couvertes par le Service de réparation gratuit.

1. L'utilisateur démonte ou remplace l'appareil lui – même.
2. Chute accidentelle pendant l'utilisation de l'équipement.
3. Défaillance de l'équipement due à un mauvais entretien.
4. Ne pas utiliser l'équipement selon les instructions du produit.

Carte de service

Nom du produit: _____ Date d'achat: _____ Nom de l'acheteur: _____

TEL: _____ Adresse: _____ Date de réparation: _____

Description du défaut: _____

Instructions de réparation: _____

mini 40K
cavitation

MINI 40K

Dispositivo de pérdida de peso por inyección de grasa

Pérdida profesional de peso

Manual del usuario

mini 40K
cavitation



Sobre el producto

Estimado cliente, gracias por comprar este equipo de pérdida de peso.

Creemos que este dispositivo le proporcionará una forma profesional de perder peso y le ayudará a deshacerse eficazmente del exceso de grasa. Como su nombre indica, 40k significa que el dispositivo funciona con una frecuencia de 40.000 Hz y técnicamente es una ecografía dentro de la banda de frecuencia, que es muy adecuada para reducir el peso.

Aunque es seguro de usar, todavía necesita leer el Manual del usuario a través antes de operar.



Contenido

Teoría y teoría del producto	1
Detalles del producto	4
Guía de uso	6
Guía de uso recomendada	8
Problemas de Seguridad de los equipos	9
Precauciones de la barra de tratamiento	10
Consejos	11
Servicio postventa	12

Principio de funcionamiento y eficacia del producto

El dispositivo de inyección de grasa utiliza la teoría de la reducción de grasa de la ecografía para producir energía de alta densidad. cuando la ecografía penetra profundamente en la piel, la ecografía aliena las células grasas, causando huecos que explotan, liberando energía ultrasónica acumulada, provocando microvibraciones de ultraalta velocidad y quemando grasa instantáneamente. Este método de pérdida de peso tiene las características de cero daño al tejido cutáneo y la linfa. Además, el dispositivo también puede ayudar a los usuarios a endurecer y tirar de la piel para dar forma a tu figura de ensueño.




Eficacia del producto



El 85% de la grasa descompuesta se expulsará del cuerpo a través del sistema linfático y el 15% se convertirá en azúcar a través del hígado para apoyar las actividades diarias en humanos.

1. este dispositivo de pérdida de peso puede usarse como una alternativa a la grasa.
2. el dispositivo ayuda a endurecer y tirar de la piel y también ayuda a promover la circulación sanguínea de la piel.
3. ayudar a los usuarios a relajar y masajear la piel y los músculos.
4. perder peso de manera efectiva y resolver la grasa subcutánea.
5. eliminar eficazmente la celulitis y ayudar a la madre a resolver problemas como la caída abdominal posparto.

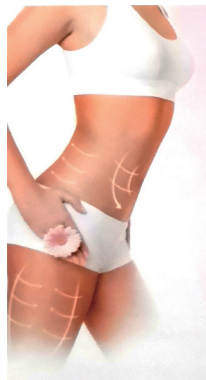

Da forma a tu figura encantadora

Tirar y apretar la piel
Piel apretada
Mejorar la piel
Cuidado abdominal
Levantar la cadera para modelar



Eficacia

1. Cintura
Promover la Peristalsis y la función ovárica.
2. Caderas
Moldea las caderas y aprieta la piel.

Comparación de la eficacia



Dar forma a la cintura y las piernas



Tecnología de equipos

1. tecnología de voladura de grasas de clase mundial.
2. se aplica a toda la piel.
3. indoloro, sin lesiones cutáneas, sin lesiones en el tejido cutáneo.
4. la operación es simple y fácil de usar.
5. eficaz y seguro.

Función del dispositivo

1. perder peso sin cirugía.
2. no hubo lesiones ni sangrado.
3. no hay reacciones adversas.
4. no hay daño al tejido cutáneo.
5. fácil de operar.

Presentación de la estructura del producto

Parámetros del producto

Frecuencia: 40 – 60Hz

Salida de energía: 35 – 60j / cm²

Potencia: 60WPeso: 2,4 kg

Tamaño del producto: 280*280*130 mm

Entrada de energía: 100 – 240v 2a (máximo)



Plug – in debice

Luz de Estado de
visualización
de energía

Energía –

Mango terapéutico

Energía +

Cambiar botón



Parte posterior de la estructura del producto




Guía de uso


1. guarde este equipo a la sombra y asegúrese de que el ventilador de disipación de calor en la parte inferior del equipo tenga suficiente espacio para ventilar.
2. conecte cuidadosamente y correctamente el mango del tratamiento.
3. el botón del interruptor rojo se encuentra en la parte posterior del dispositivo. "I" significa que el dispositivo está encendido, y "O" significa que el dispositivo está apagado.
4. Presione el botón on / off durante 2 segundos y se encenderá la Tercera luz, lo que significa que el usuario puede ajustarse ahora.
5. El tiempo máximo de trabajo continuo de la cabeza de chorro de grasa de 40k es de 30 minutos, y después de 30 minutos de uso, deje de usarla durante unos 5 minutos para enfriar la temperatura de la superficie de la cabeza de tratamiento. Este dispositivo está preestablecido antes de la entrega.
6. después de usarlo, apague el equipo y desconecte el enchufe.
7. después de usarlo, Presione el botón "off" en la superficie del instrumento, apague el instrumento detrás del botón rojo "O" y luego desconecte el cable de alimentación, etc.

Guía de uso recomendada


Antes de usar este dispositivo, aplique un poco de gel para el cuidado de la piel en el área de la piel objetivo. A continuación, ajuste la intensidad de trabajo adecuada del equipo y siga las siguientes instrucciones.

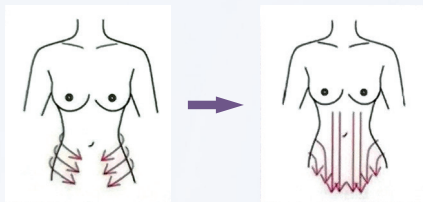


Deslice la cabeza del tratamiento lentamente y suavemente de acuerdo con la textura de la piel desde el abdomen hasta la ingle. Siga las instrucciones en la imagen.

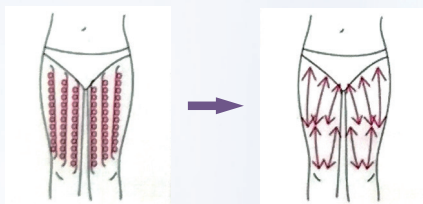

Deslice lentamente la cabeza del tratamiento de abajo hacia arriba y repita varias veces. Siga las instrucciones en la imagen.

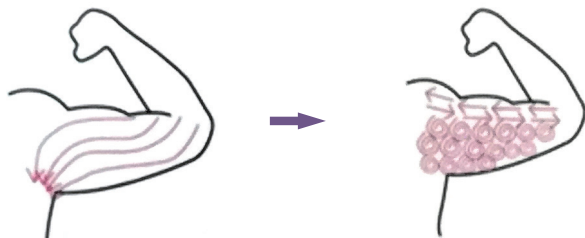

Primero, deslice la cabeza terapéutica del codo a la axila y luego deslice en círculos. Luego haga esta acción en sentido inverso y repita todo el proceso varias veces.

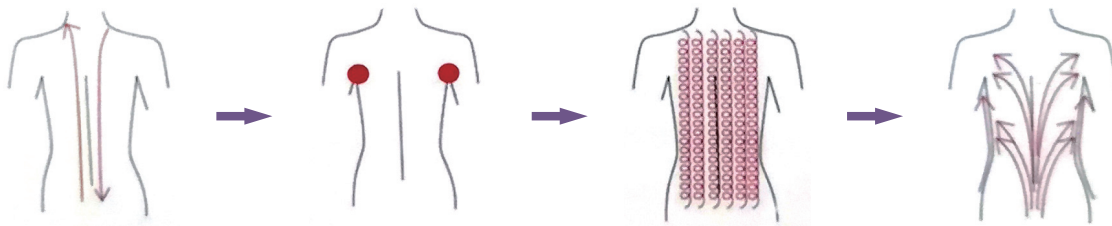

En primer lugar, deslice lentamente y suavemente la cabeza terapéutica de la parte superior del cuerpo hacia la vejiga y repita este proceso varias veces. Luego, el tratamiento de deslizamiento circular quema la grasa corporal. A continuación, el tratamiento se realiza siguiendo las pautas mostradas en la imagen de arriba para promover la circulación linfática.

Cuestiones de Seguridad

1. este equipo es un equipo de precisión y debe mantenerse seco y fresco.
2. evitar cualquier impacto severo en este equipo.
3. limpie este equipo con frecuencia para garantizar un funcionamiento normal y sin problemas.
4. si el equipo no está en uso, cubra con una cubierta de tela para evitar la entrada de polvo. Cuando el equipo no esté en uso durante mucho tiempo, inserte el equipo cada 15 días para evitar que el equipo se dañe debido a la humedad.

Prohibición de uso

1. los cables del equipo están dañados o se encuentran sobrecalentados.
2. el equipo no está estrechamente conectado a la toma de corriente.
3. no doble el enchufe del equipo con fuerza.
4. no desconecte el equipo al usarlo.
5. no use cables de alimentación incompatibles.
6. asegúrese de que los niños no tengan acceso al equipo.
7. no use ningún equipo de limpieza de líquidos corrosivos.
8. no opere el equipo cuando las manos estén mojadas.

Precauciones para el uso de la cabeza terapéutica

1. asegúrese de que la cabeza de tratamiento esté completamente en contacto con la piel objetivo, preferiblemente colocada verticalmente.
2. deslice la cabeza lentamente y suavemente.
3. después de usarlo, apague la función de esta cabeza de tratamiento.
4. cualquier daño en el dispositivo electrónico de la cabeza de tratamiento.



Recordatorio

1. la ecografía producida por este dispositivo puede causar tinnitus incómodo, lo cual es normal al usar este dispositivo.
2. preste plena atención al mantenimiento del equipo, especialmente las unidades complejas internas.
3. la conexión suelta de los componentes del equipo puede causar cortocircuitos.
4. después de usar el equipo, limpie correctamente para la próxima vez que lo Use.
5. se prohíbe el tratamiento a los pacientes con heridas o lesiones cutáneas.
6. los pacientes con epilepsia, enfermedades cardíacas o diabetes están prohibidos de recibir tratamiento.
7. está prohibido para mujeres embarazadas, menstruales o lactantes.



Servicio postventa

Este equipo (el cuerpo principal de este equipo) goza de una garantía de 6 meses a partir de la fecha de compra. Cualquier problema de equipo (el cuerpo principal del equipo) se detecta en un plazo de tres meses, se proporciona un servicio de mantenimiento gratuito y se debe pagar una tarifa de mantenimiento durante más de tres meses. Los problemas de calidad de la superficie de los accesorios del equipo pueden disfrutar de un mes de mantenimiento gratuito, y más de un mes debe pagar una tarifa de mantenimiento. Las siguientes averías de equipos no están incluidas en el Servicio de mantenimiento gratuito.

1. el usuario desmonta o reemplaza el equipo por sí mismo.
2. caída accidental durante el uso del equipo.
3. avería del equipo causada por un mantenimiento deficiente.
4. no operar el equipo de acuerdo con las instrucciones del producto.

Tarjeta de servicio

Nombre del producto: _____ Fecha de compra: _____ Nombre del comprador: _____

TEL: _____ Dirección: _____ Fecha de mantenimiento: _____

Descripción de la falla: _____

Declaración de mantenimiento: _____

mini 40K
cavitation

MINI 40K

Vetstralen Gewichtsverlagend apparaat

Om uw gewicht professioneel te verminderen

GEBRUIKERShandboek

mini 40K
cauitation



Over product

Beste klant, bedankt voor de aankoop van dit gewichtsreducerende apparaat!

Wij geloven dat dit apparaat u een professionele manier van gewichtsverlies zal bieden en u helpt extra vet effectief af te schudden. Zoals zijn naam genoemd, geeft 40K aan dat de werkfrequentie van het apparaat 40000Hz is die technisch de ultrasone is die inafrequentieband die zeer ideaal is voor het verminderen van gewicht.

Veilig om te gebruiken zoals het is, moet u nog steeds de gebruikershandleiding doorlezen alvorens operaties.



INHOUD

Producttheorie	1
Productdetails	4
Handleiding gebruiken	6
Aanbevolen gebruiksaanwijzing	8
Veiligheidsproblemen	9
Voorzichten met betrekking tot de behandelingsstok	10
Tips	11
Service na verkoop	12

WERKTHEORIE VAN HET PRODUCT

Het vet-stralende apparaat komt met de vetreducerende theorie van ultrasone die hoge dichtheidsenergie produceert. Wanneer de ultrasone diep tot huid doordringt, kan de ultragolf vetcellen vervreemden om leegheden te veroorzaken, zullen deze leegheden imploderen om de opgehoopte ultrasone energie vrij te geven en ultrasnelle microtrilling te activeren om vet onmiddellijk te verbranden. Deze gewichtsverlies methode geniet van de functie dat nul pijn doet aan huidweefsels en lymfe. Ook dit apparaat helpt de gebruiker om de huid aan te spannen en op te tillen om u een droomfigur te vormen.




PRODUCTEFFICATIE



85% opgelost vet zal uit het lichaam worden gekanaliseerd door middel van lymfestelsel, 15% vet zal worden vertaald in suiker via lever om de dagelijkse activiteiten van de mens te ondersteunen.

- 1.This gewichtsverlies apparaat kan een alternatief van liposuctie zijn.
- 2.This apparaat helpt bij het aanscherpen en opheffen van de huid, bevordert ook de bloedcirculatie van de huid.
- 3.Helpt gebruikers te ontspannen en hun huid en spieren te masseren.
- 4.Effective in het verminderen van gewicht en het oplossen van vet onder huid.
- 5.Effective om cellulitis te verwijderen en helpt bevallend om problemen op te lossen zoals slappe buik na de bevalling.

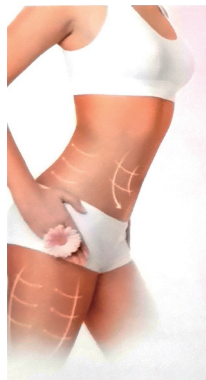

Vorm je de aantrekkelijke figuur

De huid optillen en strakker maken
Huidversterking
Huid verfijnen
Buikbezorging
Hef en vorm heup

Werkzaamheid



1. Taille
Bevorder peristole en eierstokfunctie.
2. Heup
Vorm heup en strak huid.

Werkzaamheidsvergelijking



Vorm taille en benen



Apparaattechnologie

1. world class vet blasting technologie.
2. Toepasselijk voor alle huidtypes.
3. Painless, nul huid pijn, geen huidweefselschade.
4. Easy verrichting, geschikt om te gebruiken.
5. Effectief en veilig.

Apparaatfuncties

1. Reduce gewicht zonder operatie.
2. Geen pijn en bloeden.
3. Zero bijwerkingen.
4. Geen schade aan huidweefsels.
5. Easy te bedienen.

PRODUCTSTRUCTUURSHOW

Productparameters

Frequentie: 40--60Hz

Energieoutput: 35--60J/cm²

Vermogen: 60W

Gewicht: 2,4Kg

Grootte van het product: 280*280*130mm

Power input: 100--240V 2A (MAX)



Device addapter



DE BACK VAN DE PRODUCTSTRUCTUUR




GEBRUIKSGRAAD


1. Sla dit apparaat op koele plaats op en zorg ervoor dat de warmteemissieventilator aan de onderkant van het apparaat voldoende ruimte heeft voor het ventileren van warmte.
2. Please sluit zorgvuldig en correct het behandelhandvat aan.
3. De rode schakelaar knop ligt aan de achterkant van het apparaat. "I" betekent dat het apparaat aan staat, "O" betekent dat het apparaat uit is.
4. Long druk op de ON/OFF knop voor 2 seconden, dan zal het derde licht aan zijn, dat betekent dat de gebruiker op dit moment kan worden versteld.
5. De maximale ononderbroken werktijd van de 40K vetstraalkop is 30 minuten, na 30 minuten gebruik, stop alstublieft met het gebruik van ongeveer 5 minuten om de oppervlaktetemperatuur van het behandelhoofd af te koelen. Dit apparaat is vooraf ingesteld voor levering.
6. After gebruik, schakel het apparaat uit en trek het uit.
7. After gebruik volgens de knop "UIT" op het oppervlak van het instrument en apparatuur aan de achterkant van de rode knop "O" om het instrument uit te sluiten, trek dan het netsnoer los, etca.

AANGEGEVEN GEBRUIKSGRAAD


Voordat u het apparaat gebruikt, smeer alstublieft wat huidverzorgingsgel op het doel huidgebied. Pas vervolgens de juiste werkintensiteit van het apparaat aan en volg de onderstaande instructies.

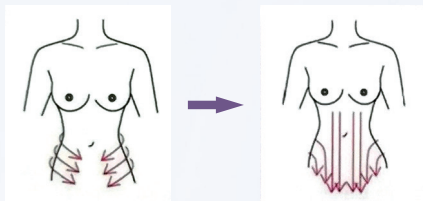


Laat het behandelhoofd langzaam en voorzichtig glijden door de huidtextuur van buik tot lies te volgen. Volg de instructies op de foto.

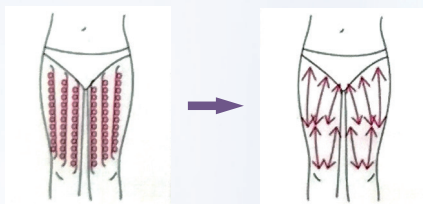

Schuif de behandelkop langzaam van onder naar boven en herhaal dit meerdere keren. Volg de instructies op de foto.

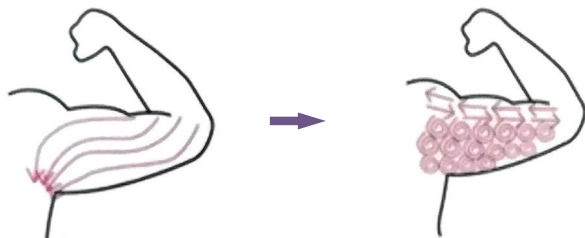

Eerst, glijdt het behandelhoofd van de elleboog naar de oksel en glijdt in cirkel. Doe dan deze beweging in omgekeerde richting en herhaal het hele proces meerdere keren.

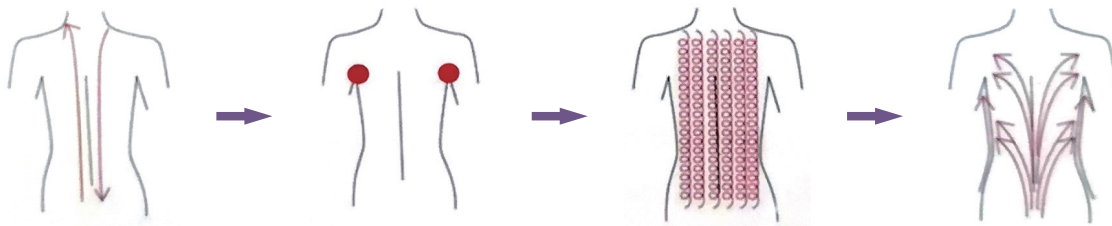

Ten eerste, glijdt de behandelkop langzaam en voorzichtig van het bovenste deel van het lichaam naar de blaas en herhaal dit proces meerdere malen. Vervolgens glijdt de behandeling in cirkel om het vet in het lichaam te verbranden. Vervolgens glijdt de behandeling door de aanwijzingen op bovenstaande foto te volgen om de lymfecirculatie te bevorderen.

VEILIGHEIDSBESCHEREN

- 1.Dit apparaat behoort tot een verfijnd soort dat droog en koel moet worden gehouden.
- 2.Prevent dit apparaat tegen gewelddadige gevolgen.
- 3.Maak dit apparaat regelmatig schoon om een normale en soepele werking te verzekeren.
- 4.Als het apparaat niet in gebruik is, bedek het dan met een doekdekking om het tegen stof te houden.Wanneer het apparaat lange tijd ongebruikt wordt gelaten, sluit u het apparaat elke 15 dagen aan om het apparaat te beschermen tegen schade veroorzaakt door vochtigheid.

VERBODEN GEBRUIK

- 1.De kabel van het apparaat is beschadigd of vindt dat de kabel oververhit is.
- 2.Device is niet strak aangesloten op het stopcontact.
- 3.Buig de stekker van het apparaat niet krachtig.
- 4.Trek het apparaat niet los tijdens het gebruik van het apparaat.
- 5.Gebruik geen incompatibele voedingskabel.
- 6.Zorg ervoor dat het apparaat onbereikbaar is voor kinderen.
- 7.Maak het apparaat niet schoon door corrosieve vloeistof te gebruiken.
- 8.Gebruik het apparaat niet wanneer handen nat zijn.

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN BEHANDELINGSKOP

1. Zorg ervoor dat het behandelhoofd volledig contact opneemt met de doel huid, beter verticaal.
2. Glide het hoofd langzaam en voorzichtig.
3. After beëindig gebruik, schakel alsjeblieft de functie van dit behandelhoofd uit.
4. Any schade gevonden op het elektron van deze behandelingskop.



Herinnering

- 1.The ultrasone geproduceerd door dit apparaat kan ongemakkelijk tinnitus veroorzaken die normaal is tijdens dit apparaat gebruiken.
- 2.Please hecht voldoende aandacht aan het onderhoud van het apparaat, vooral de geavanceerde eenheden binnen.
- 3.Loosened verbindingen van apparaatcomponenten kunnen leiden tot kortsluiting.
- 4.After apparaat gebruiken, reinig het goed voor volgende keer gebruik.
- 5.Patiënt die huidwonden of letsel heeft, is verboden om de behandeling te nemen.
- 6.Diseases lijdt zoals epilepsie, hartziekte of diabetes zijn verboden om de behandeling te nemen.
- 7.Zwangere vrouwen, vrouwen in periode of zuigperiode zijn verboden om de behandeling te nemen.



NAVERKOOPSDIENST

Dit apparaat (hoofdlichaam van dit apparaat) geniet van 6 maanden garantie sinds de dag van aankoop. Elk apparaat (hoofdlichaam van dit apparaat) problemen gedetecteerd in 3 maanden, gratis reparatieservice wordt aangeboden, reparatiekosten worden geredquired over drie maanden. De apparaataccessoires genieten van een maand gratis reparatie voor opgedoken kwaliteitsproblemen, reparatiekosten zijn vereist over een maand. De volgende apparaatstoringen zijn niet inbegrepen in het aanbod van gratis reparatieservice.

1. Demonteer of wijzig het apparaat door gebruikers zelf.
2. Accidentally vallen tijdens het gebruik van het apparaat.
3. Device storingen veroorzaakt door slecht onderhoud.
4. Operate het apparaat zonder de handleiding van het product te volgen.

Dienstkaart

Productnaam: _____ Datum van aankoop: _____ Kopersnaam: _____

TEL: _____ Adres: _____ Datum van reparatie: _____

Beschrijving van storing: _____

Reparatie statement: _____

mini 40K
cavitation